

Roger Select™

사용자 설명서



roger

목차

1.	인사말	4	8.	부가 기능	38
2.	로저 셀렉트 알아보기	5	8.1	음소거	38
2.1	명칭 설명	6	8.2	로저 기기들과 연결 해제(NewNet)	38
2.2	액세서리	8	8.3	재설정	39
2.3	상태표시등	10	8.4	페어링된 블루투스 장치 목록 지우기	39
3.	시작하기	12	9.	로저 셀렉트를 다른 로저 송신기와 함께 사용하기	40
3.1	로저 송신기 충전하기	12	9.1	다른 송신기와 연결	40
3.2	로저 셀렉트 켜기	14	9.2	여러 개의 송신기 사용하기	42
3.3	로저 수신기에 로저 셀렉트 연결	15	10.	문제 해결 방법	43
4.	로저 셀렉트를 사용하여 더 잘 듣기	18	11.	서비스 및 제품 보증	48
4.1	테이블에서 더 잘 듣기	18	11.1	현지 제품 보증 서비스	48
4.2	먼 거리에 있는 화자의 대화 더 잘 듣기	21	11.2	국제 제품 보증 서비스	48
5.	TV 또는 다른 오디오 장치 청취하기	24	11.3	제품 제한 보증	49
5.1	도킹 스테이션 설정하기	24	12.	적합성 정보	50
5.2	도킹 스테이션을 사용하여 TV 청취하기	26	13.	기호 안내 및 설명	54
6.	휴대용 오디오 장치 청취하기	28	14.	경고 및 주의 사항	57
7.	블루투스® 무선 기술을 사용하여 전화 통화	30	14.1	위험 경고	57
7.1	블루투스란?	30	14.2	사용 상의 주의 사항	60
7.2	로저 셀렉트를 전화기/컴퓨터와 페어링	33	14.3	그 외 중요 정보	61
7.3	전화 통화	34			
7.4	추가 블루투스 옵션	36			

1. 인사말

로저 셀렉트는 스위스에 본사를 두고 있는 세계적인 청취 솔루션 브랜드 포낙의 제품입니다.

이 프리미엄 제품은 수십 년간의 연구와 전문성으로 빚어낸 결과이며 사용자가 소리의 아름다움을 항상 느낄 수 있도록 설계되었습니다. 이렇게 탁월한 선택을 해주셔서 감사드리며 오랫동안 듣는 즐거움을 누리시기 바랍니다.

로저 셀렉트를 사용하기 전에 사용자 설명서를 읽고 제품 사용방법을 숙지하시면 더욱 쉽고 편리하게 이용하실 수 있습니다. 기능 및 이점에 대한 자세한 정보는 청각 전문가에게 문의하십시오.

포낙 - life is on
www.phonak.com

본 사용자 설명서는
2024년 부착된 로저 셀렉트 3 CE 마크에 적용됩니다.


2. 로저 셀렉트 알아보기

로저 셀렉트는 화자의 목소리를 픽업하여 무선으로 직접 양쪽 보청기에 보내는 송신기입니다. 로저 셀렉트를 테이블 중앙에 배치할 수도 있고(예: 식당에서) 한 사람이 착용하게 할 수도 있습니다(예: 먼 거리에 있는 화자의 목소리를 들을 때).




① 로저 셀렉트는 일반적으로 보청기로부터 최대 25미터/80피트 이내의 범위에서 작동합니다. 사람 또는 벽이 있을 경우 이 거리가 줄어들 수 있습니다. 로저 셀렉트를 눈으로 직접 볼 수 있는 범위(즉, 가시선상)까지가 가능한 최대 범위입니다.

2.1 명칭 설명

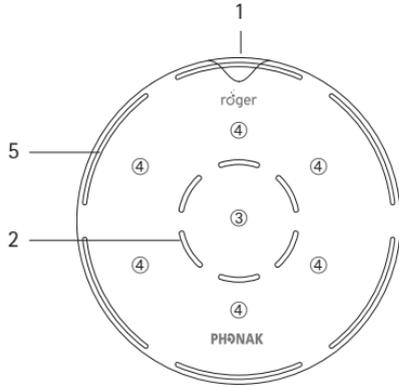


- 1 켜기/끄기 버튼(배터리 상태표시등 포함)
- 2 송신기 및 중앙 상태표시등
- 3 중앙 터치 버튼
- 4 6개의 조정 터치 버튼
- 5 송신기 모드 상태표시등

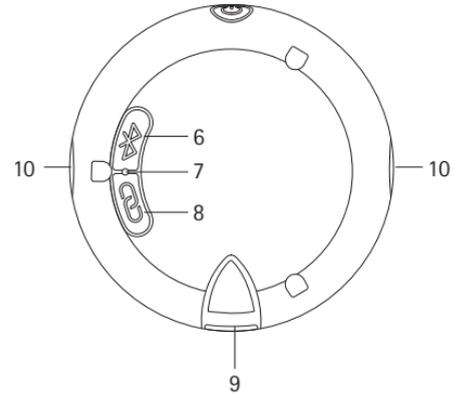


- 6 블루투스 버튼
- 7 뒷면 상태표시등
- 8 연결 버튼
- 9 Micro-USB 소켓
- 10 목걸이 및 클립을 위한 슬롯

2.2 액세서리

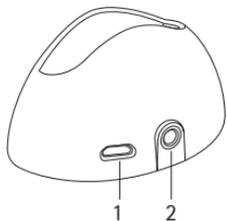

도킹 스테이션


- 1 외부 전원 공급장치 입력부
- 2 디지털/아날로그 오디오 입력부

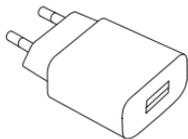


외부 전원 공급장치



아날로그 오디오 케이블

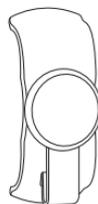

자석 클립

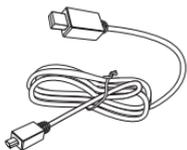


USB 케이블



디지털 오디오 케이블





목걸이

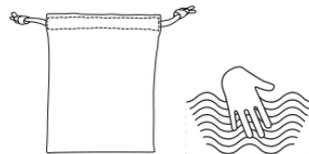

보관용 파우치

2.3 상태 표시등

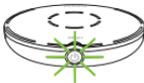	녹색등 빠르게 깜박임 녹색등 계속 켜져 있음 녹색등 느리게 깜박임	충전 완전히 충전됨 전원 켜짐, 배터리 충전 완료
	주황색등 깜박임	배터리 절반 충전 배터리 방전,
	빨간색등 깜박임	로저 셀렉트 충전 필요
	송신기 모드 6개 세그먼트에 모두 녹색등이 켜져 있음 1번에서 5번까지의 녹색 세그먼트	모든 방향(전방향) 으로 송신기 활성화 선택한 방향으로 송신기 활성화
	음소거 빨간색등 계속 켜져 있음 빨간색등 깜박임	송신기 음소거됨 음소거 해제 불가, 동일한 네트워크에서 다른 로저 셀렉트가 활성화되어 있음
		

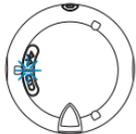
	블루투스 파란색등 느리게 깜박임	블루투스 대기 모드
	파란색등 두 번 깜박임	수신 전화
	파란색등 계속 켜져 있음	활성화 전화
	연결하기 파란색등 깜박임	네트워크 문제입니다. 연결 버튼을 누르십시오.
	녹색 등 계속 켜져 있음	연결 또는 페어링 모드 연결/페어링 성공
	빨간색등 두 번 깜박임 빨간색등 길게 세 번 깜박임	연결 시간 초과, 장치를 더 가깝게 이동해야 함 장치가 호환되지 않음

3. 시작하기

3.1 로저 송신기 충전하기

로저 송신기를 충전하는 방법에는 아래와 같이 3가지가 있습니다.

A) 외부 전원 공급장치 사용: 충전 케이블의 작은 쪽 끝을 로저 송신기에 연결합니다. 충전 케이블의 큰 쪽 끝을 외부 전원 공급장치에 연결합니다. 외부 전원 공급장치를 벽에 있는 콘센트에 연결합니다.

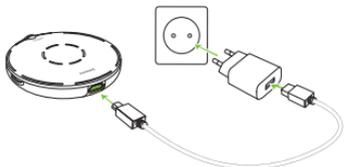

B) 컴퓨터 또는 태블릿에서: 충전 케이블의 작은 쪽 끝을 로저 송신기에 꽂습니다. 충전 케이블의 큰 쪽 끝을 컴퓨터의 USB 포트에 연결하고 컴퓨터 전원을 켭니다.




C) 도킹 스테이션을 통해: 로저 셀렉트를 도킹 스테이션에 끼웁니다.

① 도킹 스테이션을 설정하려면 5.1장을 읽어 보십시오.



충전 중 배터리 상태표시등

로저 송신기가 완전히 충전될 때까지 전원 버튼 주위의 배터리 상태표시등이 녹색으로 깜박입니다. 완전히 충전되면 배터리 상태표시등이 녹색으로 계속 켜져 있습니다.

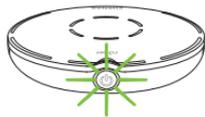


충전



완전히
충전됨

3.2 로저 셀렉트 켜기

송신기 모드 상태표시등이 켜질 때까지  버튼을 1초 동안 누릅니다.

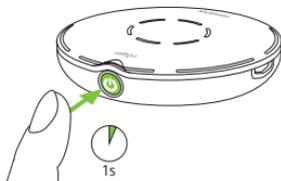

전원을 켜 후 배터리 상태표시등

로저 송신기가 켜지면 전원 버튼 주위의 배터리 상태표시등이 부드럽게 깜박입니다. 녹색등이 깜빡이면 배터리가 완전히 충전된 것입니다. 완전히 충전된 장치는 약 8시간 동안 사용 가능합니다. 주황색이 깜빡이면 배터리가 절반 정도 남아있는 상태입니다. 상태표시등이 빨간색등으로 깜빡이기 시작하면, 로저 송신기를 바로 충전해야 합니다.




로저 송신기를 충전하십시오.

3.3 로저 수신기에 로저 셀렉트 연결

로저 수신기는 보청기/어음 처리기에 부착하거나 몸에 부착할 수 있습니다(스트리머에 연결된 로저 넥루프 또는 로저 X).

청각 전문가가 이미 로저 송신기를 로저 수신기에 연결했을 수 있습니다. 그렇지 않다면 다음과 같이 로저 수신기를 연결하십시오.

1. 로저 송신기와 로저 수신기를 켭니다.
2. 로저 송신기를 로저 수신기와 가까운 곳에 (10cm/4인치 이내) 놓습니다.
3. 로저 송신기의 연결 버튼을  누릅니다.

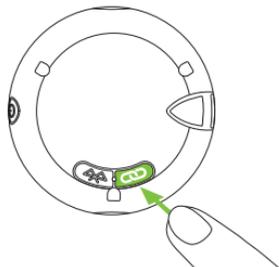

상태표시등(뒷면)이 2초 동안 녹색으로 변하면 성공적으로 연결된 것입니다.

상태표시등 연결하기

연결 버튼을 누르면 뒷면의 상태표시등을 통해 다음과 같은 피드백이 나타날 수 있습니다.

	연결 중
	연결 성공 - 로저 수신기가 로저 송신기에 연결되었습니다.
	로저 송신기가 로저 수신기를 찾을 수 없습니다. 장치를 로저 수신기에 가깝게 놓고 로저 수신기의 전원이 켜져 있는지 확인하십시오. 그런 다음 다시 연결해 보십시오.
	로저 수신기가 로저 송신기와 호환되지 않습니다.

① 수량의 제한없이 로저 수신기를 로저 송신기에 연결할 수 있으며, 다른 로저 수신기에 대해서도 2단계와 3단계를 반복하기만 하면 됩니다.

4. 로저 셀렉트를 사용하여 더 잘 듣기

로저 셀렉트는 다양한 기능을 가진 지능형 제품입니다. 이 제품은 사용자의 현재 상황을 감지하고 송신기 설정을 자동으로 조정하여 가능한 최상의 어음 이해도를 제공합니다.

- ① 최상의 어음 이해도를 위해 항상 로저 송신기를 대화하는 상대방에게 최대한 가까이 놓으십시오.

4.1 테이블에서 더 잘 듣기

테이블 중앙에 로저 송신기를 놓고 그룹으로 모여 있는 사람들의 음성을 듣습니다.



로저 송신기는 전방향 송신기를 활성화합니다. 화자가 말하면 로저 송신기가 송신기 초점을 화자에게 맞추고 배경 소음을 줄입니다.

두 명 이상이 동시에 말하는 경우에는 특정인에게 초점을 맞추도록 세그먼트를 눌러 지정할 수 있습니다.



추가 세그먼트를 눌러 다른 사람을 추가할 수도 있습니다.



활성화된 세그먼트를 다시 누르면 선택한 방향이 비활성화됩니다.



전체 그룹의 음성을 들으려면 다시 중앙 버튼을 누르십시오.



송신기 모드 상태표시등

장치를 누르거나 이동할 때마다 송신기 모드 상태표시등에 활성화된 세그먼트가 표시됩니다. 배터리 전원을 절약하기 위해 몇 초가 지나면 상태표시등이 희미해집니다.



여섯 방향 모두 활성화됨




선택한 방향만 활성화됨

- ① 테이블이 없는 경우에는 로저 송신기를 손바닥에 올린 상태로 들고 있을 수도 있습니다. 그러면 테이블에 놓았을 때와 동일하게 사용할 수 있습니다.

4.2 먼 거리에 있는 화자의 대화 더 잘 듣기


로저 셀렉트를 사용하면 원거리에서나 매우 시끄러운 환경에서도 한 명의 대화 파트너의 소리를 들을 수 있습니다. 일반적인 조건에서는 25m/80피트 떨어진 거리에서도 화자의 음성을 들을 수 있습니다.

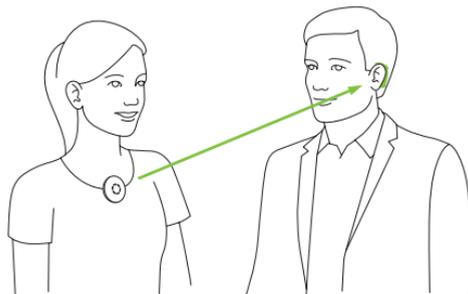

장치를 화자에게 주기 전에 목걸이나 옷깃에 클립으로 부착하십시오. 로저 송신기는 적절한 송신기 모드를 자동으로 활성화합니다.

클립 사용하기

1) 클립을 로저 송신기에 부착합니다. 클립을 로저 송신기 측면의 작은 슬롯에 딸깍 소리가 나도록 끼웁니다.

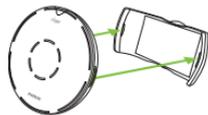

2) 자석 클립을 엽니다.



3) 클립을 화자의 셔츠에 부착합니다.




최상의 결과를 얻으려면 로저 송신기가 입에서 약 20cm/8인치 떨어진 곳의 가슴 중간에 착용해야 합니다.



목걸이 사용하기

1) 목걸이를 로저 송신기에 연결합니다. 목걸이를 로저 송신기 측면의 작은 슬롯에 딸깍 소리가 나도록 끼웁니다.

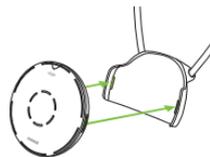

2) 목걸이를 화자의 목에 걸고 길이를 조절하여 로저 송신기가 입으로부터 약 20cm/8인치 이내에 있도록 길이를 조정합니다.



송신기 모드 상태표시등 화자가 로저 셀렉트를 착용하면, 맨위의 송신기 모드 상태표시등이 켜집니다.




클립 또는 목걸이 제거하기 클립 또는 목걸이 옆의 한쪽 부분을 눌러 로저 송신기에서 분리합니다.




5. TV 또는 다른 오디오 장치 청취하기

5.1 도킹 스테이션 설정하기

- 1) USB 케이블의 작은 쪽 끝을 도킹 스테이션의 외부 전원 입력부에 연결합니다.
- 2) USB 케이블의 큰 쪽 끝을 도킹 스테이션의 외부 전원 입력부에 연결합니다.
- 3) 외부 전원 공급장치를 벽에 있는 콘센트에 연결합니다.

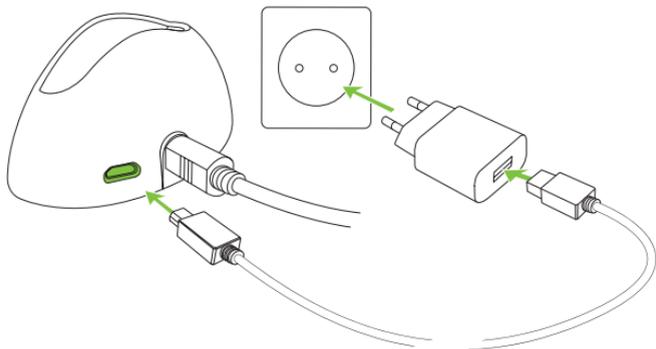

- 4) 광(Toslink) 케이블의 연결 단자를 TV 또는 다른 오디오 장치의 광출력 단자에 연결합니다.

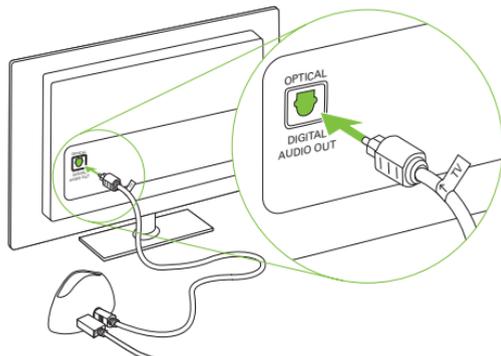

① TV 또는 다른 오디오 장치에 광 오디오 출력이 없는 경우, 아날로그 오디오 케이블을 사용하여 TV와 도킹 스테이션을 연결할 수 있습니다. 최대 오디오 출력은 1.4Vrms이며, 오디오 입력 전압이 더 높으면 장치가 손상될 수 있습니다.

① 광학 Toslink 케이블을 장치 또는 TV에 연결한 경우, 광 케이블의 빛으로부터 눈을 보호하시기 바랍니다.


5.2 도킹 스테이션을 사용하여 TV 청취하기

1) 로저 송신기를 도킹 스테이션에 끼웁니다. 로저 송신기가 도킹 스테이션에 삽입되면 전원이 자동으로 꺼집니다.



2) TV(또는 다른 오디오 장치)를 켭니다. 로저 송신기가 오디오 신호를 양쪽 보청기에 자동으로 전송합니다.

오디오 신호의 전송을 종료하려면 TV(또는 다른 오디오 장치)를 끄거나 로저 송신기를 도킹 스테이션 밖으로 꺼내십시오.

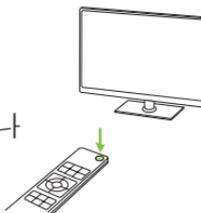


- ① 오디오가 전송되면 로저 셀렉트의 내장 송신기는 음소거됩니다. 중앙 터치 버튼을 눌러 로저 송신기의 송신기를 활성화/비활성화할 수 있습니다(전방향성 송신기만 해당).


음소거 상태표시등

로저 송신기를 도킹 스테이션에 삽입한 상태에서 오디오를 전송하면 가운데 빨간색 상태표시등이 나타납니다.

로저 송신기는 자체 송신기가 음소거된 상태에서 오디오 신호를 전송합니다.

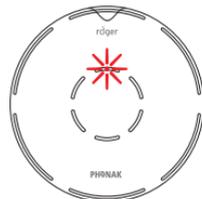


오디오를 전송할 때 로저 송신기는 송신기 신호를 동시에 전송합니다.

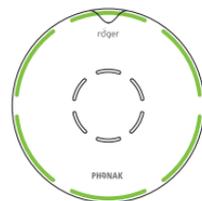

6. 휴대용 오디오 장치 청취하기

- 1) 로저 송신기의 전원을 켭니다.
- 2) 짧은 오디오 케이블의 직사각형 끝을 로저 송신기에 연결합니다.
- 3) 짧은 오디오 케이블의 둥근 끝을 휴대용 장치의 헤드폰 출력 단자에 연결합니다.
- 4) 휴대용 오디오 장치에서 음악 또는 음악 앱을 시작합니다.

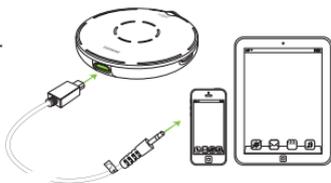


- ① 오디오 케이블을 연결하면 로저 송신기가 자동으로 음소거됩니다. 중앙 터치 버튼을 눌러 송신기를 활성화할 수 있습니다. 이제 오디오 장치와 송신기를 동시에 들을 수 있습니다.

오디오 신호의 전송을 종료하려면 오디오 케이블을 분리하거나 로저 송신기의 전원을 끄십시오.


음소거 상태 표시등

오디오 케이블이 로저 송신기에 연결되면 중앙에 있는 빨간색 상태표시등이 켜집니다.

로저 송신기는 자체 송신기가 음소거된 상태에서 오디오 신호를 전송합니다.

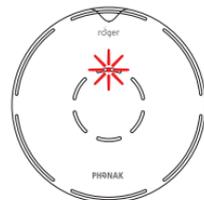

오디오를 전송할 때 로저 송신기는 송신기 신호를 동시에 전송합니다.

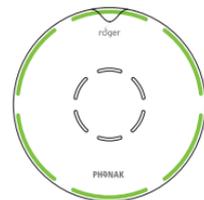


7. 블루투스® 무선 기술을 사용하여 전화 통화

로저 셀렉트를 통해 휴대폰, 스마트폰, 유선 전화기, 태블릿 및 컴퓨터와 같은 블루투스 무선 기술이 지원되는 제품에 연결하여 전화를 걸고 받을 수 있습니다.

7.1 블루투스란?

블루투스는 블루투스 무선 기술이 지원되는 장치로 전화를 거는 방법을 제공합니다.

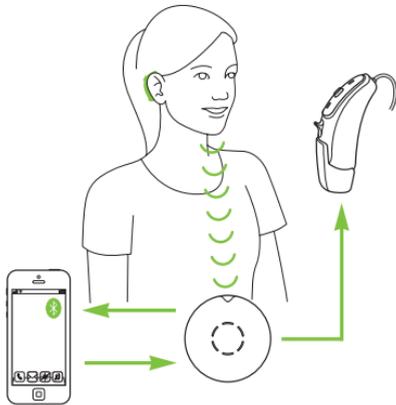

내 로저 셀렉트에 어떤 블루투스 장치를 사용할 수 있습니까?

먼저 사용할 장치에 블루투스 무선 기술이 사용되는지 확인하십시오. 장치 또는 장치의 사용자 설명서에서 블루투스 기호를 찾습니다.

두 번째, 블루투스 장치의 가능한 응용프로그램은 '프로파일'로 정의됩니다. 로저 송신기에 사용할 장치는 '헤드셋' 또는 '핸즈프리' 프로파일(HS/HFP)을 지원해야 합니다.

블루투스 장치 호환성

블루투스 장치와 로저 송신기 간 연결에 문제가 발생하는 경우 또는 장치의 블루투스 호환성에 대해 잘 모르는 경우 장치의 사용자 설명서를 참조하거나 현지 대리점에 문의하십시오.

Bluetooth® 워드 마크와 로고는 Bluetooth SIG, Inc가 소유한 등록 상표이며 Sonova Communications AG는 라이선스 계약에 따라 이러한 마크를 사용합니다. 기타 상표 및 상표명은 해당 소유자의 재산입니다.

블루투스 작동 범위


로저 송신기는 3미터(10ft) 범위까지 블루투스 클래스 2 작동을 지원합니다.

로저 송신기와 전화기/컴퓨터 간의 가시선은 필요 없습니다. 그러나, 다음과 같은 요인이 적용 범위에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.

- 환경 내 다른 장치 간섭
- 연결 중인 블루투스 장치는 더 제한된 범위만 지원할 수 있습니다.

7.2 로저 셀렉트를 전화기/컴퓨터와 페어링

- 1) 로저 송신기와 전화기/컴퓨터를 컵니다. 서로 옆에 놓습니다.
- 2) 전화기/컴퓨터의 블루투스 설정이 활성화되었는지 확인합니다.
- 3) 전화기/컴퓨터에서 검색 또는 스캔을 선택하여 블루투스 장치 또는 오디오 향상 기능을 검색합니다.
- 4) 로저 송신기의 페어링 프로세스를 시작하려면 뒷면의 상태표시등이 파란색으로 뚜렷해질 때까지 2초 동안 블루투스 버튼을  을 누릅니다. 그런 다음 다시 블루투스 버튼을 짧게 누르면 뒷면의 상태표시등이 파란색으로 깜박이기 시작합니다.
- 5) 전화기/컴퓨터에 감지된 블루투스 장치의 목록이 나타납니다. 이 목록에서 로저 셀렉트를 선택하고 연결을 설정할 것임을 확인합니다.

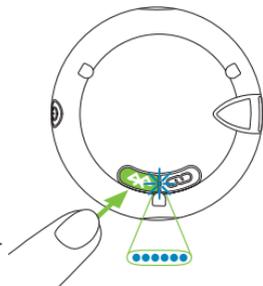

- 6) 로저 송신기가 이제 전화기/컴퓨터에 페어링되고 상태표시등이 깜박임을 중지합니다.
- 7) 다른 블루투스 장치를 추가하려면 뒷면의 상태표시등이 다시 파란색으로 깜박이기 시작할 때까지 블루투스 버튼  을 살짝 누르고 2-6단계를 반복합니다.

① 전화기/컴퓨터에서 암호 입력을 요청할 수 있습니다. 그렇다면 '0000'(영 4개)를 입력합니다. 일부 전화기/컴퓨터에서 활성화할 블루투스 서비스를 요청하고 헤드셋 오디오 장치와 송신기를 병렬로 선택할 것을 요청할 수 있습니다.

7.3 전화 통화

수신 전화 받기

전화 통화를 받으면 로저 송신기의 블루투스 상태표시등이 파란색으로 깜박이기 시작합니다. 수신 통화를 받으려면 가운데 터치 키를 누릅니다.



전화 통화

전화기/컴퓨터의 키패드를 사용하여 전화할 번호 또는 연락처를 입력하고 통화 버튼을 누릅니다. 잠시 후 보청기에서 신호음이 들립니다.

통화 중 로저 송신기에 대고 말하기

최상의 결과를 얻으려면 통화하는 동안 로저 송신기를 가슴에 부착하는 것이 좋습니다.



또는 로저 송신기를 앞에 있는 테이블에 놓을 수 있습니다.

통화 종료

통화를 종료하려면 가운데 터치 키를 길게 누르거나 전화 장치에서 통화를 종료합니다.

통화 거부

수신 통화를 받고 싶지 않으면 파란색 등이 깜박임을 멈출 때까지 가운데 터치 키를 2초 동안 누릅니다. 전화기/컴퓨터를 사용하여 통화를 거부해도 결과가 같습니다.

통화 음소거

자신의 음성을 음소거하려면 가운데 터치 키를 누르십시오. 빨간색 상태표시등이 켜집니다.

7.4 추가 블루투스 옵션

로저 셀렉트를 블루투스 대기 모드로 유지

로저 송신기를 블루투스 장치와 페어링했으며 로저 송신기의 블루투스 기능이 활성화됩니다. 이제 로저 송신기를 끌 수 있는 두 가지 옵션이 있습니다.

- A. 켜기/끄기 버튼을 길게 누르면 로저 송신기와 블루투스 기능이 꺼집니다. 전화를 걸 수 없습니다. 로저 송신기를 다시 켜면 블루투스도 다시 활성화됩니다.

- B. 켜기/끄기 버튼을 짧게 누르면 로저 송신기가 블루투스 대기 모드로 전환됩니다. 이것은 로저 송신기 송신기는 꺼지지만 수신 전화는 계속 받을 수 있음을 의미합니다.

❶ 블루투스 대기 모드에서는 로저 송신기의 배터리가 소모됩니다. 전화를 걸지 않을 것으로 예상되면 로저 송신기를 완전히 끄는 것이 좋습니다.

블루투스 비활성화/활성화

로저 송신기의 블루투스 기능을 장시간 사용하지 않는 경우 뒷면의 파란색 상태표시등이 희미해질 때까지 2초 동안 블루투스 버튼을 ✖을 길게 눌러 블루투스를 비활성화할 수 있습니다.

블루투스를 다시 활성화하려면 뒷면의 파란색 상태표시등이 뚜렷해질 때까지 2초 동안 블루투스 버튼을 ✖을 길게 누릅니다.

8. 부가 기능

8.1 음소거

로저 송신기를 음소거하려면 중앙에 있는 빨간색 상태표시등이 나타날 때까지 장치의 중앙 터치 버튼을 한 번 또는 두 번 누릅니다.



로저 셀렉트의 송신기를 다시 활성화하려면 중앙 터치 버튼을 누릅니다.

❶ 화자가 장치를 착용하면 음소거 기능을 사용할 수 없습니다.

8.2 로저 기기들과 연결 해제(NewNet)

 연결된 수신기 또는 다른 로저 송신기에서 로저 송신기를 분리하려면 연결 버튼을 7초 동안 누릅니다. 로저 송신기가 연결된 모든 장치에서 연결 해제되면 뒷면 상태표시등이 주황색으로 바뀝니다.

8.3 재설정


로저 송신기가 명령에 응답하지 않으면 켜기/끄기 버튼과 블루투스 버튼을 함께 10초 동안 눌러 재설정할 수 있습니다.

8.4 페어링된 블루투스 장치 목록 지우기

모든 페어링된 블루투스 장치에서 로저 송신기 연결을 해제하려면 연결 버튼  과 블루투스 버튼을  7초 동안 누릅니다. 페어링된 블루투스 장치 목록이 지워지면 뒷면의 상태표시등이 주황색으로 켜집니다.

9. 로저 셀렉트를 다른 로저 송신기와 함께 사용하기

로저 셀렉트는 다른 로저 송신기(예: 로저 테이블 마이크)와 결합할 수 있습니다. 여러 송신기를 사용하면 더 큰 그룹 또는 먼 거리에 있는 여러 화자의 음성을 들을 수 있습니다.

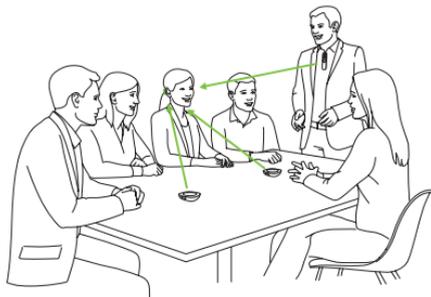


9.1 다른 송신기와 연결

로저 셀렉트에 다른 송신기를 연결하려면 다음 단계를 따르십시오.

- 1) 로저 셀렉트와 다른 송신기의 전원을 켭니다.
- 2) 로저 셀렉트와 다른 송신기를 서로 가까운 곳 (10cm/4인치 이내)에 놓습니다.
- 3) 로저 셀렉트의 연결 버튼을 누릅니다.

인치

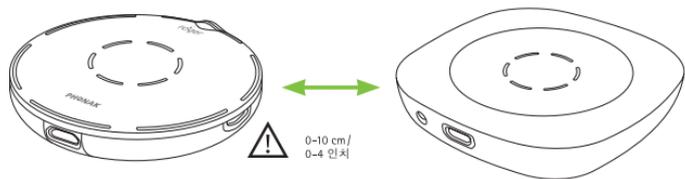

연결 상태표시등

연결 버튼을 누르면 뒷면의 상태표시등을 통해 다음과 같은 피드백이 나타날 수 있습니다.

- 연결 성공 - 다른 로저 송신기가 로저 셀렉트에 연결되었습니다.
- 로저 셀렉트가 다른 로저 송신기를 찾을 수 없습니다. 로저 셀렉트를 다른 로저 송신기에 가깝게 놓고, 두 송신기의 전원이 모두 켜져 있는지 확인합니다. 그런 다음 다시 연결해 보십시오.
- 다른 로저 송신기가 로저 셀렉트와 호환되지 않거나 다른 로저 셀렉트의 블루투스가 여전히 활성화되어 있습니다. 로저 송신기의 소프트웨어를 업데이트하거나 두 번째 로저 셀렉트의 Bluetooth를 비활성화하십시오.

10. 문제 해결 방법

9.2 여러 개의 송신기 사용하기

로저 셀렉트를 다른 송신기와 함께 사용하려면 화자의 가슴 위치에 착용해야 합니다. 로저 셀렉트를 테이블에 배치하면 자동으로 음소거됩니다. 로저 셀렉트의 음소거를 해제하면 로저 셀렉트와 연결된 다른 송신기가 음소거됩니다. 로저 셀렉트를 음소거하거나 가슴 위치에 착용하면 다른 송신기가 다시 활성화됩니다.

문제	원인	해결 방법
로저 송신기가 켜지지 않습니다.	배터리가 방전되었습니다.	로저 송신기를 최소 2시간 이상 충전하십시오.
로저 송신기에서 소리가 들리지 않습니다.	로저 송신기가 음소거되어 있습니다(빨간색 LED).	중앙 터치 버튼을 눌러 로저 송신기의 음소거를 해제하십시오.
	잘못된 방향이 선택되었습니다.	화자의 방향에 있는 세그먼트를 누르십시오.
	로저 수신기가 로저 송신기에 연결되지 않습니다.	로저 수신기 또는 로저 호환 보청기 가까이에 로저 송신기를 놓고 연결 버튼을 누르십시오.
	로저 수신기가 작동하지 않습니다.	로저 수신기가 보청기에 부착되어 있는지, 전원은 켜져 있는지 확인하십시오.
	보청기가 올바른 프로그램으로 설정되지 않았습니다.	보청기가 올바른 프로그램(로저/FM/DAI/EXT)으로 설정되어 있는지 확인하십시오.

문제	원인	해결 방법
화자의 음성이 들리기는 하지만 무슨 말인지 이해할 수 없습니다.	로저 송신기가 화자와 너무 멀리 떨어져 있습니다.	로저 송신기를 화자의 근처로 더 가깝게 이동하십시오.
	송신기 입구가 손가락으로 가려져 있습니다.	송신기 입구가 가려지지 않도록 하여 송신기를 잡으십시오.
	송신기 입구가 먼지로 덮여 있습니다.	송신기 입구를 청소하십시오.
	잘못된 방향이 선택되었습니다.	화자의 방향에 있는 세그먼트를 누르십시오.
음성 신호가 자주 끊어집니다.	사용자와 로저 송신기와의 거리가 너무 멉니다.	로저 송신기에 가깝게 이동하십시오.
	사용자와 로저 송신기 사이에 장애물이 있습니다.	로저 송신기가 시야 안에 들어오도록 조정하거나 로저 송신기에 가깝게 이동하십시오.
소음이 너무 많이 들립니다.	로저 송신기에서 소음이 들립니다.	배경 소음을 줄이려면 화자 방향에 있는 세그먼트를 누르십시오.

문제	원인	해결 방법
로저 송신기에서 내 음성을 듣고 싶지 않습니다.	로저 송신기에서 내 목소리가 들립니다.	Own voice pickup을 최소화하려면 화자 방향에 있는 세그먼트를 누르십시오.
멀티미디어 장치의 볼륨이 너무 낮습니다.	볼륨 설정이 잘못되어 있습니다.	음원의 볼륨을 높이십시오.
멀티미디어 장치의 소리가 들리지 않습니다.	음원이 음소거되었습니다.	음원의 음소거를 해제하십시오.
	로저 송신기가 꺼져 있습니다.	로저 송신기를 켜십시오.
	오디오 케이블 연결이 올바르지 않습니다.	오디오 케이블을 올바르게 연결하십시오.
로저 송신기가 작동을 멈추었고 어떤 버튼을 눌러도 작동되지 않습니다.	소프트웨어에 문제가 생겼습니다.	전원 버튼과 연결 버튼을 동시에 10초 동안 눌러 로저 송신기를 재부팅하십시오.
로저 송신기가 휴대폰과 페어링되지 않습니다.	로저 송신기를 페어링하려면 코드가 필요합니다.	로저 셀렉트 페어링 코드는 '0000'(영 4개)입니다.
	전화기에서 로저 송신기를 지원하지 않을 수 있습니다.	전화기가 로저 송신기의 블루투스 버전과 호환되지 않는지 전화기 대리점에 물어보십시오.

문제	원인	해결 방법
블루투스로 통화 중 신호가 끊깁니다.	로저 송신기와 전화기/컴퓨터 간 거리가 너무 멉니다.	전화기/컴퓨터를 로저 송신기에 더 가깝게 옮기십시오.
전화를 받지만 로저 송신기에서 전화를 받을 수 없습니다.	전화기의 블루투스가 비활성화되었습니다.	전화기/컴퓨터의 블루투스 기능을 활성화하십시오(해당 장치의 사용자 설명서 참조).
	로저 송신기의 블루투스가 비활성화되었습니다.	블루투스 버튼을 2 초 간 눌러 블루투스를 활성화하십시오.
	로저 송신기와 전화기/컴퓨터 간의 거리가 너무 멉니다.	전화기/컴퓨터와 로저 송신기를 서로 더 가깝게 두십시오.
통화자에게는 나의 음성이 들리지만 통화자의 음성이 들리지 않습니다.	통화가 로저 송신기로 전달되지 않습니다.	전화기/컴퓨터의 블루투스 또는 헤드셋 아이콘을 눌러 전화를 로저 송신기로 착신하십시오.

문제	원인	해결 방법
통화자에게 나의 음성이 잘 들리지 않습니다.	로저 송신기가 귀하의 입과 너무 떨어져 있습니다.	로저 송신기를 가슴에 붙이거나 앞에 있는 책상에 놓으십시오.
	로저 송신기가 음소거되어 있습니다.	가운데 터치 키를 눌러 로저 송신기 음소거를 해제하십시오.

11. 서비스 및 제품 보증

11.1 현지 제품 보증 서비스

국내 제품 보증 서비스 규정에 대해서는 구입처의 청각 전문가에게 문의하시기 바랍니다.

11.2 국제 제품 보증 서비스

포낙은 구입일로부터 1년간의 유효한 국제 제품 보증 서비스를 제공합니다. 본 보증 서비스는 제조 및 재료 결함에 대해 적용됩니다. 보증은 제품 구매 증빙이 있을 경우에만 유효합니다.

국제 보증은 소비재 판매에 적용되는 해당 국가 법률에 따라 소비자가 가질 수 있는 법적 권리에 영향을 주지 않습니다.

11.3 제품 제한 보증

이 보증은 부적절한 취급, 보관, 화학물질에 대한 노출, 침수, 또는 과도한 물리적 충격으로 인한 제품 손상에 대해서는 적용되지 않습니다. 포낙 브랜드 공식 지정 업체가 아닌 곳에서 수리를 하여 발생한 고장에 대해서도 제품 보증 서비스를 받으실 수 없습니다. 본 제품의 보증은 청각 전문센터에서 제공한 서비스를 포함하지 않습니다.

일련 번호: _____

구입일: _____

공인 청각 전문가(인감/서명):

12. 적합성 정보

유럽: 적합성 선언

Sonova Communications AG는 이 제품이 Radio Equipment Directive 2014/53/EU를 준수함을 선언합니다. EU 적합성 선언의 전문은 제조사, 현지 포낙 대리점 또는 www.phonak.com에서 제공합니다.

작동 주파수: 2,400~2,483.5MHz
전력 레벨: < 100mW

호주/뉴질랜드:



R-NZ

뉴질랜드와 호주 내의 합법적 판매를 위해 해당 RSM(Radio Spectrum Management) 및 ACMA(Australian Communications and Media Authority) 규제 협정을 준수하는 장치임을 나타냅니다.
적합성 라벨 R-NZ는 적합성 레벨 A1에 따라 뉴질랜드 시장에 공급되는 무선 제품에 적용되는 적합성 라벨입니다.

고지 1:

이 장치는 FCC 규정 Part 15와 캐나다 산업성의 면허 면제 RSS 표준을 준수합니다. 작동을 위해 다음 두 가지 조건이 적용됩니다.

- 1) 이 장치는 유해한 간섭을 일으키지 않습니다.
- 2) 이 장치는 원치 않는 장치 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 모든 간섭을 수용해야 합니다.

고지 2:

Sonova Communications AG의 명시적 승인 없이 이 장치를 변경하거나 수정하면 이 장치 작동에 대한 FCC 승인이 무효화됩니다.

고지 3:

이 장치는 테스트되었으며, FCC 규정 제15조 및 캐나다 산업부의 ICES-003에 따라 클래스 B 디지털 장치에 대한 제한을 준수하고 있습니다.
이러한 제한 사항은 주거 지역 시설에 유해 간섭에 대한 적절한 보호를 제공하기 위함입니다. 이 장치는 무선 주파수 에너지를 생성하고 방출할 수 있으며, 지침에 따라 설치 및 사용하지 않을 경우,

무선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 그러나 특정 시설에서 간섭이 발생하지 않음을 보증하지는 않습니다. 장치가 라디오나 텔레비전 수신에 유해한 간섭을 유발하는 경우(장치를 켜다 켜면 확인할 수 있음) 사용자는 다음 방법 중 하나를 사용하여 간섭 문제를 해결하도록 시도하는 것이 좋습니다.

- 수신 안테나의 방향이나 위치를 변경합니다.
- 장치와 리시버 사이의 거리를 넓힙니다.
- 리시버가 연결된 콘센트를 제외한 다른 회로의 콘센트에 장비를 연결합니다.
- 대리점 또는 경험 많은 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청합니다.

고지 4:

일본 무선 법 준수. 비즈니스 법 준수. 이 장치는 일본 무선 법(電波法)과 일본 전기통신사업법(電氣通信事業法)을 준수합니다. 이 장치는 변경하면 안 됩니다(변경하면 허가된 지정 번호가 무효화됨).

고지 5:

FCC 규정 및 캐나다 산업부의 무선 전자파 방출 제한

이 장치는 통제 할 수 없는 환경에서의 FCC RF 방사 방출 제한 기준을 준수합니다. 이 송신기는 다른 안테나 또는 송신기와 함께 배치하거나 함께 작동해서는 안 됩니다.

13. 기호 안내 및 설명



CE 기호는 이 제품이 Radio Equipment Directive 2014/53/EU를 준수한다는 것을 Sonova Communications AG에서 확인하는 표시입니다.



이 기호는 사용자가 본 사용자 설명서의 관련 정보를 읽고 고려하는 것이 중요하다는 것을 나타냅니다.



제품 제조 업체를 나타냅니다.



이 기호는 사용자가 본 사용자 설명서에 있는 경고 안내문을 숙지하고 주의를 기울여야 함을 나타냅니다.



취급 및 제품 안전에 중요한 정보입니다.



무제한 아이콘은 이 제품에 RogerDirect를 통해 보청기에 무제한 개수로 연결 가능한 로저 수신기가 있음을 나타냅니다.

작동 조건

본 제품은 사용자 설명서에 기재된 사용의 목적에 맞게 사용할 경우, 사용상의 제약과 문제 발생 없이 사용 가능합니다.



운송 및 보관 온도:
섭씨 $-20^{\circ}\sim+60^{\circ}$ (화씨 $-4^{\circ}\sim+140^{\circ}$).
작동 온도:
섭씨 $0^{\circ}\sim+40^{\circ}$ (화씨 $+32^{\circ}\sim+104^{\circ}$).



건조한 상태 유지.



운송 및 보관 습도: 90% 미만(비응축).
작동 습도: 90% 미만(비응축).



대기압: 200hPa ~ 1500 hPa.



제품 또는 포장에 있는 이 기호는 다른 가정용 생활폐기물과 함께 폐기될 수 없음을 나타냅니다. 이 제품은 장치 구입처나 폐기용 전기, 전자제품수거소에 별도로 폐기되어야 합니다. 오래된 기기를 올바르게 폐기하면 환경 및 인체 건강에 미치는 잠재적인 부정적 영향을 방지할 수 있습니다. 이 제품에는 교체가 불가능한 배터리가 내장되어 있습니다. 부상을 입거나 제품을 손상시킬 수 있으므로 제품을 열거나 배터리를 제거하려 하지 마십시오. 배터리를 제거하려면 현지 재활용 시설에 문의하시기 바랍니다.

 Bluetooth® 워드 마크와 로고는 Bluetooth SIG, Inc.가 소유한 등록 상표이며 Phonak Communication AG는 라이선스 계약에 따라 이러한 마크를 사용합니다. 기타 상표 및 상표명은 해당 소유자의 재산입니다.

 Dolby, Dolby Audio 및 더블 D 기호는 Dolby Laboratories의 상표입니다.

14. 경고 및 주의 사항

장치를 사용하기 전에 다음 페이지에 있는 정보를 읽으십시오.

14.1 위험 경고

- △ 이 장치는 36개월 미만의 어린이는 사용할 수 없습니다.
이 장치에는 어린이가 삼킬 경우 질식의 원인이 될 수 있는 작은 부품이 포함되어 있습니다. 어린이 및 인지 장애가 있는 사람 또는 애완동물이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
부품을 삼켰을 경우, 즉시 의사 또는 병원에 연락하십시오.
- △ 이 장치는 자기장을 생성할 수 있습니다. 이식 가능 장치(예: 심박조율기, 제세동기 등)에서 로저 셀렉트의 영향이 느껴지는 경우, 로저 셀렉트의 사용을 중단하고 담당 의사 또는 의료기기 제조사에 문의하시기 바랍니다.

- △ 청각 전문가에 의해 특별히 프로그래밍된 보청기만 사용하십시오.
- △ 전기 부품은 현지 규정에 따라 폐기하십시오.
- △ Sonova Communications AG에서 명시적으로 승인하지 않은 장치에 대한 변경이나 수정은 허용되지 않습니다.
- △ Sonova Communications AG에서 승인한 액세서리만 사용하십시오.
- △ Sonova Commuunications AG에서 제공하는 충전기는 최대 고도 5,000m에서 로저 셀렉트 충전에 사용할 수 있습니다. 안전을 위해 Sonova Commuunications AG에서 제공하는 충전기 또는 정격 5VDC, 최대 2000mA 및 최대 고도 2000m 사용으로 승인된 충전기만 사용하십시오.

- △ 폭발 위험이 있는 구역(폭발 위험이 있는 광산 또는 산업 지역, 산소가 많은 환경 또는 인화성 마취제를 처리하는 곳) 또는 전자 장비가 금지된 장소에서는 이 장치를 사용하지 마십시오.
- △ 장치를 열면 장치가 손상될 수 있습니다. 본 사용자 설명서의 문제 해결 방법에 명시된 내용으로 해결되지 않는 문제가 발생하면, 담당 청각 전문가와 상의하십시오.
- △ 기계를 작동할 때 장치의 어떤 부분도 기계에 걸리지 않게 하십시오.
- △ 장치를 착용하고 있는 동안에는 충전하지 마십시오.

14.2 사용 상의 주의 사항

- ① 먼지나 이물질로부터 장치 커넥터, 플러그, 전원 공급장치를 보호하십시오.
- ① 장치를 다른 케이블에 연결할 때 과도한 힘을 주지 마십시오.
- ① 과도한 습기(목욕 또는 수영 구역) 및 열원(라디에이터)으로부터 장치를 보호하십시오. 과도한 충격 및 진동으로부터 장치를 보호하십시오.
- ① 장치를 닦을 때는 젖은 헝겊을 사용하십시오. 가정용 세제(가루비누, 비누 등)나 알코올로 장치를 닦아서는 절대로 안 됩니다. 절대 전자레인지 또는 기타 난방열 장치를 사용하여 장치를 건조시키지 마십시오.
- ① X선 방사능, CT 스캔 또는 MRI 스캔은 장치의 올바른 작동에 치명적이거나 좋지 않은 영향을 미칠 수 있습니다.

- ① 장치가 떨어졌거나 손상된 경우, 과열된 경우, 장치의 코드나 플러그가 손상된 경우 또는 장치를 액체에 떨어뜨린 경우, 장치 사용을 중지하고 공인 서비스 센터에 문의하십시오.

14.3 그 외 중요 정보

- ① 광학 Toslink 케이블을 장치 또는 TV에 연결한 경우, 광 케이블의 빛으로부터 눈을 보호하시기 바랍니다.
- ① 고전력 전자 장비, 대형 전기 시설 및 금속 구조물은 작동 범위를 손상시키고 크게 줄일 수 있습니다.
- ① 장치는 내부 기술 데이터를 수집하고 저장합니다. 이 데이터는 청각 전문가가 장치를 점검하고 사용자의 올바른 장치 사용을 돕기 위해 사용할 수 있습니다.
- ① 장치에서 연결된 리시버로 전송된 디지털 신호는 송신기의 네트워크에 없는 다른 장치로는 전송되지 않습니다.



Sonova Communications AG
Herrenschwandweg 4
CH-3280 Murten
Switzerland
www.phonak.com

sonova
HEAR THE WORLD



029-1380-19/N1.00/2024-04/cz © 2024 Sonova AG All rights reserved