

Roger Select™ iN

Gebruiksaanwijzing



roger



A Sonova brand

PHONAK
life is on

Inhoud

1.	Welkom	4
2.	Uw Roger Select iN leren kennen	5
2.1	Apparaatbeschrijving	6
2.2	Accessoires	8
2.3	Indicatorlampjes	10
3.	Aan de slag	12
3.1	Uw Roger microfoon opladen	12
3.2	De Roger Select iN aanzetten	14
4.	Uw Roger Select iN gebruiken om beter te verstaan	15
4.1	Beter verstaan aan tafel	15
4.2	Een spreker op afstand beter verstaan	18
5.	Naar de tv of andere audioapparaten luisteren	21
5.1	Het dockingstation voorbereiden	21
5.2	Naar de tv luisteren met het dockingstation	23
6.	Naar een draagbaar audioapparaat luisteren	25
7.	Extra functies	27
7.1	Dempen	27
7.2	Roger Select iN aansluiten op uw Roger ontvanger	28
7.3	Roger apparaten loskoppelen (NewNet)	30
7.4	Resetten	30

8.	De Roger Select iN in combinatie met andere Roger microfoons gebruiken	31
8.1	Verbinding maken met andere microfoons	31
8.2	Meerdere microfoons gebruiken	33
9.	Problemen oplossen	34
10.	Conformiteitsverklaring	37
11.	Informatie en verklaring van symbolen	41
12.	Belangrijke veiligheidsinformatie	44
12.1	Waarschuwingen	44
12.2	Veiligheidsinformatie product	47
12.3	Andere belangrijke informatie	48
13.	Service en garantievoorwaarden	49
13.1	Plaatselijke garantie	49
13.2	Wereldwijde garantie	49
13.3	Garantiebeperking	50

1. Welkom

Uw Roger Select iN is ontwikkeld door Phonak, wereldleider op het gebied van hooroplossingen. Het hoofdkantoor bevindt zich in Zürich, Zwitserland.

Dit topproduct is het resultaat van decennia aan onderzoek en expertise en is ontwikkeld om u te helpen verbonden te blijven met al het moois van geluid! Wij danken u voor uw goede keuze en wensen u jarenlang luisterplezier.

Lees de gebruiksaanwijzing grondig door, zodat u zeker weet dat alles duidelijk is en u uw Roger Select iN optimaal kunt gebruiken. Vraag uw audicien om meer informatie.

Phonak – life is on
www.phonak.com


2. Uw Roger Select iN leren kennen

De Roger Select iN is een microfoon die spraak van een spreker opvangt en draadloos naar uw oren zendt. U kunt de Roger Select iN bijvoorbeeld midden op tafel leggen in een restaurant of deze laten dragen door één persoon om bijvoorbeeld een spreker op afstand te horen.




- ① Uw Roger Select iN heeft doorgaans een bereik van 10 meter vanaf uw hoortoestellen. Let op: menselijke lichamen en muren kunnen deze afstand verkorten. Wanneer u uw Roger Select iN kunt zien (d.w.z. binnen gezichtsveld), hebt u de grootste kans om optimaal bereik te hebben.

2.1 Apparaatbeschrijving

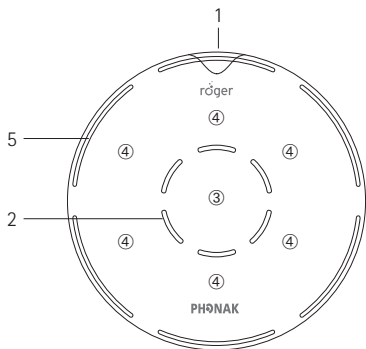


- 1 Aan/uit-knop inclusief accustatuslampje
- 2 Microfoons en middelste indicatorlampjes
- 3 Middenknop
- 4 Zes drukknoppen voor selectie
- 5 Indicatorlampjes microfoonmodus

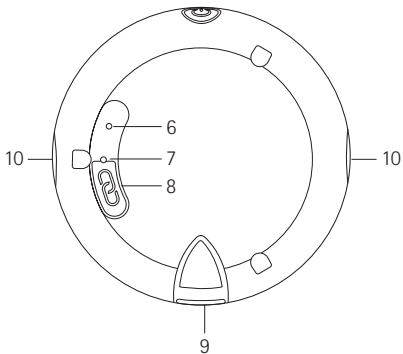


- 6 Reset-knop
- 7 Indicatorlampje achterzijde
- 8 Verbindingsknop
- 9 Micro-USB-aansluiting
- 10 Sleuven voor draagkoord en clip

2.2 Accessoires

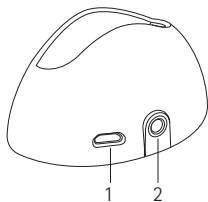


Dockingstation


- 1 Ingang voor externe voeding
- 2 Digitale/analogue audio-ingang

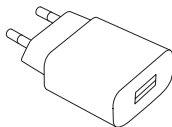


Voedingsadapter

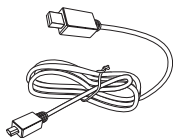


USB-kabel

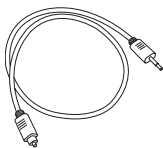

Digitale audiokabel

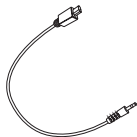


Analoge audiokabel

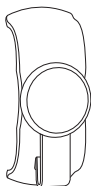

Magnetische clip




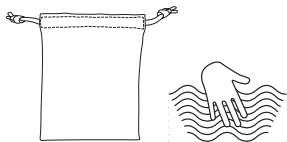


Draagkoord



Beschermtasje

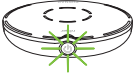2.3 Indicatorlampjes

Accustatus 	Knippert snel groen	Bezig met opladen
	Brandt groen	Volledig opgeladen
	Knippert langzaam groen	Ingeschakeld, accu vol
	Knippert oranje	Accu halfvol
	Knippert rood	Accu leeg, Roger Select iN opladen
Microfoonmodus 	Alle zes segmenten groen	Microfoon in alle richtingen (omnidirectioneel) actief
	Eén tot vijf segmenten groen	Microfoon in ingestelde richtingen actief

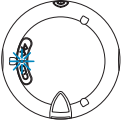
Dempen 	Brandt rood	Microfoon gedempt
	Knippert rood	Demping opheffen niet mogelijk, er is een andere Roger Select iN binnen hetzelfde netwerk actief
Verbinden 	Knippert blauw	Verbindings- of koppelingsmodus
	Brandt groen	Verbonden/gekoppeld
	Knippert twee keer rood	Verbinding onderbroken, zet de apparaten dicht bij elkaar
	Knippert drie keer lang rood	Apparaat niet compatibel

3. Aan de slag


3.1 Uw Roger microfoon opladen

U kunt uw Roger microfoon op drie manieren opladen:

A) Met de voedingsadapter: Steek het kleinere uiteinde van de oplaadkabel in uw Roger microfoon. Steek het grotere uiteinde van de kabel in de voedingsadapter. Steek de voedingsadapter in een stopcontact.

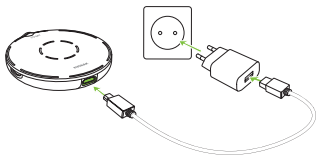

B) Met een computer of tablet: Steek het kleinere uiteinde van de oplaadkabel in uw Roger microfoon. Steek het grotere uiteinde van de kabel in de USB-poort van uw computer en zet uw computer aan.

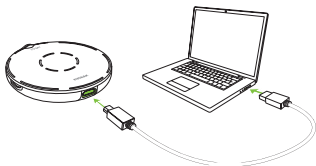


C) Via het dockingstation: Plaats de Roger Select iN in het dockingstation.

❶ Raadpleeg hoofdstuk 5.1 voor het voorbereiden van het dockingstation.



Accustatuslampje tijdens het opladen

Het accustatuslampje rond de aan/uit-knop knippert groen totdat uw Roger microfoon volledig is opgeladen. Wanneer de accu volledig is opgeladen, blijft het accustatuslampje groen branden.

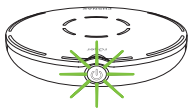


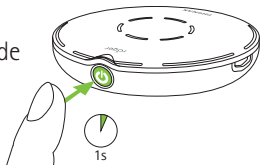
Bezig met opladen



Volledig opgeladen

3.2 De Roger Select iN aanzetten

Druk  1 seconde op de knop totdat het indicatorlampje van de microfoonmodus gaat branden.



Accustatuslampje na inschakelen

Wanneer uw Roger microfoon is ingeschakeld, knippert het accustatuslampje rond de aan/uit-knop langzaam. Een groen knipperend lampje geeft aan dat de accu volledig is opgeladen. Een volledig opgeladen accu gaat ongeveer 8 uur mee. Een oranje knipperend lampje geeft aan dat de accu halfvol is. Als het indicatorlampje rood begint te knipperen, dient u uw Roger microfoon onmiddellijk op te laden.



Laad uw Roger microfoon op

4. Uw Roger Select iN gebruiken om beter te verstaan

De Roger Select iN is een veelzijdig, intelligent product. Hij herkent in welke situatie u zich bevindt en past de microfooninstellingen automatisch aan zodat u spraak zo goed mogelijk kunt verstaan.

- ① Voor het beste spraakverstaan dient u uw Roger microfoon zo dicht mogelijk bij uw gesprekspartner(s) te plaatsen.

4.1. Beter verstaan aan tafel

Plaats uw Roger microfoon in het midden van de tafel om naar een groep mensen te kunnen luisteren.



Uw Roger microfoon activeert een omnidirectionele microfoon. Wanneer een spreker praat, zal uw Roger microfoon de microfoon op de spreker focussen en het achtergrondlawaai onderdrukken.

Als er twee of meer mensen tegelijkertijd spreken, kunt u op een segment drukken om op één specifieke persoon te focussen.



U kunt meerdere mensen toevoegen door op meerdere segmenten te drukken.



Als u op een geactiveerd segment drukt, wordt de geselecteerde richting gedeactiveerd.



Als u de hele groep weer wilt horen, drukt u op de middenknop.



Indicatorlampjes microfoonmodus

Iedere keer wanneer u op het apparaat drukt of het apparaat verplaatst, worden met de indicatorlampjes van de microfoonmodus de actieve segmenten getoond. De lampjes zullen na een paar seconden weer uitgaan om de accu te sparen.



Alle zes richtingen actief




Alleen geselecteerde richtingen actief

- ❶ Indien er geen tafel beschikbaar is, kunt u uw Roger microfoon in uw handpalm houden. U kunt dan dezelfde functies gebruiken als wanneer de Roger Select op tafel wordt gelegd.

4.2 Een spreker op afstand beter horen


Met de Roger Select iN kunt u één gesprekspartner op afstand of in zeer rumoerige omgevingen horen. Doorgaans kunt u de spreker zelfs op 10 meter afstand horen.

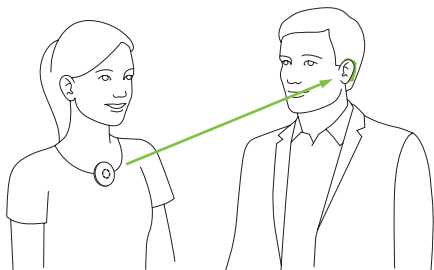


Bevestig de clip of het draagkoord voordat u het apparaat aan de spreker geeft. Uw Roger microfoon activeert automatisch de juiste microfoonmodus.

De clip gebruiken

- 1) Bevestig de clip aan uw Roger microfoon. Zorg ervoor dat de clip goed vastklikt in de kleine sleuven aan weerszijden van uw Roger microfoon.

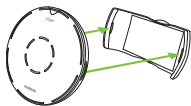

- 2) Open de magnetische clip.

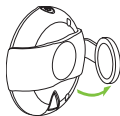

- 3) Bevestig de clip aan de kleding van de spreker.





Voor het beste resultaat moet uw Roger microfoon op het midden van de borstkas worden gedragen, op ongeveer 20 cm afstand van de mond.



Het draagkoord gebruiken

- 1) Bevestig het draagkoord aan uw Roger microfoon. Zorg ervoor dat het draagkoord goed vastklikt in de kleine sleuven aan weerszijden van uw Roger microfoon.
- 2) Hang het draagkoord om de nek van de spreker en verstel de lengte, zodat uw Roger microfoon zich op 20 cm afstand van de mond bevindt.

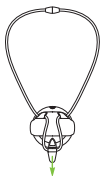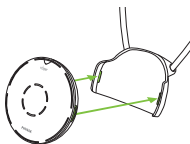


Indicatorlampjes microfoonmodus

Wanneer een spreker de Roger Select in draagt, licht het indicatorlampje voor de microfoonmodus aan de bovenzijde op.



De clip of het draagkoord verwijderen


Druk op een willekeurige zijde van de clip of het draagkoord om deze los te koppelen van uw Roger microfoon.

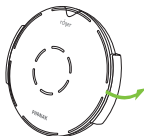


5. Naar de tv of andere audioapparaten luisteren

5.1 Het dockingstation voorbereiden

- 1) Steek het kleinere uiteinde van de USB-kabel in de aansluiting van het dockingstation.
- 2) Steek het grotere uiteinde van de USB-kabel in de voedingsadapter.
- 3) Steek de voedingsadapter in het stopcontact.

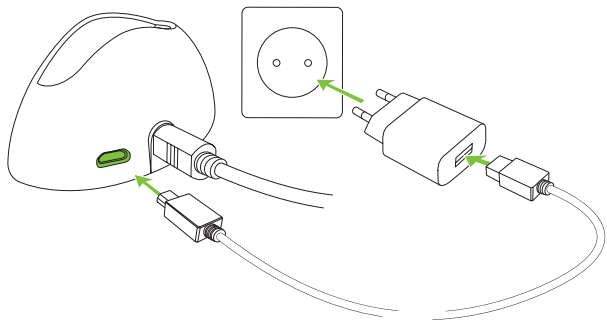

- 4) Steek het andere uiteinde van de optische (Toslink-) kabel in de optische aansluiting van uw tv of een ander audioapparaat.

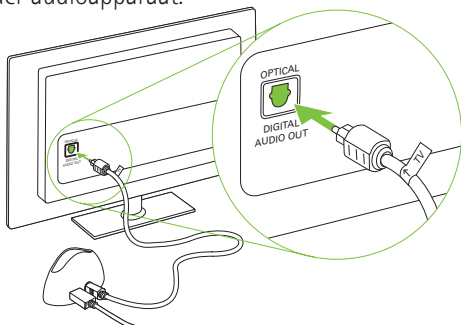

- ❶ Als uw tv of andere audio-apparaat geen optische audio-output heeft, kunt u ook een analoge audiokabel gebruiken voor verbinding tussen de tv en het dockingstation. De maximale audio-output is 1,4 Vrms. Hogere audio-inputspanning kan het toestel beschadigen.
- ❶ Bescherm uw ogen tegen het optische licht van de optische Toslink-kabel wanneer deze op het apparaat of de tv wordt aangesloten.


5.2 Naar de tv luisteren met het dockingstation

1) Plaats uw Roger microfoon in het dockingstation. Wanneer de microfoon in het dockingstation is geplaatst, wordt deze automatisch uitgeschakeld.



2) Zet uw tv (of een ander audioapparaat) aan. Uw Roger microfoon zendt het audiosignaal automatisch naar uw oren.

Als u het audiosignaal niet meer wilt ontvangen, zet u simpelweg de tv (of een ander audioapparaat) uit of haalt u uw Roger microfoon uit het dockingstation.

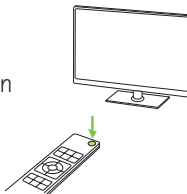


- i** De interne microfoons van Roger Select iN worden gedempt wanneer audio wordt gestreamd. Als u op de middenknop drukt, kunt u de microfoons van uw Roger microfoon activeren/deactiveren (alleen omnidirectionele microfoon).

Indicatorlampjes voor dempfunctie

Wanneer uw Roger microfoon in het dockingstation geplaatst is en audio zendt, licht het rode middelste indicatorlampje op.

Uw Roger microfoon brengt audiosignalen over terwijl de microfoon wordt gedempt.

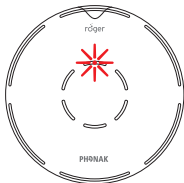


Tijdens het overbrengen van audio zendt uw Roger microfoon ook het eigen microfoonsignaal in parallel uit.



6. Naar een draagbaar audioapparaat luisteren

- 1) Controleer of u uw Roger microfoon hebt ingeschakeld.
- 2) Steek het rechthoekige uiteinde van de korte audiokabel in uw Roger microfoon.
- 3) Steek de ronde stekker van de korte audiokabel in de hoofdtelefoonaansluiting van uw draagbare apparaat.
- 4) Start de muziek of muziekapp op uw draagbare audioapparaat.

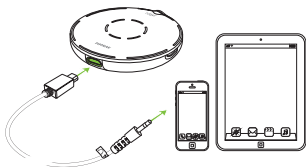


i Uw Roger microfoon wordt automatisch gedempt wanneer u de audiokabel aansluit. U activeert de microfoon door op de middenknop te drukken. Nu hoort u het audioapparaat en de microfoons in parallel.

Als u het audiosignaal niet langer wilt ontvangen, koppelt u de audiokabel los en schakelt u uw Roger microfoon uit.


Indicatorlampjes voor dempfunctie

Wanneer de audiokabel op uw Roger microfoon is aangesloten, licht het middelste rode indicatorlampje op.

Uw Roger microfoon brengt audiosignalen over terwijl de microfoon wordt gedempt.

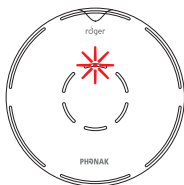


Tijdens het overbrengen van audio zendt uw Roger microfoon ook het eigen microfoonsignaal in parallel uit.

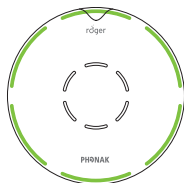

7. Extra functies

7.1 Dempen

Als u uw Roger microfoon wilt dempen, drukt u één of twee keer op de middenknop van het apparaat totdat het middelste rode indicatorlampje oplicht.

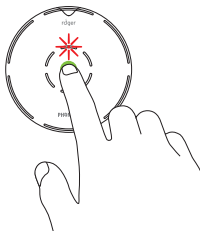

Druk op de middenknop om de Roger microfoon weer te activeren.


- ① Wanneer een spreker het apparaat draagt, kan de dempfunctie niet worden gebruikt.

7.2 Roger Select iN aansluiten op uw Roger ontvanger

De Roger ontvanger kan ofwel in uw hoortoestel zijn geïnstalleerd, op uw hoortoestel/sound processor zijn aangesloten of op het lichaam worden gedragen (met de Roger NeckLoop of Roger X aangesloten op uw streamer).

Sluit de Roger ontvanger(s) als volgt aan:

1. Zet uw Roger microfoon en de Roger ontvanger aan.
2. Houd uw Roger microfoon dichtbij (maximaal 10 cm afstand) de Roger ontvanger.
3. Druk op de verbindingsknop  op uw Roger microfoon.

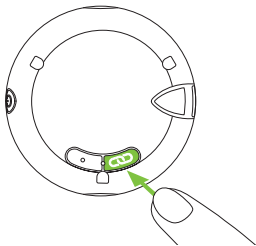

Het indicatorlampje op de achterzijde licht gedurende twee seconden groen op om aan te geven dat er verbinding is gemaakt.

Verbindingsstatuslampjes

Nadat u op de verbindingsknop hebt gedrukt, kan het indicatorlampje aan de achterzijde het volgende aangeven:



Bezig met verbinden



Verbonden: uw Roger ontvanger is aangesloten op uw Roger microfoon.




Uw Roger microfoon kon geen Roger ontvanger vinden. Plaats de apparaten dicht bij uw Roger ontvanger en controleer of de Roger ontvanger is ingeschakeld. Probeer vervolgens opnieuw verbinding te maken.



De Roger ontvanger is niet compatibel met uw Roger microfoon.

i U kunt een onbeperkt aantal Roger ontvangers aansluiten op uw Roger microfoon. Hiervoor hoeft u alleen stap 2 en 3 te herhalen voor iedere volgende Roger ontvanger.

7.3 Roger toestellen loskoppelen (NewNet)


Om uw Roger microfoon los te koppelen van aangesloten ontvangers of andere Roger microfoons, houdt u de verbindingsknop  7 seconden ingedrukt. Het indicatorlampje aan de achterzijde gaat oranje branden wanneer uw Roger microfoon is losgekoppeld van alle aangesloten apparaten.

7.4 Resetten

Indien uw Roger microfoon niet meer reageert op opdrachten, kunt u het apparaat resetten door de aan/uit-knop en de reset-knop tegelijkertijd 10 seconden ingedrukt te houden (u heeft mogelijk een dunne paperclip nodig om de reset-knop in te drukken).

8. De Roger Select iN in combinatie met andere Roger microfoons gebruiken


De Roger Select iN kan in combinatie met andere Roger microfoons worden gebruikt, zoals de Roger Table Mic II. Door meerdere microfoons te gebruiken, kunt u een grotere groep of meerdere sprekers op afstand horen.

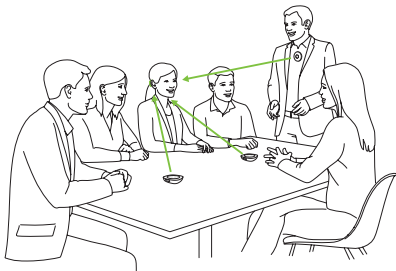

8.1. Verbinding maken met andere microfoons

Volg de onderstaande instructies om een andere microfoon aan te sluiten op uw Roger Select iN:

- 1) Schakel beide microfoons in.
- 2) Houd de twee microfoons dicht bij elkaar (maximaal 10 cm).
- 3) Druk op de verbindingsknop van de Roger Select iN.

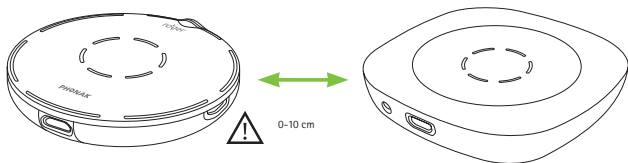

Verbindingsstatuslampje

Nadat u op de verbindingsknop hebt gedrukt, kan het indicatorlampje aan de achterzijde het volgende aangeven:

-
-  Verbonden: de andere Roger microfoon is nu verbonden met uw Roger Select iN.

 -  De Roger Select iN kon geen andere Roger microfoon vinden. Plaats de Roger Select iN dichterbij de andere Roger microfoon en controleer of beide microfoons zijn ingeschakeld. Probeer vervolgens opnieuw verbinding te maken.

 -  De andere Roger microfoon is niet compatibel met uw Roger Select iN, of de Bluetooth-functie van de andere Roger Select iN is nog steeds actief. Update de software van uw Roger microfoons of schakel de Bluetooth-functie uit op de tweede Roger Select iN.
-

8.2. Meerdere microfoons gebruiken

Wanneer u de Roger Select iN in combinatie met andere microfoons gebruikt, dient de spreker het apparaat op de borstkas te dragen. Wanneer u de Roger Select iN op tafel plaatst, wordt de microfoon automatisch gedempt.

Wanneer u de demping van de Roger Select iN opheft, worden de andere microfoons die zijn verbonden met de Roger Select iN gedempt. Als de Roger Select iN wordt gedempt of als deze op de borstkas wordt gedragen, worden de andere microfoons opnieuw geactiveerd.

9. Problemen oplossen

Probleem	Oorzaken	Oplossingen
Ik kan mijn Roger microfoon niet inschakelen	De accu is leeg	Laad uw Roger microfoon minimaal twee uur op
Ik hoor geen geluid uit mijn Roger microfoon	Uw Roger microfoon is gedempt (rode led)	Hef de demping van uw Roger microfoon op door op de middenknop te drukken
	Verkeerde richting geselecteerd	Druk op het segment dat in de richting van de spreker wijst
	Uw Roger ontvangers zijn niet verbonden met uw Roger microfoon	Houd de Roger microfoon dicht bij de Roger ontvanger of het met Roger compatibele hoortoestel en druk op de verbindingsknop
	Uw Roger ontvanger werkt niet	Controleer of u de Roger ontvanger hebt bevestigd aan uw hoortoestel en of deze is ingeschakeld
	De hoortoestellen zijn niet ingesteld op het juiste programma	Controleer of uw hoortoestellen zijn ingesteld op het juiste programma (Roger/FM/DAI/EXT)

Probleem

Ik kan de spreker horen, maar ik kan niet verstaan wat hij/zij zegt

Oorzaken

De microfoon bevindt zich te ver van de spreker

De microfoonopeningen zijn bedekt door vingers

De microfoonopeningen zijn bedekt door vuil

Verkeerde richting geselecteerd

Oplossingen

Plaats uw Roger microfoon dicht bij de mond van de spreker

Houd de microfoon zodanig vast dat de microfoonopeningen niet worden bedekt

Reinig de microfoonopeningen

Druk op het segment dat in de richting van de spreker wijst

Ik blijf het audiosignaal verliezen

De afstand tussen u en uw Roger microfoon is te groot

Er bevinden zich obstakels tussen u en uw Roger microfoon

Ga dicht bij uw Roger microfoon zitten/staan

Houd uw Roger microfoon in uw gezichtsveld of ga dicht bij uw Roger microfoon zitten/staan

Ik hoor te veel achtergrondlawaai

Uw Roger microfoon vangt achtergrondlawaai op

Druk op het segment dat in de richting van de spreker wijst om achtergrondlawaai te onderdrukken

Probleem

Ik vind het niet prettig om mijn eigen stem te horen via mijn Roger microfoon

Het volume van mijn multimedia-apparaat staat te zacht

Ik kan mijn multimedia-apparaat niet horen

Mijn Roger microfoon werkt niet meer en reageert niet wanneer ik op een toets druk

Oorzaken

Uw stem wordt opgevangen door uw Roger microfoon

Onjuiste volume-instellingen

De audiobron is gedempt

Uw Roger microfoon is uitgeschakeld

De audiokabel is niet correct aangesloten

Softwareprobleem

Oplossingen

Druk op het segment dat in de richting van de spreker wijst om ervoor te zorgen dat uw stem minimaal wordt opgevangen

Zet het volume van uw audioapparaat hoger

Hef de demping van het audioapparaat op

Zet uw Roger microfoon aan

Sluit de audiokabel correct aan

Start uw Roger microfoon opnieuw op door de aan/uit-knop en de verbindingsknop tegelijkertijd 10 seconden ingedrukt te houden

10. Conformiteitsverklaring

Europa:

Conformiteitsverklaring

Sonova Communications AG verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de richtlijn inzake Radio-apparatuur 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij de fabrikant of de plaatselijke Phonak-vertegenwoordiger of op www.phonak.com

Bedrijfsfrequentie: 2400 – 2483,5 MHz

Vermogensniveau: < 100 mW

Australië/Nieuw-Zeeland:



R-NZ

Geeft aan of een apparaat voldoet aan het betreffende radiospectrumbeheer (RSM) en aan de wetgevingen van de Australische communicatie- en media-autoriteit (ACMA) voor de wettelijke verkoop in Nieuw-Zeeland en Australië.

Het nalevingsetiket R-NZ is voor radioproducten die worden geleverd voor de Nieuw-Zeelandse markt onder conformiteitsniveau A1.

Kennisgeving 1:

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels en aan de RSS-norm(en) van Industry Canada voor licentie. De werking moet voldoen aan de volgende twee voorwaarden:

- 1) dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en
- 2) dit apparaat dient interferentie te accepteren, ook interferentie die ongewenst functioneren van het apparaat kan veroorzaken.

Kennisgeving 2:

Wijzigingen of aanpassingen die aan dit apparaat worden toegebracht zonder uitdrukkelijke toestemming van Sonova Communications AG, kunnen de FCC-machtiging voor het bedienen van dit apparaat ongeldig maken.

Kennisgeving 3:

Het apparaat is getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels en ICES-003 van Industry Canada. Deze beperkingen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan dit tevens uitzenden. Bij

een onjuiste installatie en gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies kan dit leiden tot schadelijk interferentie van radioverbindingen. Het is echter niet gegarandeerd dat er geen interferentie in een bepaalde installatie zal optreden. Als het apparaat schadelijke interferentie aan radio- of televisieontvangst veroorzaakt (dit kan worden vastgesteld door het apparaat uit en in te schakelen), wordt de gebruiker aangeraden de interferentie te corrigeren door middel van een van de volgende maatregelen:

- De ontvangstantenne draaien of verplaatsen.
- De afstand tussen het apparaat en de ontvanger vergroten.
- Het apparaat aansluiten op een stopcontact van een circuit waarop de ontvanger niet is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-reparateur voor hulp.

Kennisgeving 4:

Naleving van de Japanse radiowet. Naleving van bedrijfswet. Dit apparaat is goedgekeurd volgens de Japanse radiowet (電波法). Dit apparaat mag niet worden gewijzigd (anders is het toegewezen identificatienummer niet meer geldig).

Kennisgeving 5:

Verklaring van FCC/Industry Canada inzake blootstelling aan radiofrequente straling

Dit toestel voldoet aan de limieten van FCC inzake blootstelling aan radiofrequente straling, bepaald voor een ongeregelde omgeving. Deze zender mag niet samen met een andere antenne of zender worden gebruikt of hierbij in de buurt worden geplaatst.

11. Informatie en verklaring van symbolen



Het CE-symbool is een bevestiging door Sonova Communications AG dat dit product voldoet aan de Richtlijn Radio-apparatuur 2014/53/EU.



Dit symbool geeft aan dat het belangrijk is dat de lezer de relevante informatie in deze gebruiksaanwijzing leest en toepast.



Dit symbool geeft de fabrikant van het apparaat aan.



Dit symbool geeft aan dat het belangrijk is dat de lezer aandacht besteedt aan de relevante waarschuwingsberichten in deze gebruiksaanwijzing.



Belangrijke informatie voor de bediening en veiligheid van het product.

Bedienings- omstandigheden

Het apparaat is zodanig ontworpen dat het zonder beperkingen probleemloos kan werken wanneer het wordt gebruikt waarvoor het is bedoeld, tenzij anders aangegeven in deze gebruiksaanwijzing.



Temperatuur bij transport en opslag:
-20° tot +60° Celsius. Gebruikstemperatuur:
0° tot 40° Celsius.



Droog houden.



Vochtigheid tijdens transport en opslag:
Tot 90% (niet-condenserend).
Vochtigheid bij gebruik: Tot 90%
(niet-condenserend).



Atmosfeerdruk: 200 hPa tot 1500 hPa.



Dit symbool op het product of de verpakking betekent dat het niet mag worden aangeboden bij uw overige huishoudelijke afval. Het is uw verantwoordelijkheid om uw afgedankte apparatuur afzonderlijk van uw gemeentelijk afval af te voeren. Door uw oude apparaat op de juiste manier te verwijderen, worden mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid voorkomen. Dit product heeft een geïntegreerde, niet-vervangbare accu. Probeer het product niet te openen of de accu te verwijderen, aangezien dit tot letsel kan leiden en het product kan beschadigen. Neem contact op met uw plaatselijke afvalinzameling voor het weggooien van de accu.

12. Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees de informatie op de volgende pagina's aandachtig door voor u uw apparaat in gebruik neemt.

12.1 Waarschuwingen

- ⚠ Dit apparaat is niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Indien dit apparaat wordt gebruikt door kinderen en personen met een verstandelijke beperking, dienen zij te allen tijde onder toezicht te worden gehouden om hun veiligheid te garanderen. Het hoortoestel is een klein apparaat en bevat kleine onderdelen. Houd ze buiten het bereik van kinderen, mensen met een verstandelijke beperking en huisdieren. Indien het toestel wordt ingeslikt, neemt u onmiddellijk contact op met een huisarts of ziekenhuis, aangezien het hoortoestel of onderdelen hiervan verstikkingsgevaar veroorzaken!
- ⚠ Het apparaat kan magnetische velden genereren. Indien u ervaart dat de Roger Select iN een geïmplanteerd apparaat (bijv. pacemakers, defibrillatoren, etc.) beïnvloedt, dient u het gebruik van de Roger Select iN te staken en contact op te nemen met uw arts en/of de fabrikant van het geïmplanteerde apparaat voor advies.

- ⚠ Gebruik alleen hoortoestellen die speciaal voor u geprogrammeerd zijn door uw audicien.
- ⚠ Verwijder elektrische componenten overeenkomstig de plaatselijke voorschriften.
- ⚠ Wijzigingen of aanpassingen aan de apparaten die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Sonova Communications AG, zijn niet toegestaan.
- ⚠ Gebruik alleen accessoires die zijn goedgekeurd door Sonova Communications AG.
- ⚠ De oplader die door Sonova Communications AG wordt verstrekt, kan worden gebruikt om de Roger Select iN op te laden tot op een maximale hoogte van 5000 m. Om veiligheidsredenen mag u alleen opladers gebruiken die door Sonova Communications AG geleverd zijn, of gecertificeerde opladers met een kwalificatie van 5 V DC, max. 2000 mA en tot een maximale hoogte van 2000 m.

- ⚠ Gebruik het apparaat niet in explosieve omgevingen (mijnen of industriële gebieden met explosiegevaar, zuurstofrijke gebieden of gebieden waarin ontvlambare anesthetica worden behandeld) of waarin elektronische apparatuur is verboden.
- ⚠ Het apparaat kan beschadigd raken indien het wordt geopend. Wanneer zich problemen voordoen die niet opgelost kunnen worden door de aanwijzingen in het gedeelte 'Problemen oplossen' van de gebruiksaanwijzing te volgen, neem dan contact op met uw audicien.
- ⚠ Als u een machine bedient, moet u oppassen dat er geen onderdelen van uw apparaat door de machine worden gegrepen.
- ⚠ Laad het apparaat niet op terwijl u het op uw lichaam draagt.

12.2 Veiligheidsinformatie product

- ① Bescherm apparaatconnectors, stekkers en de adapter tegen stof en vuil.
- ① Pas geen bovenmatige kracht toe wanneer u verschillende kabeltjes in uw apparaat steekt.
- ① Bescherm het apparaat tegen overmatig vocht (in de badkamer of in het zwembad) en warmtebronnen (radiator, bovenzijde tv). Behoed het apparaat voor zware schokken en trillingen.
- ① Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik nooit huishoudelijke schoonmaakmiddelen (waspoeder, zeep, enz.) of alcohol om de apparaten te reinigen. Gebruik nooit een magnetron of ander verwarmingstoestel om het apparaat te drogen.
- ① Röntgenstraling, CT-scans of MRI-scans kunnen de juiste werking van de apparaten nadelig beïnvloeden of zelfs tenietdoen.

- ① Neem contact op met uw erkende servicecentrum en stop met het gebruiken van uw apparaat wanneer het gevallen of beschadigd is, oververhit is geraakt, de kabel of de stekker beschadigd is of wanneer het in een vloeistof is gevallen.

12.3 Andere belangrijke informatie

- ① Bescherm uw ogen tegen het optische licht van de optische Toslink-kabel wanneer deze op het apparaat of de tv wordt aangesloten.
- ① Krachtige elektronische apparatuur, grotere elektronische installaties en metalen constructies kunnen het werkingsbereik drastisch beperken.
- ① Het toestel verzamelt en bewaart interne technische gegevens. Deze gegevens kunnen worden uitgelezen door een audicien om het apparaat te controleren en om u te helpen het apparaat correct te gebruiken.
- ① Het digitale signaal dat wordt verzonden vanaf het apparaat naar een verbonden ontvanger kan niet worden opgevangen door andere apparaten die zich niet binnen het netwerk van de microfoon bevinden.

13. Service en garantievoorwaarden

13.1 Plaatselijke garantie

Informeer bij de audicien bij wie u uw apparaten hebt aangeschaft naar de voorwaarden van de plaatselijke garantie.

13.2 Wereldwijde garantie

Phonak biedt u vanaf de verkoopdatum een beperkte, wereldwijde garantie van een jaar. Deze beperkte garantie geldt voor fabrieks- en materiaalfouten. De garantie is alleen geldig op vertoon van een aankoopbewijs.

De internationale garantie heeft geen invloed op eventuele wettelijke rechten waarop u aanspraak kunt maken op basis van de lokale garantie of de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van de verkoop van consumentenartikelen.

13.3 Garantiebeperking

Er bestaat geen recht op garantie bij normale slijtage, onjuiste behandeling of onderhoud, chemische invloeden, binnengedrongen vocht of overbelasting. Bij schade die door derden of niet-geautoriseerde servicewerkplaatsen is veroorzaakt, vervalt de garantie. Deze garantie omvat geen servicewerkzaamheden die worden verricht door een audicien in zijn/haar werkplaats.

Serienummer: _____

Aankoopdatum: _____

Uw audicien
(stempel/handtekening):



Sonova Communications AG
Herrenschwandweg 4
CH-3280 Murten
Zwitzerland
www.phonak.com

sonova
HEAR THE WORLD



029-0755-07/N3.00/2021-06/erc © 2021 Sonova AG All rights reserved