


# Phonak Lyric™ 4

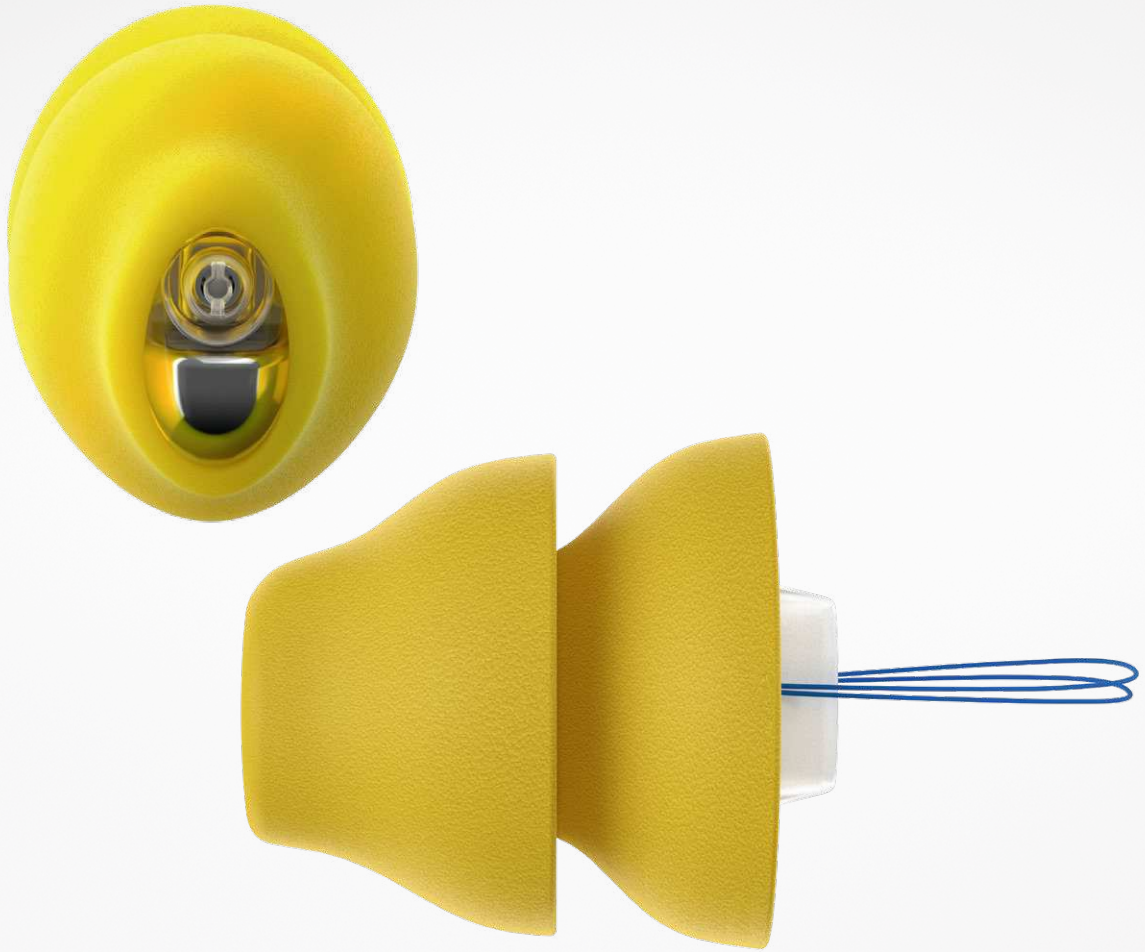

O único aparelho auditivo 100% invisível do mundo


Para mais informações, visite [www.phonakpro.com.br](http://www.phonakpro.com.br)

# O Lyric4 foi projetado para proporcionar mais daquilo que você e os usuários adoram

Os novos componentes do Lyric4 foram projetados para melhorar a estabilidade do produto, especialmente durante os primeiros 30 dias de uso. O diâmetro da aba interna do módulo foi ligeiramente reduzido para melhorar o conforto e otimizar os ajustes para os usuários.


O Lyric é um aparelho auditivo de uso prolongado que pode ser usado 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante meses seguidos<sup>1</sup>. Devido à adaptação profunda no canal auditivo, ele é 100% invisível. O Lyric não requer a troca ou o carregamento das suas baterias, manutenção contínua nem inserção ou remoção diárias. O Lyric está disponível em 7 tamanhos, desde XXS até XXL, permitindo que usuários e profissionais de saúde auditiva possam se beneficiar da sua tecnologia única de uso prolongado.

## Portfólio

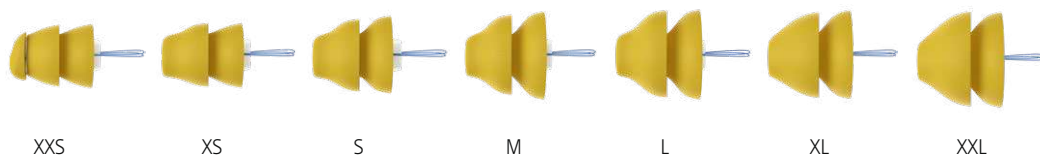


## Descrição do produto

- 1 Alça de inserção
- 2 Proteção do microfone
- 3 Indicador "este lado para cima"
- 4 Microfone e processador de sinal
- 5 Receptor
- 6 Bateria de zinco-ar
- 7 Porção medial
- 8 Porção lateral
- 9 Fio de remoção
- 10 \*Aba de proteção medial

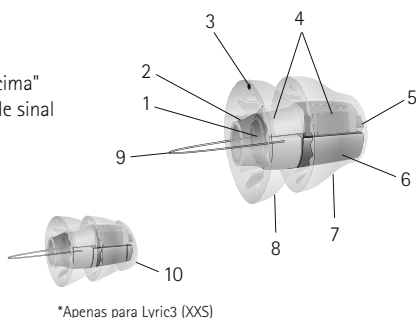


## Faixa de adaptação

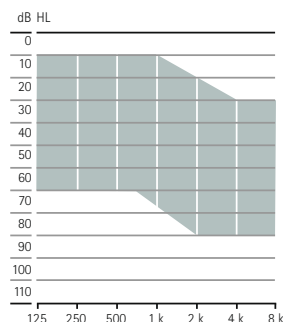

### SoundLync™

- 1 Chaveiro
- 2 Ímã
- 3 Ferramenta de remoção
- 4 Tampa

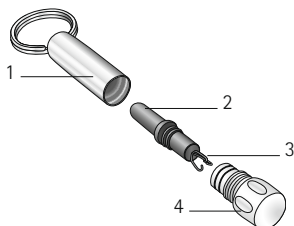

## Ajuste

Software	Phonak Target 6.2 ou superior
Interface	Programador do Lyric <sup>2</sup>

<sup>1</sup> As necessidades de substituição do Lyric podem variar de indivíduo para indivíduo. A duração da bateria do dispositivo varia de paciente para paciente e depende das condições de cada ouvido.

<sup>2</sup> Programador do Lyric ou Programador do Lyric3.

## Perguntas frequentes

### Quais as novidades?

O Lyric4 é uma evolução do Lyric3 em relação a estabilidade do produto, especialmente durante os primeiros 30 dias de uso. Isso se deve à nova proteção do receptor da aba interna e outras melhorias na arquitetura e encapsulamento dos componentes eletrônicos. A aba interna do módulo também é ligeiramente mais fina.

### Quais são as vantagens da adaptação profunda no conduto?

Com um receptor adaptado profundamente no conduto – a 4 mm da membrana timpânica – o Lyric foi projetado para manter a direcionalidade e localização, minimizando o espaço entre o dispositivo e a membrana timpânica para reduzir a oclusão. O telefone e os fones de ouvido podem ser usados normalmente. Os usuários do Lyric se beneficiam de uma maior facilidade de utilização graças à tecnologia Lyric sem inserção ou remoção diárias e sem trocas de baterias.

### Como é realizada a troca das baterias?

O Lyric é um aparelho auditivo descartável projetado para uma única adaptação. Assim que a bateria estiver descarregada, o aparelho auditivo é removido e, em seguida, substituído por um aparelho auditivo Lyric completamente novo, procedimento este realizado por um fonoaudiólogo certificado na adaptação do Lyric.

### Quem é um candidato ao Lyric?

Um fonoaudiólogo certificado na adaptação do Lyric irá avaliar o candidato com base em quatro critérios principais:

1. Perda auditiva dentro da faixa de adaptação: grau leve a moderadamente severo
2. Anamnese e Checklist
3. Formato do conduto e características anatômicas
4. Estilo de vida (nível de motivação, limitação para práticas de natação ou paraquedismo/mergulho quando estiver utilizando um dispositivo)

### Como é o processo de adaptação do Lyric?

O Lyric é adaptado no MAE a 4 mm da membrana timpânica. Para garantir uma adaptação confortável e precisa, os profissionais de saúde auditiva serão treinados para utilizar as ferramentas específicas de medição e inserção. Primeiro, o comprimento e diâmetro do canal auditivo são medidos para determinar a profundidade de inserção correta e o tamanho do dispositivo. O aparelho auditivo é então programado e adaptado no canal auditivo. O ajuste fino é realizado através do programador do Lyric.

### Como faço para programar o Lyric?

O Lyric é programado com o software de adaptação Phonak Target, através do programador do Lyric.

Os parâmetros de adaptação são transferidos para o aparelho auditivo através de um impulso magnético. Para a programação, o programador deve ser colocado próximo da proteção do microfone do aparelho auditivo.

### O Lyric é a prova d'água?

O Lyric é resistente à água, mas não à prova d'água, portanto, não deve ser totalmente submerso na água, a menos que o paciente utilize um tampão personalizado para proteger o Lyric da exposição à água.

### Quais atividades não podem ser realizadas com o Lyric?

O Lyric não deve ser usado durante a prática de mergulho ou paraquedismo. As alterações de pressão durante a prática destes esportes podem causar desconforto e/ou microfonia, caso o Lyric se movimente no canal auditivo. Se essas atividades forem realizadas acidentalmente, enquanto o paciente estiver usando o Lyric, um fonoaudiólogo certificado na adaptação do Lyric deve examinar o canal auditivo o mais brevemente possível.

### Exames como ressonância magnética, raios X ou tomografia computadorizada podem danificar o Lyric ou colocar o ouvido em risco?

O Lyric deve ser removido antes da realização de uma ressonância magnética, pois o aparelho auditivo contém peças metálicas. Ao contrário deste exame, um exame de raios X ou uma tomografia computadorizada não irão danificar ou deslocar o aparelho auditivo. No entanto, o médico e/ou técnico devem ser informados sobre o uso do aparelho auditivo. Caso os exames de raio X ou tomografia computadorizada sejam realizados no ouvido ou na cabeça, o Lyric deve ser removido. O médico também deve ser informado sobre o uso do Lyric se o usuário realizar uma cirurgia de qualquer tipo.

### O usuário pode remover o aparelho auditivo?

Recomenda-se realizar a remoção do aparelho auditivo por um profissional de saúde auditiva especialmente treinado para a adaptação do Lyric. Se necessário, o usuário pode remover o Lyric com o SoundLync.

### O usuário pode alterar as configurações do aparelho auditivo?

O Lyric é programado sem fios de acordo com a perda auditiva de cada usuário. O usuário é capaz de alterar o volume, ligar e desligar o aparelho auditivo e colocá-lo em modo DORMIR, através do ímã de controle remoto do SoundLync. O SoundLync também funciona como uma ferramenta de remoção, se o usuário desejar remover o(s) aparelho(s) auditivo(s) Lyric.

### O que é o modo DORMIR?

O modo DORMIR é um ajuste de transparência acústica. Nesta configuração, o Lyric compensa a oclusão causada pelo próprio aparelho auditivo. Para o usuário, é como se ele não estivesse usando o aparelho auditivo.

# life is on

Na Phonak, acreditamos que ouvir melhor significa viver melhor, o que é essencial para uma vida completa. Por mais de 70 anos, somos apaixonados por criar um mundo onde todos podem desfrutar do prazer de ouvir. Nossas tecnologias auditivas inovadoras são desenvolvidas para todas as idades e graus de perda auditiva, para que as pessoas se conectem socialmente, prosperem intelectualmente e cresçam emocionalmente.

[www.phonak.com.br](http://www.phonak.com.br)



027-0588-12/M1.00/2020-03/NLG © 2020 Sonova AG All rights reserved