

## テレビコネクターD 設定方法

Ver. 2

テレビコネクターD はテレビや音楽機器と接続させて補聴器に直接音声を送信することができるワイヤレスアクセサリです。使用する前に、補聴器とペアリングしておく必要があります。

### ❖ 互換性のある機器

- フォナック オーデオ P-312 / 13T / R
- フォナック ナイーダ P-PR / UP
- フォナック オーデオ M-312 / 312T / 13T / R
- フォナック ボレロ M-M / PR
- フォナック バート M-312
- フォナック ナイーダ M-SP
- フォナック スカイ M-M / PR / SP
- フォナック オーデオ B-ダイレクト（販売終了）

### ❖ テレビコネクターD 同梱物



1. テレビコネクターD 本体
2. 光デジタル音声出力用ケーブル  
(最初から本体に取り付けられています)
3. ヘッドフォン端子用  
3.5mm オーディオジャックケーブル
4. 電源プラグ
5. USB-マイクロ USB ケーブル
6. 固定用マジックテープ
7. 取扱説明書
8. クイックガイド
9. 保証書

### ❖ テレビコネクターD 各部名称





- a. 音量調節ボタン（大）
- b. 音量調節ボタン（小）
- c. 電源ボタン（長押しタップ）
- d. 状態表示ライト（LED）
- e. 接続ボタン
- f. マイクロ USB ソケット（電源）
- g. 音声入力端子（デジタル/アナログ）

## ❖ テレビコネクタ-Dの準備

テレビコネクタ-Dとお使いのテレビの準備を行います。お使いのテレビによって、接続方法・設定方法・表示方法が異なります。  
 テレビの取り扱いに関しては、テレビの取扱説明書およびメーカーへお問い合わせください。

### 光デジタル音声出力用ケーブルを使用した場合

1		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 同梱されている電源プラグと USB-マイクロ USB ケーブルを組み合わせます。</li> </ul>
2	 <p>光デジタル音声出力端子</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 組み合わせた電源プラグをコンセントに差し込みます。</li> <li>● テレビコネクタ-D に差した光デジタル音声出力用ケーブルをテレビの光デジタル音声出力端子に差します。</li> </ul>

### ヘッドフォン端子用 3.5mm オーディオジャックケーブルを使用した場合

1		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 同梱されている電源プラグと USB-マイクロ USB ケーブルを組み合わせます。</li> </ul>
2		<ul style="list-style-type: none"> <li>● テレビコネクタ-D に予め取り付けられている光デジタル音声出力用ケーブルを抜いて、同梱されているヘッドフォン端子用ケーブルに取り替えます(カチッと鳴るまでしっかり差し込みます)。</li> </ul>
3	 <p>ヘッドフォン端子</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 組み合わせた電源プラグをコンセントに差し込みます。</li> <li>● テレビコネクタ-D に差したヘッドフォン端子用ケーブルをテレビのイヤホン出力端子に差します。</li> </ul>


## ❖ テレビコネクタ-D LED ランプ表示

### LED ランプ 表示パターン

電源オン/音声信号を送信中 (通常使用)	電源オン/スタンバイモード (音声信号を待機中)	接続処理中 (例: 接続ボタンを押した際)	リセット	誤った音声信号
				

## ❖ テレビコネクタ-D タップ式操作




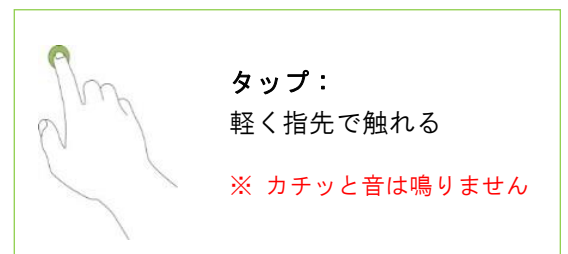


テレビコネクタ-Dの電源ボタン・音量調節ボタンはタップして操作します。



## ❖ テレビコネクターDと補聴器とのペアリング

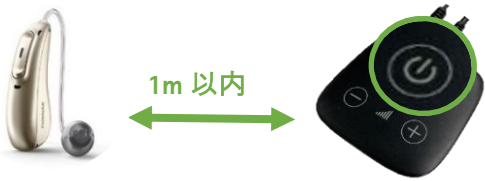初めてテレビコネクターDの電源を入れると自動的にペアリングモードが作動するので補聴器を1m以内に近づければペアリングすることができます。

2回目以降にペアリングする際は、電源をオンにし、接続ボタンを押してペアリングモードにしてからペアリング作業を行ってください。

(2回目以降) テレビコネクターDとのペアリング方法	
1	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● テレビコネクターDから1m以内に補聴器を近づけます。</li> <li>● テレビコネクターDの電源ボタンを電源をオンにします。</li> </ul>
2	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● テレビコネクターDの接続ボタンを短押しして、ペアリングモード(青い点滅)にさせます。</li> <li>● 補聴器とテレビコネクターDが正しくペアリングされると、補聴器からペアリング成功のピープ音が聞こえます。(5ピープ連続上昇 )</li> </ul>
3	<p>ペアリング成功のピープ音が提示された後、入力音声の有無によって次のように動作が異なります。</p> <p><b>【(テレビの)入力音声がある場合】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ テレビコネクターDのプログラム切替が「<b>オートマッチク</b>」に設定している ペアリング成功のピープ音が聞こえると、直ぐにテレビの音声聞こえ始めます。 その後も、テレビの電源がオンで、受信可能距離にいれば自動的にテレビの音声聞こえ始めます。</li> <li>➢ テレビコネクターDのプログラム切替が「<b>マニュアル</b>」に設定している ペアリング成功のピープ音が聞こえた後、補聴器からはピープ音は聞こえませんが、補聴器の多機能ボタン/プログラムスイッチから手動でテレビコネクターDのプログラムに切り替えることでテレビ音声を聞くことが可能です。プログラム構成の一番最後にテレビコネクターDのプログラムが追加されます。</li> <li>➢ テレビコネクターDのプログラム切替が「<b>マニュアル(ピープ音あり)</b>」に設定している ペアリング成功のピープ音が聞こえると、テレビコネクターDが利用可能状態であることを意味するピープ音が補聴器から聞こえます(2ピープ連続下降 )。ピープ音が鳴っている間(約15秒)に多機能ボタン/プログラムスイッチを押すと、テレビコネクターDのプログラムへ切り替わります。</li> </ul> <p><b>【(テレビの)入力音声がない場合】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ ペアリング成功のピープ音が聞こえると、直ぐに別のピープ音  が聞こえます(3ピープ連続上昇 )。これはテレビコネクターDの電源はオンだけど、テレビからの音声入力はないということを意味します。</li> </ul> <p>※ このピープ音はテレビコネクターDの接続ボタンを押してペアリングした際に、入力音声がない場合にのみ提示されます。</p>

## ❖ テレビコネクターDと補聴器のペアリング解除

テレビコネクターDの接続ボタンを約7秒間押し続けると、表示ランプが約2秒間に橙色に点灯します。

再度テレビコネクターDと補聴器の接続を行う場合は、上記表の1~3を繰り返します。

