

峰力 Naída™ L●

产品信息

峰力 Naída Lumity 是全系列的耳背式产品组合，适用于轻度至极重度听力损失。

Naída L 助听器受益于峰力智慧言语技术的支持，是那些需要我们最先进的平台峰力 Lumity 上提供强大解决方案的顾客的理想解决方案。



产品说明



Naída L-UP
Naída L-UP Trial
L90/L70/L50/L30




Naída L-PR
Naída L-PR Trial
L90/L70/L50/L30

电池型号		675	内置锂电续航
电感		•	
与智联 L 的兼容性			•
Bluetooth® (蓝牙)		•	•
疏水涂层		•	•
IP 等级		IP68 ¹	IP68 ¹
尺寸	长 x 宽 x 高	42.6 x 18.8 x 8.6 mm (1.68 x 0.74 x 0.34")	36.7 x 16.4 x 8.5 mm (1.44 x 0.64 x 0.33")
	重量	4.60 g / 0.162 oz	3.68 g / 0.130 oz
充电时间 ²	0% - 100%		3 h
	0% 至 80%		1.5 h
	30 分钟验配		10 分钟


		HE11	HE11 680	HE11 680	细声管 4.0
最大声输出 (dB SPL)	2 cc 耦合腔	141	134	130	129
最大增益 (dB)	2 cc 耦合腔	84	78	68	69
频率范围 (Hz)		< 100 - > 4700	< 100 - > 4700	< 100 - > 5700	< 100 - > 7100
工作电流 (mA)		3.3	2.8		

验配范围

■ 细声管 4.0
■ HE11 680

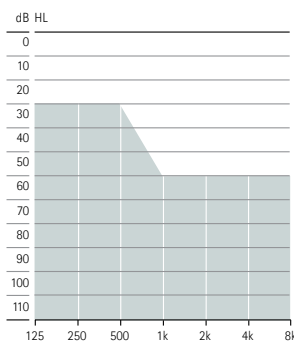

重度到极重度听力损失，
全部听力图型

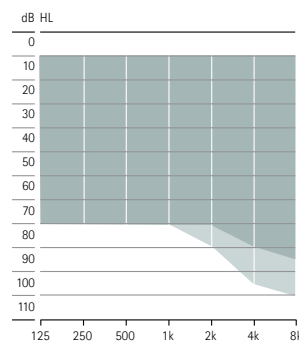

轻度到中度-重度听力损失，全部
听力图型

外壳颜色



H0
米色



P1
沙褐色



P3
檀木色



P4
栗色



P5
香槟色



P6
银灰色



P7
石墨灰色



P8
天鹅绒黑色

¹ IP68 表示助听器防尘防水。根据 IEC60529 标准，它在 1 米深的淡水中连续浸泡 60 分钟且在集尘室中放置 8 小时，仍然能够正常工作。

² 实际充电时间取决于电池的剩余寿命，可能会受到温度条件的影响。

Bluetooth® 文字标记和徽标是 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标，Sonova AG 对此类徽标的任何使用均已经过许可。

性能等级

	尊享 L90	高端 L70	标准 L50	基本 L30
全时声感追踪系统™ 5.0				
极度嘈杂中言语环境	•			
汽车中交谈环境	•			
回声舒适环境	•			
音乐	•	•		
纯噪声环境	•	•	•	
噪声言语混合环境	•	•	•	•
安静环境	•	•	•	•
蓝牙言语流媒体	•	•	•	•
蓝牙音乐流媒体	•	•	•	•
附加程序				
附加程序最大数量	4	4	4	4
回声舒适环境	•			
极度嘈杂中言语环境	•	•		
360°自动言语方位聚焦	•	•		
噪声言语混合环境	•	•	•	•
安静环境	•	•	•	•
纯噪声环境	•	•	•	•
音乐	•	•	•	•
声学电话	•	•	•	•
自定义程序	•	•	•	•
通过 T-coil ± 麦克风通话 ¹	•	•	•	•
公用 T-coil ± 麦克风 ¹	•	•	•	•
无线传输程序				
RogerDirect + 麦克风	•	•	•	•
峰力 PartnerMic™ + 麦克风	•	•	•	•
电话 + 麦克风	•	•	•	•

	尊享 L90	高端 L70	标准 L50	基本 L30
功能				
言语定位传感器	•			
深度言语感知	•			
立体声聚焦 2.0	•	•		
动态噪声消除	•	•		
运动听觉传感器 ²	•	•	•	
RogerDirect™	•	•	•	•
回声阻断	•			
轻敲控制 ²				
- Siri/Google 助手	•	•		
- 暂停/恢复传输	•	•		
- 接听/结束通话	•	•		
突发噪声抑制	•	•		
双耳电话	•	•	•	
真耳声音重塑	•	•	•	
特级变焦方向性	•	•	•	•
络+ 和方向性设置	•	•	•	•
宽带助推器 ¹	•	•	•	•
健康管理功能 ^{2,3}	•	•	•	•
风噪声阻断	•	•	•	•
用户喜好存储	•	•	•	•
耳鸣平衡 ²	•	•	•	•
自然声景渐进对焦功能	•	•	•	•
环境平衡系统	•	•	•	•
高频重塑 升级版	•	•	•	•
自动反馈阻断	•	•	•	•
高精度降噪	•	•	•	•
一键式双耳同步	•	•	•	•
智能优化通气孔	•	•	•	•
微调通道	20	20	16	12

无线音频技术

1 仅适用于峰力 Naída L-UP
2 仅适用于峰力 Naída L-PR
3 可与 myPhonak 组合使用

验配

	Naída L-UP Naída L-UP Trial L90/L70/L50/L30	Naída L-PR Naída L-PR Trial L90/L70/L50/L30
峰力 Target 验配软件	9.0 或更高	9.0 或更高
Noahlink 无线编程器/Noahlink 无线编程器 2	•	•
NOAHlink	•	
HI-PRO, HI-PRO2	•	

声学耦合

			Naída L-UP Naída L-UP Trial L90/L70/L50/L30	Naída L-PR Naída L-PR Trial L90/L70/L50/L30
出声孔	耳钩	缓冲 (HE11 680), 透明色	•	•
	耳钩	无缓冲 (HE11), 透明色	•	
	细声管 4.0	有左侧和右侧可供选择, 提供五种不同长度 (00,0,1,2,3)		•
适用于细声管的耳件	耳塞	微型耳塞		•
		开放耳塞 有三种尺寸 (S、M、L) 可供选择		•
		半开放耳塞 有三种尺寸 (S、M、L) 可供选择		•
		封闭耳塞 有三种尺寸 (S、M、L) 可供选择		•
	定制式耳塞	(硬)		•
	硅胶		•	
适用于耳钩的耳件	耳模		•	•

峰力 Naída L Trial

峰力 Naída L Trial 助听器可以快速设置为所需的性能等级, 以匹配您的 推荐。这使您能够在第一次预约时即可为您的顾客提供最佳听力解决方案, 或顾客的助听器处于维修状态时为其提供替换件。Naída L Trial 设备还包含一个预装的络+ 受话器, 用于简单的演示和任意络+ 麦克风的试用。

峰力 Naída L-PR 充电选项

峰力多用途充电盒 BTE / 峰力多用途充电盒 BTE 2

Naída L-PR 拥有您喜欢的 Lumity 的全部功能，以及可充电的优点。顾客可享受包括流媒体播放在内的全天候助听服务*。

* 电池预期使用寿命为 16 小时，包括 4 小时 BT 经典传输和 4 小时电视连接器传输。



峰力 Naída L Bluetooth® (蓝牙) 版本

直接通话 / 音频传输

Bluetooth (蓝牙) 4.2 无线技术和大多数老款蓝牙手机

无线通信产品组合

	Naída L-UP Naída L-UP Trial L90/L70/L50/L30	Naída L-PR Naída L-PR Trial L90/L70/L50/L30
无线配件		
电视连接器	•	•
麦灵通	•	•
Phonak Remote Control	•	•
络+		
络+ 麦克风	•	•
应用程序		
myPhonak	•	•
myPhonak Junior	•	•

如需更多信息，请访问 www.phonak.com/naida-lumity

如需络+ 麦克风的更多信息，请访问 www.phonak.com/roger

如需 myPhonak 和 myPhonak Junior 的更多信息，请访问 www.phonak.com/apps

life is on

自 1947 年以来，峰力一直致力于通过开辟新的声学世界来保持生活质量。早在公司成立伊始，我们就一直深信：听力健康与幸福生活紧密相联，并与人们每天的生活息息相关。实际上，听觉还与社交、情感、认知能力和生理健康方面相关联。无论是现在还是未来，我们会一直努力提供最广泛的创新听力解决方案组合。和听力保健专家一样，我们一直专注于最重要的事情：提高言语理解度，改变人们的生活，对整个社会产生积极影响。

www.phonak.com



027-0699-70|V1.00|2023-06|NLG © 2023 Sonova AG All rights reserved

