

Phonak Sky™ L ●

产品信息

Phonak Sky Lumity 为综合性儿童 BTE（耳背式）助听器产品组合，用于患有轻度到极重度听力损失的顾客。

Sky L 助听器由 Phonak SmartSpeech™ Technology（峰力智慧言语技术(SmartSpeech™)）提供技术支持，适用于那些想通过我们最高端的 Phonak Lumity 平台来体验言语理解的儿童顾客。



产品说明



Sky L-M
Sky L-M Trial
L90/L70/L50/L30



Sky L-PR
Sky L-PR Trial
L90/L70/L50/L30



Sky L-SP
Sky L-SP Trial
L90/L70/L50/L30




Sky L-UP
Sky L-UP Trial
L90/L70/L50/L30

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|---|---|--------------|---|---|--------------|---------------|--------------|
| 电池型号 | | 312 | 内置锂电续航 | | 13 | 675 | | | |
| LED 儿童模式 | | • | • | | • | • | | | |
| 电感 | | • | | | • | • | | | |
| 与智联 L 的兼容性 | | | • | | | | | | |
| Bluetooth® (蓝牙) | | • | • | | • | • | | | |
| 疏水涂层 | | • | • | | • | • | | | |
| IP 等级 | | IP68 ¹ | IP68 ¹ | | IP68 ¹ | IP68 ¹ | | | |
| 尺寸 | 长 x 宽 x 高 | 31.3 x 14.1 x 7.3 mm (1.23 x 0.56 x 0.29") | 36.7 x 16.4 x 8.5 mm (1.44 x 0.64 x 0.33") | | 40.0 x 16.9 x 8.5 mm (1.57 x 0.67 x 0.33") | 42.6 x 18.8 x 8.6 mm (1.68 x 0.74 x 0.34") | | | |
| | 重量 | 2.18 g / 0.077 oz | 3.68 g / 0.130 oz | | 4.40 g / 0.155 oz | 4.60 g / 0.162 oz | | | |
| 充电时间 ² | 0% - 100% | | 3 小时 | | | | | | |
| | 0% - 80% | | 1.5 小时 | | | | | | |
| | 30 分钟验配 | | 10 分钟 | | | | | | |
| | | HE11 680 | 细声管 4.0 | HE11 680 | 细声管 4.0 | HE11 | HE11 680 | | |
| 最大声输出 (dB SPL) | 2 cc 耦合腔 | 128 | 122 | 130 | 129 | 139 | 133 | 141 | 134 |
| 最大增益 (dB) | 2 cc 耦合腔 | 63 | 58 | 68 | 69 | 81 | 75 | 84 | 78 |
| 频率范围 (Hz) | | <100 - >7800 | <100 - >8000 | <100 - >5700 | <100 - >7100 | <100 - >4900 | <100 - >5700 | <100 - > 4700 | <100 - >4700 |
| 工作电流 (mA) | | 1.6 | 1.6 | | 2.1 | 2.2 | | 3.3 | 2.8 |


验配范围

■ DSL 儿科验配范围
■ APD/NAL 验配范围


HE11 680

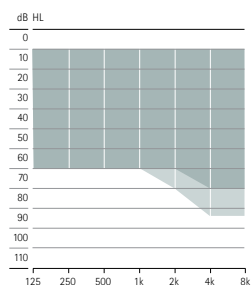


HE11 680

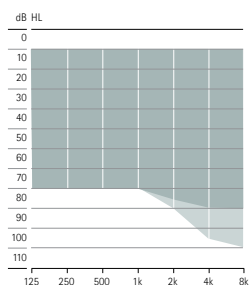

HE11 680

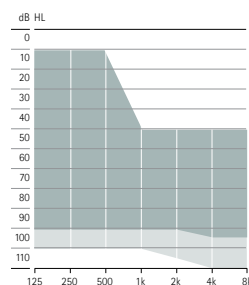


HE11 680

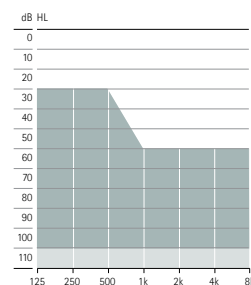


重度到极重度听力损失³

细声管 4.0

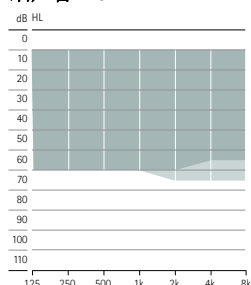


轻度到中度听力损失³

细声管 4.0

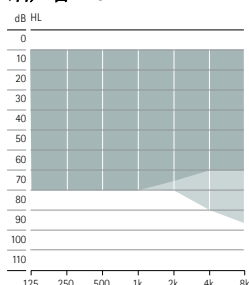

轻度到中重度听力损失³

细声管 4.0

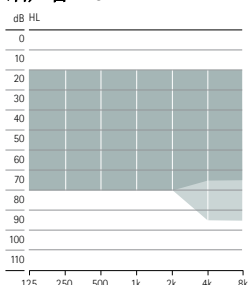

轻度到重度听力损失³

¹ IP68 表示助听器防尘防水。根据 IEC60529 标准，它在 1 米深的淡水中连续浸泡 60 分钟且在集尘室中放置 8 小时，仍然能够正常工作。

² 实际充电时间取决于电池的剩余寿命，可能会受到温度条件的影响。

³ 采用 DSL 验配方案时。

Bluetooth® 文字标记和徽标是 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标，Sonova AG 对此类徽标的任何使用均已经过许可。

性能等级

全时声感追踪系统

(儿童版) 5.0

| | 尊享 L90 | 高端 L70 | 标准 L50 | 基本 L30 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 极度嘈杂中言语环境 | • | | | |
| 汽车中交谈环境 | • | | | |
| 回声中舒适环境 | • | | | |
| 音乐 | • | • | | |
| 纯噪声环境 | • | • | • | |
| 噪声言语混合环境 | • | • | • | • |
| 安静环境 | • | • | • | • |
| 蓝牙言语流媒体 | • | • | • | • |
| 蓝牙音乐流媒体 | • | • | • | • |
| 附加程序 | | | | |
| 附加程序最大数量 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 回声中舒适环境 | • | | | |
| 极度嘈杂中言语环境 | • | • | | |
| 360°自动言语方位聚焦 | • | • | | |
| 噪声言语混合环境 | • | • | • | • |
| 安静环境 | • | • | • | • |
| 纯噪声环境 | • | • | • | • |
| 音乐 | • | • | • | • |
| 声学电话 | • | • | • | • |
| 自定义程序 | • | • | • | • |
| 通过 T-coil 土 麦克风通 话 ¹ | • | • | • | • |
| 公用 T-coil 土 麦克风 ¹ | • | • | • | • |
| 无线传输程序 | | | | |
| RogerDirect™ + mic | • | • | • | • |
| 峰力 PartnerMic™ + 麦克风 | • | • | • | • |
| 电话 + 麦克风 | • | • | • | • |

功能

水
平
语
音
程
度

| | 尊享 L90 | 高端 L70 | 标准 L50 | 基本 L30 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 言语定位传感器 | • | | | |
| 深度言语感知 | • | | | |
| 立体声聚焦 2.0 | • | • | | |
| 动态噪声消除 | • | • | | |
| 运动听觉传感器 ² | • | • | • | |
| RogerDirect | • | • | • | • |
| 回声阻断 | • | | | |
| 轻敲控制 ² | | | | |
| - Siri/Google 助手 | • | • | | |
| - 暂停/恢复传输 | • | • | | |
| - 接听/结束通话 | • | • | | |
| 突发噪声抑制 | • | • | | |
| 双耳电话 | • | • | • | |
| 真耳声音重塑 | • | • | • | |
| Roger™ 和方向性设置 | • | • | • | • |
| 特级变焦方向性 | • | • | • | • |
| 宽带助推器 ³ | • | • | • | • |
| 风噪声阻断 | • | • | • | • |
| 用户喜好存储 | • | • | • | • |
| 自然声景渐进对焦功 能 | • | • | • | • |
| 环境平衡系统 | • | • | • | • |
| 高频重塑 升级版 | • | • | • | • |
| 自动反馈阻断 | • | • | • | • |
| 高精度降噪 | • | • | • | • |
| 一键式双耳同步 | • | • | • | • |
| 智能优化通气孔 | • | • | • | • |
| 微调通道 | 20 | 20 | 16 | 12 |

1 不适用于 Phonak Sky L-PR

2 仅适用于 Phonak Sky L-PR

3 仅适用于 Phonak Sky L-UP

验配

| | Sky L-M Sky L-M Trial L90/L70/L50/L30 | Sky L-PR Sky L-PR Trial L90/L70/L50/L30 | Sky L-SP Sky L-SP Trial L90/L70/L50/L30 | Sky L-UP Sky L-UP Trial L90/L70/L50/L30 |
|-------------------------------------|---|---|---|---|
| 峰力 Target 验配软件 | 9.1 或更高 | 9.0 或更高 | 9.1 或更高 | 9.0 或更高 |
| Noahlink 无线编程器/Noahlink 无线编 程器 2 | • | • | • | • |
| NOAHLINK | | | • | • |
| HI-PRO, HI-PRO2 | | | • | • |

声学耦合

| | | Sky L-M Sky L-M Trial L90/L70/L50/L30 | Sky L-PR Sky L-PR Trial L90/L70/L50/L30 | Sky L-SP Sky L-SP Trial L90/L70/L50/L30 | Sky L-UP Sky L-UP Trial L90/L70/L50/L30 |
|------------------|------------------------------------|---|---|---|---|
| 声音输出口 | | | | | |
| 标准耳钩 | 带阻尼 (HE11 680)、有透明色和 6 种颜色供儿童顾客挑选 | • | • | • | • |
| | 不带阻尼 (HE 11), 只有透明色 | | | • | • |
| 防干扰耳钩 (mini) | 带阻尼 (HE11 680), 有透明色和 6 种颜色供儿童顾客挑选 | • | • | • | • |
| | 不带阻尼 (HE 11), 只有透明色 | | | • | • |
| 细声管 4.0 | 有左侧和右侧可供选择, 提供五种不同长度 (00,0,1,2,3) | • | • | • | |
| 适用于细声管的耳件 | | | | | |
| 耳塞 | 微型耳塞 | • | • | • | |
| | 开放耳塞 有三种尺寸 (S、M、L) 可供选择 | • | • | • | |
| | 半开放耳塞 有三种尺寸 (S、M、L) 可供选择 | • | • | • | |
| | 封闭耳塞 有三种尺寸 (S、M、L) 可供选择 | • | • | • | |
| 定制式耳塞 | (硬) | • | • | • | |
| | 硅胶 | • | • | • | |
| 耳钩用耳件 | | | | | |
| 耳模 | | • | • | • | • |

外壳和耳钩颜色

外壳



H0
米色



P1
沙褐色



P3
檀香木色



P4
栗色



P5
香槟色



P6
银灰色



P7
石墨灰色



P8
天鹅绒黑色



M6
熔岩红色



M7
海洋蓝色



M8
深紫红色



Q2
电绿色



Q3
加勒比海蓝色



T3
宝石粉色

耳钩



R1
绿色



R2
黄色



R3
粉色



R4
橙色



Q6
蓝色



Q7
紫色



13
透明色

Phonak Sky L-PR 充电选项

Phonak Charger Combi BTE / Phonak Charger Combi BTE 2
 Sky L-PR 拥有您喜欢的 Lumity 的全部功能，以及可充电的优点。
 顾客可享受包括流媒体播放在内的全天候助听服务*。

* 预计电池续航时间为 16 小时，包括 10 小时的络+ 或音频传输。



Phonak Sky L Trial

Phonak Sky L Trial 助听器可以快速设置为所需的性能等级，以匹配您的推荐。这使您能够在第一次预约时即可为您的顾客提供最佳听力解决方案，或顾客的助听器处于维修状态时为其提供替换件。Sky L Trial 设备还包含一个预装的络+ 受话器，用于简单的演示和任意络+ 麦克风的试用。

Phonak Sky L Bluetooth® (蓝牙) 版本

直接通话 / 音频传输

蓝牙 4.2 无线技术和大多数老款蓝牙手机

无线通信产品组合

| | Sky L-M Sky L-M Trial L90/L70/L50/L30 | Sky L-PR Sky L-PR Trial L90/L70/L50/L30 | Sky L-SP Sky L-SP Trial L90/L70/L50/L30 | Sky L-UP Sky L-UP Trial L90/L70/L50/L30 |
|-----------------------|---|---|---|---|
| 无线配件 | | | | |
| 电视连接器 | • | • | • | • |
| 麦灵通 | • | • | • | • |
| Phonak Remote Control | • | • | • | • |
| 络+ | | | | |
| 络+ 麦克风 | • | • | • | • |
| 应用程序 | | | | |
| myPhonak Junior | • | • | • | • |

更多信息，请访问 www.phonak.com/sky-lumity
 有关络+ 麦克风的更多信息，请访问 www.phonak.com/roger-for-education
 有关 myPhonak Junior 的更多信息，请访问 www.phonak.com/myphonak-junior

life is on

自 1947 年以来，峰力一直致力于通过开辟新的声学世界来保持生活质量。早在公司成立伊始，我们就一直深信：听力健康与幸福生活紧密相联，并与人们每天的生活息息相关。实际上，听觉还与社交、情感、认知能力和生理健康方面相关联。无论是现在还是未来，我们会一直努力提供最广泛的创新听力解决方案组合。和听力保健专家一样，我们一直专注于最重要的事情：提高言语理解度，改变人们的生活，对整个社会产生积极影响。

www.phonak.com



027-0705-70/V1.00/2024-02/NLG © 2024 Sonova AG All rights reserved