

Phonak Sky™ L.

Produktinformation

Phonak Sky Lumity ist das umfangreiche HdO-Portfolio für Kinder mit leichtem bis hochgradigem Hörverlust.

Dank leistungsstarker Phonak SmartSpeech™ Technologie sind Sky L Hörsysteme die erste Wahl für junge Hörsystemträger, die Sprachverstehen über unsere hochentwickelte Phonak Lumity Plattform erleben möchten.



Produktbeschreibung



Sky L-M
Sky L-M Trial
L90/L70/L50/L30



Sky L-PR
Sky L-PR Trial
L90/L70/L50/L30



Sky L-SP
Sky L-SP Trial
L90/L70/L50/L30










Sky L-UP
Sky L-UP Trial
L90/L70/L50/L30

Batteriegröße		312	Integrierter Akku		13		675		
Kinder-LED-Anzeige		•	•		•		•		
Telefonspule		•			•		•		
CROS L Kompatibilität			•						
Bluetooth®		•	•		•		•		
Wasserabweisende Beschichtung		•	•		•		•		
IP-Code (Schutzgrad)		IP68 ¹	IP68 ¹		IP68 ¹		IP68 ¹		
Maße	L x B x T	31,3 x 14,1 x 7,3 mm (1,23 x 0,56 x 0,29")	36,7 x 16,4 x 8,5 mm (1,44 x 0,64 x 0,33")		40,0 x 16,9 x 8,5 mm (1,57 x 0,67 x 0,33")		42,6 x 18,8 x 8,6 mm (1,68 x 0,74 x 0,34")		
	Gewicht	2,18 g	3,68 g		4,40 g		4,60 g		
Ladezeiten ²	0% bis 100%		3 Std.						
	0% bis 80%		1,5 Std.						
	30 Min.								
	Anpassung		10 Min.						
		HE11 680	SlimTube 4.0	HE11 680	SlimTube 4.0	HE11	HE11 680	HE11	HE11 680
Max. Ausgangsschalldruck (dB SPL) 2 cm ³ Kuppler		128	122	130	129	139	133	141	134
Max. Verstärkung (dB) 2 cm ³ Kuppler		63	58	68	69	81	75	84	78
Frequenzbereich (Hz)		<100 - > 7800	<100 - > 8000	< 100 - > 5700	< 100 - > 7100	<100 - > 4900	< 100 - > 5700	< 100 - > 4700	< 100 - > 4700
Betriebsstrom (mA)		1,6	1,6			2,1	2,2	3,3	2,8

Anpassbereiche

■ DSL Anpassbereich Kinder
■ APD/NAL Anpassbereich

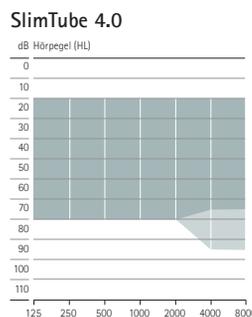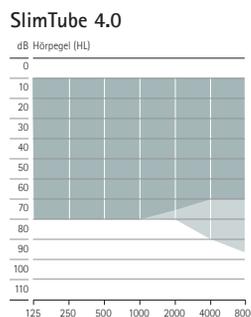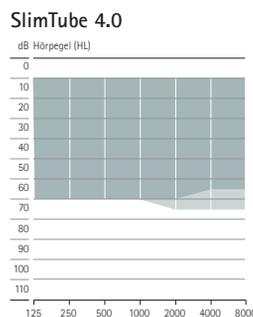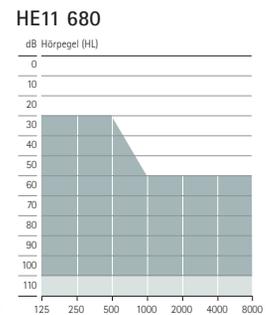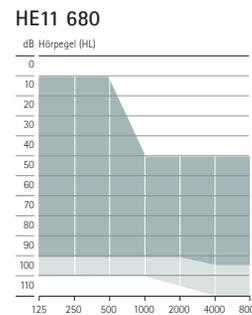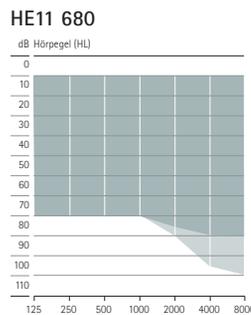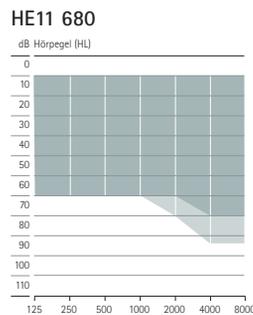

Starker bis hochgradiger Hörverlust³

Leicht- bis mittelgradiger Hörverlust³

Leichtgradiger bis starker Hörverlust³

Leicht- bis hochgradiger Hörverlust³

1 IP68 bezeichnet die Wasser- und Staubresistenz des Hörsystems. Es hat ein konstantes 60-minütiges Eintauchen in 1 Meter tiefem Süßwasser und 8 Stunden in der Staubkammer gemäß IEC60529 Standard schadlos überstanden.

2 Die tatsächliche Ladezeit hängt auch vom Ladezustand des Akkus ab und kann je nach Temperaturbedingungen variieren.

3 Bei Anwendung der DSL-Anpassformel.

Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc., jegliche Verwendung dieser Marken durch die Sonova AG erfolgt unter Lizenz.

Technologiestufen

	Premium L90	Advanced L70	Standard L50	Essential L30
AutoSense Sky OS 5.0				
Verstehen im lauten Störgeräusch	•			
Verstehen bei Fahrgeräuschen	•			
Komfort in halligen Situationen	•			
Musik	•	•		
Komfort im Störgeräusch	•	•	•	
Verstehen im Störgeräusch	•	•	•	•
Ruhige Umgebung	•	•	•	•
Sprach-Streaming (Medien) + Mik.	•	•	•	•
Audio-Streaming (Medien) + Mik.	•	•	•	•
Zusätzliche Programme				
Maximale Anzahl der zusätzlichen Programme	4	4	4	4
Komfort in halligen Situationen	•			
Verstehen im lauten Störgeräusch	•	•		
Sprachverstehen in 360°	•	•		
Verstehen im Störgeräusch	•	•	•	•
Ruhige Umgebung	•	•	•	•
Komfort im Störgeräusch	•	•	•	•
Musik	•	•	•	•
Akustisches Telefon	•	•	•	•
Individuelles Hörprogramm	•	•	•	•
Telefon über T-Spule ± Mik. ¹	•	•	•	•
Induktionsschleife (Telefonspule ± Mik.) ¹	•	•	•	•
Streaming-Programme				
RogerDirect™ + Mik.	•	•	•	•
Phonak PartnerMic™ + Mik.	•	•	•	•
Anruf + Mik.	•	•	•	•

	Premium L90	Advanced L70	Standard L50	Essential L30
Funktionen				
SpeechSensor	•			
Speech Enhancer	•			
StereoZoom 2.0	•	•		
Dynamic Noise Cancellation	•	•		
Motion Sensor Hearing ²	•	•	•	
RogerDirect	•	•	•	•
EchoBlock	•			
Tap Control ²				
- Siri/Google-Assistent	•	•		
- Streaming pausieren/fortsetzen	•	•		
- Anruf annehmen/beenden	•	•		
SoundRelax	•	•		
DuoPhone	•	•	•	
Real Ear Sound	•	•	•	
Roger™ und direktionale Einstellung	•	•	•	•
UltraZoom	•	•	•	•
Broadband Booster ³	•	•	•	•
WindBlock	•	•	•	•
Lautstärkeabgleich (DataLogging)	•	•	•	•
Auto Akklimatisierung	•	•	•	•
Streaming-Balance	•	•	•	•
SoundRecover2	•	•	•	•
WhistleBlock	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•
QuickSync	•	•	•	•
AOV	•	•	•	•
Kanäle für Feinanpassung	20	20	16	12

1 Nicht für Phonak Sky L-PR verfügbar
2 Nur für Phonak Sky L-PR verfügbar
3 Nur für Phonak Sky L-UP verfügbar

Anpassung

	Sky L-M Sky L-M Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-PR Sky L-PR Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-SP Sky L-SP Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-UP Sky L-UP Trial L90/L70/L50/L30
Phonak Target	9.1 oder höher	9.0 oder höher	9.1 oder höher	9.0 oder höher
Noahlink Wireless/Noahlink Wireless 2	•	•	•	•
NOAHLink			•	•
HI-PRO, HI-PRO2			•	•

Akustische Ankopplung

		Sky L-M Sky L-M Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-PR Sky L-PR Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-SP Sky L-SP Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-UP Sky L-UP Trial L90/L70/L50/L30
Schallaustritt					
Standard-Hörwinkel	Gedämpft (HE11 680), transparent und 6 zusätzliche Farben für Kinder	•	•	•	•
	Nicht gedämpft (HE 11), nur in transparent			•	•
Kindersicherer Hörwinkel (Mini)	Gedämpft (HE11 680), transparent und 6 zusätzliche Farben für Kinder	•	•	•	•
	Nicht gedämpft (HE 11), nur in transparent			•	•
SlimTube 4.0	Für rechts und links in fünf unterschiedlichen Längen (00, 0, 1, 2, 3) erhältlich	•	•	•	
Ohrpasstück für SlimTube					
Dome	Mini Dome	•	•	•	
	Offener Dome	In drei Größen erhältlich (S, M, L)	•	•	
	Geschlossener Dome	In drei Größen erhältlich (S, M, L)	•	•	
	Power Dome	In drei Größen erhältlich (S, M, L)	•	•	
SlimTip	Acryl	•	•	•	
	Silikon	•	•	•	
Ohrpasstück für Hörwinkel					
Otoplastik		•	•	•	•

Gehäuse- und Hörwinkelfarben

Gehäuse



H0
Beige



P1
Sand Beige



P3
Sandelholz



P4
Kastanie



P5
Champagner



P6
Silbergrau



P7
Graphitgrau



P8
Samtschwarz



M6
Lava Red



M7
Blue Ocean



M8
Majesty Purple



Q2
Electric Green



Q3
Caribbean Pirate



T3
Precious Pink

Hörwinkel



R1
Grün



R2
Gelb



R3
Pink



R4
Orange



Q6
Blau



Q7
Violett



13
Transparent

Phonak Sky L-PR Ladeoptionen

Phonak Charger Combi BTE / Phonak Charger Combi BTE 2

Sky L-PR verfügt über alle beliebten Lumity Funktionen und ist zudem wiederaufladbar. So erleben Ihre Kunden einen ganzen Tag Hörerlebnis inklusive Wireless-Streaming.*

* Die erwartete Akkulaufzeit beträgt 16 Stunden, einschließlich 10 Stunden Roger oder Audio-Streaming.



Phonak Sky L Trial

Die neuen Phonak Sky L Trial Hörsysteme können entsprechend Ihrer Empfehlung schnell auf die gewünschte Technologiestufe eingestellt werden. So können Sie die Hörlösung Ihres Kunden bereits beim ersten Termin optimal anpassen oder ein Ersatzgerät zur Verfügung stellen, falls das Hörsystem des Kunden in Reparatur ist. In den Sky L Trial Geräten ist ein Roger-Empfänger vorinstalliert, der eine einfache Demonstration und das Probetragen jedes beliebigen Roger-Mikrofons ermöglicht.

Phonak Sky L Bluetooth® Versionen

Streaming von Telefonanrufen / Audio-Streaming

Bluetooth 4.2 Wireless-Technologie und ältere bluetoothfähige Smartphones

Wireless Communication Portfolio

	Sky L-M Sky L-M Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-PR Sky L-PR Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-SP Sky L-SP Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-UP Sky L-UP Trial L90/L70/L50/L30
Wireless-Zubehör				
TV Connector	•	•	•	•
Phonak PartnerMic	•	•	•	•
Phonak RemoteControl	•	•	•	•
Roger				
Roger-Mikrofone	•	•	•	•
App				
myPhonak Junior	•	•	•	•

Weitere Informationen finden Sie unter: www.phonak.com/sky-lumity

Weitere Informationen zu Roger-Mikrofonen finden Sie unter: www.phonak.com/roger-for-education

Weitere Informationen zu myPhonak Junior finden Sie unter: www.phonak.com/myphonak-junior

life is on

Seit 1947 setzt sich Phonak für den Erhalt der Lebensqualität durch die Eröffnung neuer Klangwelten ein. Schon in der Gründungszeit prägte das Unternehmen eine wichtige Überzeugung: Gutes Hören bedeutet Wohlbefinden und Lebensqualität und ist somit essentiell, um das Leben in vollen Zügen genießen zu können. Tatsächlich besteht ein direkter Zusammenhang zwischen Hören und sozialem, emotionalem, kognitivem und körperlichem Wohlbefinden. Heute und in Zukunft ist unser Ziel, das breiteste Portfolio an innovativen Hörlösungen anzubieten. Gemeinsam mit unseren Hörakustikern konzentrieren wir uns auf das Wesentliche: Wir wollen das Sprachverstehen verbessern und das Leben unserer Kunden und die Gesellschaft als Ganzes zum Positiven verändern.

www.phonak.com



027-0697-01|V1.00|2024-02|NLG © 2024 Sonova AG All rights reserved