

Phonak Sky™ L.

Informações do produto

O Phonak Sky Lumity é o portfólio abrangente de soluções pediátricas BTE para perdas auditivas leves a profundas.

Com a Tecnologia Phonak SmartSpeech™, os aparelhos auditivos Sky L são a opção para usuários pediátricos que desejam experimentar a compreensão de fala em nossa plataforma mais avançada Phonak Lumity.



Descrição do produto




Sky L-PR
Sky L-PR Trial
L90/L70/L50/L30



Sky L-UP
Sky L-UP Trial
L90/L70/L50/L30

Tamanho da bateria		Recarregável interna		675	
Padrões pediátricos de LED		•		•	
Bobina de indução		•		•	
Compatibilidade com o CROS L		•		•	
Bluetooth® ¹		•		•	
Revestimento hidrofóbico		•		•	
Classificação IP		IP68 ²		IP68 ²	
Dimensões	C x L x P	36,7 x 16,4 x 8,5 mm (1,44 x 0,64 x 0,33")		42,6 x 18,8 x 8,6 mm (1,68 x 0,74 x 0,34")	
	Peso	3,68 g/0,130 oz		4,60 g/0,162 oz	
Tempos de carregamento ³	0% a 100%	3 h			
	0% a 80%	1,5 h			
	Ajuste de 30 min.	10 min.			
		HE11 680	tubo fino 4.0	HE11	HE11 680
Nível máx. de saída (dB SPL)	Acoplador de 2cc	130	129	141	134
Ganho máx. (dB)	Acoplador de 2cc	68	69	84	78
Faixa de frequência (Hz)		<100 - >5700	<100 - >7100	<100 - >4700	<100 - >4700
Consumo de energia (mA)				3.3	2.8

Faixas de adaptação

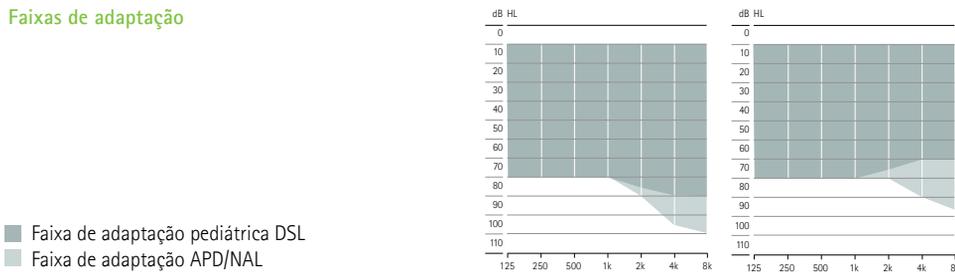

Perda auditiva leve a moderadamente severa, todas as configurações audiométricas

Perda auditiva severa a profunda, todas as configurações audiométricas

¹ A marca e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Sonova AG é feito sob licença.

² IP68 indica que o aparelho auditivo é resistente à água e poeira. Resistiu a uma submersão contínua a 1 metro de água doce durante 60 minutos e a 8 horas de exposição à câmara de poeira, tal como definido na norma IEC60529.

³ O tempo de carregamento real depende da duração restante da bateria e pode ser afetado pelas condições de temperatura.

Níveis de desempenho

	Premium L90	Advanced L70	Standard L50	Essential L30
AutoSense Sky OS 5.0				
Fala no ruído forte	•			
Fala no carro	•			
Conforto no eco	•			
Música	•	•		
Conforto no ruído	•	•	•	
Fala no ruído	•	•	•	•
Situação silenciosa	•	•	•	•
Fala de mídia + mic	•	•	•	•
Música de mídia + mic	•	•	•	•
Programas adicionais				
Máx. de programas adicionais	4	4	4	4
Conforto no eco	•			
Fala no ruído forte	•	•		
Fala em 360°	•	•		
Fala no ruído	•	•	•	•
Situação silenciosa	•	•	•	•
Conforto no ruído	•	•	•	•
Música	•	•	•	•
Telefone acústico	•	•	•	•
Programa personalizado	•	•	•	•
Telefone via bobina ± mic ¹	•	•	•	•
Bobina pública ± mic ¹	•	•	•	•
Programas de transmissão				
RogerDirect™ + mic	•	•	•	•
Phonak PartnerMic™ + mic	•	•	•	•
Chamada telefônica + mic	•	•	•	•

	Premium L90	Advanced L70	Standard L50	Essential L30
Características				
SpeechSensor	•			
Realce de fala	•			
StereoZoom 2.0	•	•		
Cancelador dinâmico de ruído	•	•		
Sensor de movimento para a audição ²	•	•	•	
RogerDirect	•	•	•	•
EchoBlock	•			
Controle por toque ²				
- Siri/Assistente Google	•	•		
- Pausar/retomar a transmissão	•	•		
- Aceitar/encerrar chamadas telefônicas	•	•		
SoundRelax	•	•		
DuoPhone	•	•	•	
Real Ear Sound	•	•	•	
Configuração do Roger™ e direcionalidade	•	•	•	•
UltraZoom	•	•	•	•
Amplificador de faixa de frequência estendida ¹	•	•	•	•
WindBlock	•	•	•	•
Ajuste das preferências do usuário	•	•	•	•
Auto Aclimatização	•	•	•	•
Equilíbrio ambiental	•	•	•	•
SoundRecover2	•	•	•	•
WhistleBlock	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•
QuickSync	•	•	•	•
VAO	•	•	•	•
Canais de ajuste fino	20	20	16	12

Tecnologia SmartSpeech

Ajuste

	Sky L-PR Sky L-PR Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-PR Sky L-PR Trial L90/L70/L50/L30
Phonak Target	9.0 ou superior	9.0 ou superior
Noahlink Wireless/Noahlink Wireless 2	•	•
NOAHLink		•
HI-PRO, HI-PRO2		•

¹ Disponível somente para Phonak Sky L-UP

² Disponível somente para Phonak Sky L-PR

Vedação acústica

			Sky L-PR Sky L-PR Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-UP Sky L-UP Trial L90/L70/L50/L30
Saída de som	Gancho padrão	Com filtro (HE11 680), transparente e 6 cores pediátricas adicionais	•	•
		Sem filtro (HE 11), apenas na cor transparente		•
	Gancho inviolável (mini)	Com filtro (HE11 680), transparente e 6 cores pediátricas adicionais	•	•
		Sem filtro (HE 11), apenas na cor transparente		•
	Tubo fino 4.0	Disponível para os lados direito e esquerdo em cinco comprimentos diferentes (00, 0, 1, 2, 3)	•	
Peça para o Tubo fino	Oliva	Oliva mini	•	
		Oliva aberta Disponível em três tamanhos (S, M, L)	•	
		Oliva ventilada Disponível em três tamanhos (S, M, L)	•	
		Oliva Power Disponível em três tamanhos (S, M, L)	•	
	MicroMolde	Acrílico	•	
		Silicone	•	
Peça para o gancho	Molde		•	•

Cores de caixa e gancho

Caixa



H0
Bege



P1
Bege Praia



P3
Madeira de Sândalo



P4
Castanho



P5
Champagne



P6
Prata



P7
Grafite



P8
Preto Veludo



M6
Vermelho lava



M7
Oceano Azul



M8
Roxo Majestade



Q2
Verde Elétrico



Q3
Azul Caribe



T3
Rosa precioso

Gancho



R1
Verde



R2
Amarelo



R3
Rosa



R4
Laranja



Q6
Azul



Q7
Roxo



13
Transparente

Phonak Sky L Trial

Os aparelhos auditivos Phonak Sky L Trial podem ser rapidamente configurados no nível de desempenho desejado a fim de atender às suas recomendações. Isto permite que você proporcione ao seu usuário a solução auditiva ideal logo na primeira consulta ou ofereça uma substituição quando o aparelho auditivo do usuário estiver sendo consertado. Os dispositivos Sky L Trial também incluem um receptor Roger pré-instalado para uma fácil demonstração e teste de qualquer microfone Roger.

Opções de carregamento do Phonak Sky L-PR

Phonak Charger Combi BTE/Phonak Charger Combi BTE 2

O Sky L-PR tem todas as características do Lumity que você adora, bem como o benefício de ser recarregável. Os usuários podem desfrutar de um dia inteiro de audição, incluindo transmissão*.

* Duração esperada da bateria de 16 horas, incluindo 10 horas de transmissão Roger ou de áudio.



Versões do Phonak Sky L Bluetooth®

Chamadas diretas/transmissão de áudio Tecnologia Bluetooth 4.2 sem fio e a maioria dos telefones mais antigos com Bluetooth

Portfólio de comunicação sem fio

	Sky L-PR Sky L-PR Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-UP Sky L-UP Trial L90/L70/L50/L30
Acessórios sem fio		
TV Connector	•	•
Phonak PartnerMic	•	•
Phonak Remote Control	•	•
Roger		
Microfones Roger	•	•
Aplicativo		
Microfones Roger	•	•

Para obter mais informações, acesse www.phonak.com/sky-lumity

Para obter mais informações sobre os microfones Roger, acesse www.phonak.com/roger-for-education

Para obter mais informações sobre o myPhonak Junior, acesse www.phonak.com/myphonak-junior

life is on

Desde 1947, a Phonak se dedica a preservar a qualidade de vida abrindo novos mundos acústicos. Já naquela época, nos dias de nossa fundação, nossa empresa era impulsionada por uma convicção formativa: acreditamos que ouvir melhor significa viver melhor e, portanto, é essencial para viver a vida ao máximo. De fato, o sentido da audição está diretamente ligado ao bem-estar social, emocional, cognitivo e físico. Estamos dedicados, hoje e no futuro, a oferecer o mais amplo portfólio de soluções auditivas inovadoras. E, juntamente com nossos profissionais de saúde auditiva, continuamos focando no que mais importa: melhorar a compreensão de fala, mudar a vida das pessoas e ter um efeito positivo na sociedade como um todo.

www.phonak.com



027-0697-43|V1.00|2023-06|NLG © 2023 Sonova AG All rights reserved