

Phonak Slim™

Informações do produto

O Phonak Slim aumenta o portfólio RIC da linha Lumity com um modelo concebido para perdas auditivas leves a severas. O Phonak Slim é compatível com quatro receptores externos, incluindo o ActiveVent™ Receiver.

Com a inovadora tecnologia da plataforma Phonak Lumity, os aparelhos auditivos Phonak Slim são a solução para usuários que preferem aparelhos auditivos elegantes e únicos.



Descrição do produto



Slim L-R
L90/L70/L50*/L30*/Trial

Botão multifunção		•
Bobina de indução		
Bluetooth®		•
Revestimento hidrofóbico		•
Classificação IP		IP68 ¹
Tempos de carregamento ²	0% a 100%	3 h
	Ajuste de 30 min	15 min
Receptor S		
Nível máx. de saída (dB NPS)	Acoplador de 2 cc	111
Ganho máx. (dB)	Acoplador de 2 cc	47
Faixa de frequência (Hz)		<100 a >8000
Receptor M		
Nível máximo de saída (dB NPS)	Acoplador de 2 cc	114
Ganho máx. (dB)	Acoplador de 2 cc	51
Faixa de frequência (Hz)		<100 a >8000
Receptor MAV		
Nível máximo de saída (dB NPS)	Acoplador de 2 cc	119
Ganho máx. (dB)	Acoplador de 2 cc	50
Faixa de frequência (Hz)		<100 a >8000
Receptor P		
Nível máximo de saída (dB NPS)	Acoplador de 2 cc	122
Ganho máx. (dB)	Acoplador de 2 cc	59
Faixa de frequência (Hz)		<100 a 6300

*disponibilidade pode variar conforme o país

Cores da caixa



2A
Prata/Preto



3A
Grafite/Preto



4A
Cobre/Preto



6A
Sândalo/Preto

¹ IP68 indica que o aparelho auditivo é resistente à água e poeira. Resistiu a uma submersão contínua a 1 metro de água doce durante 60 minutos e a 8 horas de exposição à câmara de poeira, tal como definido na norma IEC60529.
² O tempo de carregamento real depende da duração restante da bateria, mas não deverá exceder 3 horas.

Níveis de desempenho

AutoSense OS™ 5.0	Premium	Advanced	Standard*	Essential*
Conforto no eco	•			
Fala no carro	•			
Fala no ruído forte	•			
Música	•	•		
Conforto no ruído	•	•	•	
Fala no ruído	•	•	•	•
Situações silenciosas	•	•	•	•
Mídia de Fala + Mic	•	•	•	•
Mídia de música + Mic	•	•	•	•
Programas adicionais				
Máx. de programas adicionais	4	4	4	4
Conforto no eco	•			
Fala no ruído forte	•	•		
Fala em 360°	•	•		
Fala no ruído	•	•	•	•
Situações silenciosas	•	•	•	•
Conforto no ruído	•	•	•	•
Música	•	•	•	•
Telefone acústico	•	•	•	•
Programa personalizado	•	•	•	•
Programas de transmissão				
RogerDirect + mic	•	•	•	•
PartnerMic + mic	•	•	•	•
Chamada telefônica + mic	•	•	•	•

Características	Premium	Advanced	Standard*	Essential*
SpeechSensor	•			
Realce de fala	•			
StereoZoom 2.0	•	•		
Cancelador dinâmico de ruído	•	•		
Sensor de movimento para a audição	•	•	•	
Receptor ActiveVent	•	•	•	•
RogerDirect™	•	•	•	•
Transmissão Roger e direcionalidade	•	•	•	•
EchoBlock	•			
Controle por toque				
- Siri/Assistente Google	•	•		
- Pausar/retomar a transmissão	•	•		
- Aceitar/encerrar chamadas telefônicas	•	•		
SoundRelax	•	•		
DuoPhone	•	•	•	
Real Ear Sound	•	•	•	
Funcionalidade de saúde	•	•	•	•
WindBlock	•	•	•	•
Ajuste das preferências do usuário	•	•	•	•
Tinnitus Balance	•	•	•	•
Auto Aclimatização	•	•	•	•
Balanceamento ambiental	•	•	•	•
SoundRecover2	•	•	•	•
WhistleBlock	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•
QuickSync	•	•	•	•
VAO	•	•	•	•
Canal de ajuste fino	20	20	16	12

Tecnologia SmartSpeech™

*disponibilidade pode variar conforme o país


Ajuste

	Slim L-R
Phonak Target	8.1 ou superior
Noahlink Wireless	•


Vedação acústica

Comprimento	Receptor S	Receptor M	Receptor MAV	Receptor P
Disponível em quatro comprimentos diferentes (0, 1, 2, 3), esquerdo e direito	•	•	•	•
Oliva				
Oliva mini	•	•		•
Oliva aberta Disponível em três tamanhos (P, M, G)	•	•		•
Oliva ventilada Disponível em três tamanhos (P, M, G)	•	•		•
Oliva Power Disponível em três tamanhos (P, M, G)	•	•		•
MicroMolde*				
Acrílico	•	•		•
Silicone	•	•		•
Titanium AV			•	
Universal AV Disponível em quatro formatos (A, B, C, D)			•	
Faixas de adaptação				


*Disponível com opção de maior comprimento no canal

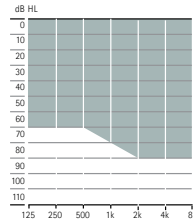


Perda auditiva leve a moderadamente severa.

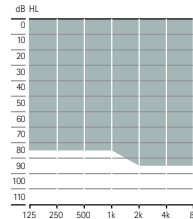

Perda auditiva leve a severa.

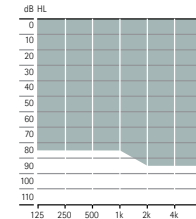

Perda auditiva leve a severa.

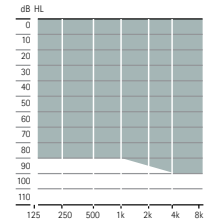

Perda auditiva leve a severa.

Único. Elegante. Conectado. Com o Phonak Slim.

O Phonak Slim foi projetado pensando no **estilo de vida** e no **conforto** de seus pacientes. Com a nossa tecnologia SmartSpeech™ de última geração, os usuários podem usufruir de uma **melhor compreensão de fala** em situações desafiadoras¹.

A conectividade universal das soluções Phonak podem ligar perfeitamente os usuários ao mundo ao redor.

O myPhonak app permite que os usuários tenham controle sobre a sua audição, monitorem os seus dados de saúde e se conectem remotamente com o profissional de saúde auditiva, colocando a clínica auditiva na palma da mão.

¹ Appleton, J. (2020). AutoSense OS 4.0 - significantly less listening effort and preferred for speech intelligibility. *Phonak Field Study News*, retirado de www.phonak.com/evidence.

Latzel, M. & Hobi, S. (2022). ActiveVent™ Receiver provides benefit of open and closed acoustics for better speech understanding in noise and naturalness of own voice perception. *Phonak Field Study News*, retirado de www.phonak.com/evidence.

Thibodeau, L. M. (2020). Benefits in Speech Recognition in Noise with Remote Wireless Microphones in Group Settings. *Journal of the American Academy of Audiology*, 31(6), 404-411.

Latzel, M., Lesimple, C., & Woodward, J. (2022). New implementation of directional beamforming configurations show improved speech understanding and reduced listening effort. *Phonak Field Study News*, retirado de www.phonak.com/evidence.

Latzel, M., Lesimple, C., & Woodward, J. (2023). Speech Enhancer significantly reduces listening effort and increases intelligibility for speech from a distance. *Phonak Field Study News*, retirado de www.phonak.com/evidence.

Opções de carregamento do Phonak Slim



Phonak Slim Charger

O Phonak Slim Charger é um carregador compacto com ímãs nos respectivos encaixes que facilitam a inserção e remoção do Phonak Slim. Equipado com uma porta de carregamento USB-C e com um design compacto, o Phonak Slim Charger oferece uma solução prática de carregamento e armazenamento.

Versões de Bluetooth® do Phonak Slim

Chamadas diretas/transmissão de áudio

Tecnologia Bluetooth® 4.2 sem fio e a maioria dos telefones mais antigos com Bluetooth

A marca e os logotipos Bluetooth® são marcas comerciais registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Sonova AG é feito sob licença.

Portfólio de comunicação sem fio

		Slim L-R L90/L70/L50*/L30*/Trial
Acessórios sem fio	TV Connector	•
	Phonak PartnerMic	•
	Phonak Remote Control	•
Roger	RogerDirect™	•
Aplicativo	myPhonak	•

*disponibilidade pode variar conforme o país

Para obter mais informações, visite o site www.phonakpro.com/slim

Para mais informações sobre os microfones Roger, visite o site www.phonakpro.com/roger

Para obter mais informações sobre eSolutions, visite o site www.phonakpro.com/smartapps

life is on

Desde 1947, a Phonak se dedica a preservar a qualidade de vida abrindo novos mundos acústicos. Já naquela época, nos dias de nossa fundação, nossa empresa era impulsionada por uma convicção formativa: acreditamos que ouvir melhor significa viver melhor e, portanto, é essencial para viver a vida ao máximo. De fato, o sentido da audição está diretamente ligado ao bem-estar social, emocional, cognitivo e físico. Hoje, como no futuro, nos esforçamos para oferecer o mais amplo portfólio de soluções auditivas inovadoras. E, juntamente com nossos profissionais de saúde auditiva, continuamos focando no que mais importa: melhorar a compreensão de fala, mudar a vida das pessoas e ter um efeito positivo na sociedade como um todo.

www.phonak.com



027-0633-43/V4.00/2023-02/nd © 2023 Sonova AG All rights reserved