

Kezdetét veszi a Paradise új fejezete



Phonak ActiveVent™ hangszóró
Semmi nem fogható a Paradicsomi
hangzáshoz

Üdvözöljük
a Paradise új
fejezetében



A Phonak Audéo™ Paradise bevezetésével olyan hallókészülékeket fejlesztettünk ki, amelyek páratlan hallásélményt nyújtanak ügyfeleinknek¹. Az első fejezet tizenkét hónappal ezelőtt kezdődött, és azóta rengeteg változás következett be a mindennapi életünkben. Manapság maszkot viselni mindennapos dolog. Egyes hallókészülék-viselők számára ez újabb nehézséget jelent, mivel nem tudnak szájról olvasni.

A Phonak Paradise hallókészülék és az AutoSense OS™ 4.0 könnyen alkalmazkodik a különböző hangkörnyezetekhez, biztosítva az ügyfelek részére, hogy számos élethelyzetben eligazodjanak. Az ügyfeleinek nem kell beállítaniuk a hallókészüléküket, és ezzel egy potenciális bonyolultsági szintet küszöbölünk ki.

Ez közvetlen hatással lehet a hallókészülék-viselők jóllétére. A hallásveszteséggel élő ügyfelek kommunikációjának megkönnyítésével ezek az ügyfelek is megőrizhetik társas kapcsolataikat, és mind mentálisan, mind érzelmileg teljes életet élhetnek.

A Phonak büszkén mutatja be a Paradise új fejezetét. Ikonikus, friss és természetes hangzásával a Paradise még több helyzetben nyújt páratlan hallásélményt.¹



Bemutatkozik az ActiveVent™ hangszóró

A világ első hallókészüléke intelligens hangszóróval

A Paradise páratlan¹ hangminőségéről⁴, a briliáns beszédértésről^{3,4,5} és a személyre szabott zajcsökkentésről ismert. Most pedig egy új fejezet nyílik az ActiveVent hangszóróval.


A vadonatúj ActiveVent™ hangszóró a világ első hallókészüléke intelligens hangszóróval, amely képes a beszéd érthetőségének intelligens kiegyensúlyozására zajos környezetben, és a hallási kényelem biztosítására², amely tovább erősíti a Phonak Paradise páratlan¹ hangminőségét⁴ a kis- és közepes mértékű hallásvesztéssel élő ügyfelek számára.

Az innovatív hangszórótechnológia egy mechanikusan kapcsolt furatot foglal magában, amelyet az AutoSense OS 4.0 észrevétlenül vezérel. Intelligensen kombinálja a zárt illesztés hallásteljesítményét a nyitott illesztés kényelmével². Ezzel ügyfelei nem kényszerülnek kompromisszumos hallási megoldásokra, hanem élvezhetik, hogy tudatában vannak környezetüknek, természetesnek hallják saját hangjukat és zajos helyeken is jobban megértik a beszédet⁶.




Hogyan működik az ActiveVent hangszóró?

Az ActiveVent hangszóró egy beépített furatot és egy kis méretű lemezt tartalmaz, amely két pozíció között mozog: nyitott és zárt. Mindez az AutoSense OS 4.0 intelligens vezérlése alatt áll. Egy megerősítő kattánás jelzi az ügyfélnek, hogy a lemez pozíciót váltott.

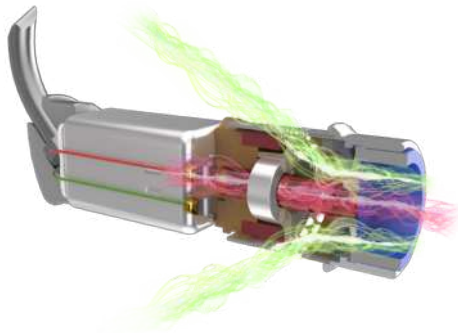

Amikor a lemez nyitott pozícióban van, a hang képes közvetlenül bejutni a hangszóró beépített furatán, így biztosítja a nyitott illesztés kényelmét, a saját hang természetességét és a környezeti hangok érzékelését.

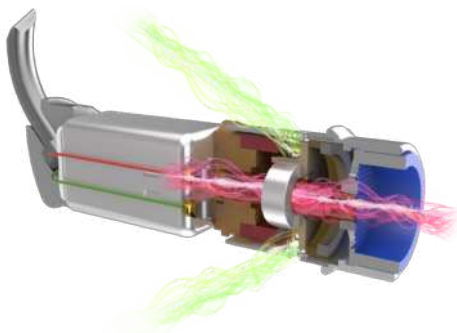

A kihívást jelentő hangkörnyezetekben, amikor beszéd-től hangos a környezet, vagy média streamelésekor a lemez zárt állásba kapcsol, kizárva ezzel a közvetlenül a fülbe jutó környezeti hangokat, és növelve a közeli beszédre vagy streamelt tartalomra való összpontosítást.

ActiveVent akusztikus csatolók

1. Universal SlimTip AV

Az új Universal SlimTip AV segítségével könnyen bemutathatja az ActiveVent hangszórót ügyfeleinek. Az Univerzális SlimTip több ezer fül szkennelt képének összegyűjtött adatai alapján készült, a fejlesztők számára lehetővé téve négy olyan modell kialakítását, amelyek magas illeszkedési arányt biztosítanak. Az univerzális SlimTip illesztékek ideális átmeneti vagy bemutató megoldások, amíg az ügyfele a személyre szabott SlimTip Titanium AV illesztékére vár.

2. Személyre szabott SlimTip Titanium AV

Az optimális akusztikai teljesítmény elérése érdekében az ActiveVent hangszórót a Titanium SlimTip illesztéssel való tartós használatra terveztük. A hangszóróhéj teljesen személyre szabható, és strapabíró, kényelmes anyagból készül.

Legfontosabb jellemzők

- A zaj melletti beszédérthetőség és a hallási kényelem intelligens kiegyensúlyozása²
- Kiváló streamelt hangminőség^{6,7}
- Az AutoSense OS 4.0 intelligens vezérléssel
- Kompatibilis minden újratölthető Audéo Paradise hallókészülékkel⁸

ActiveVent illesztési szempontok

- Az optimális teljesítmény érdekében a hangszórókat félévente cserélni kell. Ez könnyedén megtehető az üzletben
- Minimális fülzsír és jó kézügyesség esetén ajánlott
- Rendszeres tisztítás és fülzsírszűrőcsere szükséges
- Súlyos fülzúgás és hyperacusis esetén nem ajánlott



Az ActiveVent Performance + előnyei az ügyfelek számára

Az ActiveVent hangszóró minden Audéo Paradise újratölthető hallókészülékkel kompatibilis, és a hallókészülék teljesítményszintjétől függően különböző előnyöket kínál. Az ActiveVent Performance + azokat az előnyöket jelenti, amelyekre az ügyfelek az ActiveVent hangszóró használatakor számíthatnak.


A zaj melletti beszédérthetőség és a hallási kényelem intelligens kiegyensúlyozása²

Az ActiveVent hangszórók ideálisak olyan ügyfelek számára, akik aktív életmódot folytatnak és jelentős időt töltenek zajban, például étteremben, társas összejöveteleken vagy sok kinti zajjal járó nyilvános helyen. Ezen a helyeken a hallás még nagyobb kihívást jelenthet. Az ActiveVent hangszórók használata közben a zajszint növekedésekor az AutoSense OS 4.0 automatikusan bezárja a furatot, így a hallókészülék viselője a zárt illesztésekre jellemző nagyobb teljesítményt élvezheti (Premium teljesítményszinten áll rendelkezésre). A zajszint csökkenésekor a furat kinyílik, így az ügyfelek a nyitott illesztésekre jellemző kényelmet élvezhetik. Az ActiveVent hangszórók használatával az ügyfelek zárt furatpozíciós manuális programokhoz is hozzáférhetnek. (Premium, Advanced és Standard teljesítményszinteken áll rendelkezésre).

Kiváló streamelt hangminőség^{6,7}

Az ügyfelek mostantól kiváló streamelt hangminőséget élvezhetnek a zárt furatnak köszönhetően. Ezen hangszórók igazán különleges jellemzője az, hogy ha az ügyfél streamingről beszélgetésre kíván váltani, mindössze egy dupla érintéssel leállíthatja a streamelt tartalmat, és az ActiveVent hangszóró kinyílik, lehetővé téve a könnyed átmenetet (minden teljesítményszinten rendelkezésre áll).

Előnyök

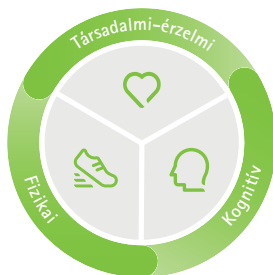

- Az ActiveVent hangszóró átlagosan 10%-kal jobb beszédértést biztosít zajos környezetben, és természetes hangminőséget biztosít számos különböző hangkörnyezetben⁶
- Az univerzális SlimTip illesztéssel az ActiveVent hangszóró könnyedén kipróbálható és bemutatható
- Az ActiveVent hangszóró segítségével az ügyfelek zajban és csöndben is képesek lépést tartani a kommunikációval, így zavartalanul élvezhetik családjuk és barátaik társaságát, és kitűnő kapcsolatokat ápolhatnak



Semmi nem fogható a Paradicsomi hangzáshoz


A Paradise bevezetésével a Phonak megszilárdította pozícióját az audiológiai iparág élvonalában. Az iparágvezető hardveren alapuló Paradise most még több olyan funkciót tartalmaz, amelyek segítik ügyfeleit abban, hogy még több élethelyzetben fedezhessék fel újra a hangok csodáját, javítva ezzel általános jóllétüket. A PRISM™ chip bizonyított teljesítményének köszönhetően ezek a funkciók gördülékenyen működnek együtt, páratlan hallásélményt biztosítva¹.

Páratlan hangminőség

- Új ActiveVent hangszóró
 - Új ActiveVent Performance +
- Mozgásérzékelő
- APD 2.0
- AutoSense OS™ 4.0
 - Beszédkiemelő
 - Dinamikus zajcsökkentés
 - Beszédirány érzékelő szenzor



▶ Megbízható újratölthető lítium-i



Személyre szabott digitális megoldások

- Frissített myPhonak alkalmazás
 - Személyre szabott Érintésvezérlés-érzékenység
 - AudiogramDirect (Távkonzultáció keretén belül)
 - Távvezérlés
- Új Target 7.1.9

Univerzális kapcsolódás

- Okostelefonokhoz, TV-hez és sok minden máshoz kapcsolódik
- RogerDirect™
- Mindennel kompatibilis!
- Több Bluetooth®-kapcsolat
- Érintésvezérlés a Bluetooth funkciók egyszerű eléréséhez



life is on

Mi a Phonaknál úgy véljük, hogy a jó hallás egyenértékű a jobb étellel és elengedhetetlen a teljes élethez. Több mint 70 éve elkötelezetten és szenvedéllyel dolgozunk egy olyan világ megteremtésén, ahol mindenki számára felhangzik az élet – „life is on”. Olyan innovatív hallási megoldásokat fejlesztünk, amelyek életkortól és a hallásvesztés mértékétől függetlenül támogatnak mindenkit szociális kapcsolataik kialakításában, valamint mentális és érzelmi fejlődésükben.

www.phonakpro.com



028-2308-13/M4.00/2021-07/MLG © 2021 Sonova AG All rights reserved



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Svájc



Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Str. 20
70736 Fellbach-Oeffingen · Németország



0459