

# フォナック スカイ™ L.

## 製品情報

フォナック スカイルミティは、軽度から重度難聴を対象として幅広くご利用になれる小児用 BTE タイプの補聴器です。

フォナック スマートスピーチ™ テクノロジーが搭載されたスカイルミティ補聴器は、最新プラットフォームのフォナック ルミティがもたらす「ことばの理解」を望むお子さまに最適なソリューションです。



# 製品概要



スカイ L-M  
スカイ L-M トライアル  
L90/L70/L50/L30



スカイ L-PR  
スカイ L-PR トライアル  
L90/L70/L50/L30



スカイ L-SP  
スカイ L-SP トライアル  
L90/L70/L50/L30




スカイ L-UP  
スカイ L-UP トライアル  
L90/L70/L50/L30

電池の種類	312	内蔵充電式	13	675	
お知らせ LED ランプ	●	●	●	●	
T コイル	●		●	●	
クロス L との互換性		●			
Bluetooth®	●	●	●	●	
疎水性コーティング	●	●	●	●	
国際保護等級 IP	IP68 <sup>1</sup>	IP68 <sup>1</sup>	IP68 <sup>1</sup>	IP68 <sup>1</sup>	
サイズ	高さ x 幅 x 奥行き	31.3 x 14.1 x 7.3 mm (1.23 x 0.56 x 0.29")	36.7 x 16.4 x 8.5 mm (1.44 x 0.64 x 0.33")	40.0 x 16.9 x 8.5 mm (1.57 x 0.67 x 0.33")	42.6 x 18.8 x 8.6 mm (1.68 x 0.74 x 0.34")
	重さ	2.18 g	3.68 g	4.4 g	4.6 g
充電時間 <sup>2</sup>	0%~100%		3時間		
	0%~80%		1.5時間		
	30分フィッティング		10分		

	HE11 680 スリム チューブ 4.0		HE11 680 スリム チューブ 4.0		HE11	HE11 680	HE11	HE11 680	
最大出力音圧(dB SPL)	2cc カプラデータ	128	122	130	129	139	133	141	134
最大利得(dB)	2cc カプラデータ	63	58	68	69	81	75	84	78
周波数帯域(Hz)		<100 - >7800	<100 - >8000	<100 - >5700	<100 - >7100	<100 - >4900	<100 - >5700	<100 - >4700	<100 - >4700
使用電流(mA)		1.6	1.6			2.1	2.2	3.3	2.8

## フィッティングレンジ

■ DSL 小児用フィッティングレンジ  
■ APD/NAL フィッティングレンジ

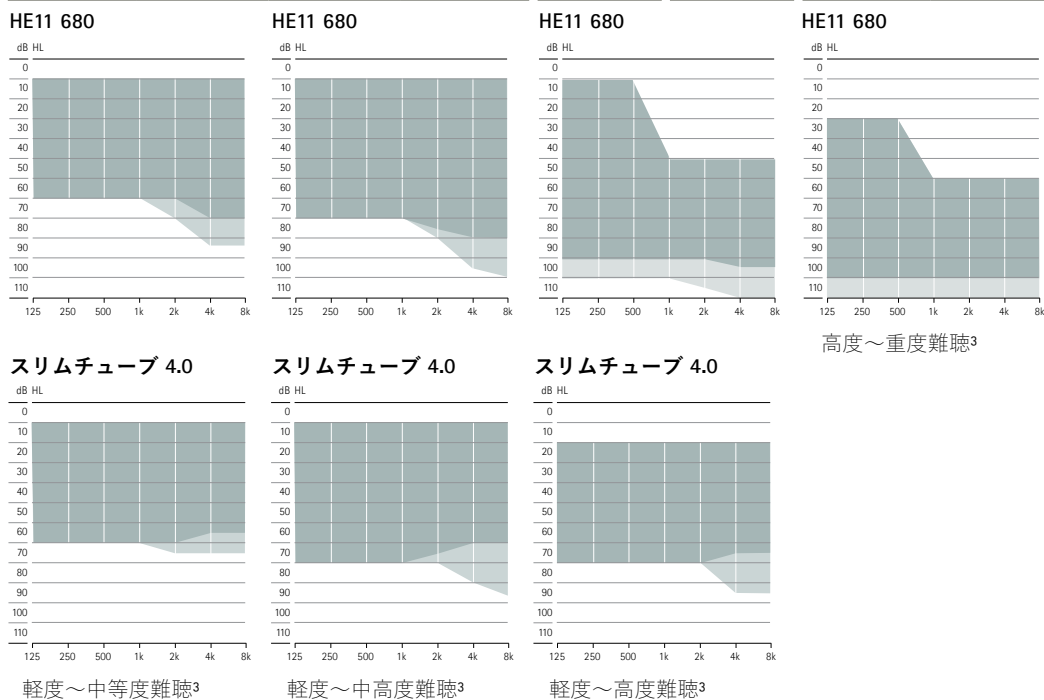

<sup>1</sup> IP68は、補聴器が防水および防塵であることを示します。水深1mの淡水に長時間(60分)入れた後や、粉塵試験装置に8時間入れた後でも、修理が必要なダメージが発生しなかったことを示しています(IEC60529規格による)。

<sup>2</sup> 実際の充電時間は、電池残量によって異なり、温度条件の影響を受ける場合があります。

<sup>3</sup> DSL フィッティング処方方式を使用する場合。

Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。Sonova AG は、使用許可を得てこれらのマークを使用しています。

# パフォーマンスレベル

オートセンス スカイ OS 5.0	プレミアムクラス	アドバンスクラス	スタンダードクラス	エッセンスクラス
	L90	L70	L50	L30
非常に騒がしい中でのことば	●			
車の中でのことば	●			
反響する環境での快適性	●			
音楽	●	●		
雑音下での快適性	●	●	●	
騒がしい中でのことば	●	●	●	●
静かな環境	●	●	●	●
メディアことば+マイク	●	●	●	●
メディア音楽+マイク	●	●	●	●
<b>追加プログラム</b>				
最大追加プログラム数	4	4	4	4
反響する環境での快適性	●			
非常に騒がしい中でのことば	●	●		
全方向(360°)からのことば	●	●		
騒がしい中でのことば	●	●	●	●
静かな環境	●	●	●	●
雑音下での快適性	●	●	●	●
音楽	●	●	●	●
通常の電話	●	●	●	●
カスタムプログラム	●	●	●	●
電話用Tコイル±マイク <sup>1</sup>	●	●	●	●
公共用Tコイル±マイク <sup>1</sup>	●	●	●	●
<b>ストリーミングプログラム</b>				
ロジャーダイレクト+マイク	●	●	●	●
フォナック パートナーマイク+マイク	●	●	●	●
通話+マイク	●	●	●	●

## スマートスピーカーテクノロジー

機能	プレミアムクラス	アドバンスクラス	スタンダードクラス	エッセンスクラス
	L90	L70	L50	L30
スピーチセンサー	●			
スピーチ エンハンサー	●			
ステレオズーム 2.0	●	●		
ダイナミック ノイズ キャンセル	●	●		
モーション センサー	●	●	●	
ヒアリング <sup>2</sup>				
ロジャーダイレクト	●	●	●	●
エコブロック	●			
タップコントロール <sup>2</sup>				
- Siri/Google アシスタント	●	●		
- ストリーミングの一時停止/再開	●	●		
- 通話の応答/終了	●	●		
サウンドリラックス	●	●		
デュオフォン	●	●	●	
リアルイヤーサウンド	●	●	●	
ロジャー™と指向性設定	●	●	●	●
ウルトラズーム	●	●	●	●
広帯域ブースター <sup>3</sup>	●	●	●	●
ウインドブロック	●	●	●	●
ユーザー志向のチューニング	●	●	●	●
自動順応マネージャ	●	●	●	●
環境バランス	●	●	●	●
サウンドリカバー <sup>2</sup>	●	●	●	●
ホイッスルブロック	●	●	●	●
ノイズブロック	●	●	●	●
クイックシンク	●	●	●	●
AOV	●	●	●	●
微調整チャンネル数	20	20	16	12

1 フォナック スカイ L-PR は非対応  
2 フォナック スカイ L-PR のみ対応  
3 フォナック スカイ L-UP のみ対応

# フィッティング

	スカイ L-M スカイ L-M トライアル L90/L70/L50/L30	スカイ L-PR スカイ L-PR トライアル L90/L70/L50/L30	スカイ L-SP スカイ L-SP トライアル L90/L70/L50/L30	スカイ L-UP スカイ L-UP トライアル L90/L70/L50/L30
Phonak Target	9.1以上	9.0以上	9.1以上	9.0以上
Noahlink Wireless、Noahlink Wireless 2	●	●	●	●
NOAHLink			●	●
HI-PRO、HI-PRO2			●	●

# 音響カプリング

		スカイ L-M スカイ L-M ト ライアル L90/L70/L50/L30	スカイ L-PR スカイ L-PR トライアル L90/L70/L50/L30	スカイ L-SP スカイ L-SP トライアル L90/L70/L50/L30	スカイ L-UP スカイ L-UP トライアル L90/L70/L50/L30
<b>音口</b>					
スタンダード イヤフック	ダンパー付き(HE11 680)、クリア色と他6色	●	●	●	●
	ダンパー無し(HE 11)、クリア色のみ			●	●
チャイルドロック付き イヤフック(ミニ)	ダンパー付き(HE11 680)、クリア色と他6色	●	●	●	●
	ダンパー無し(HE 11)、クリア色のみ			●	●
スリムチューブ 4.0	左右共通、5種類の長さ(00、0、1、2、3)を用意	●	●	●	
<b>スリムチューブ用耳せん(イヤチップ)</b>					
ドーム型耳せん	キャップドーム耳せん	●	●	●	
	オープン型耳せん 3種類のサイズ(S、M、L)を用意	●	●	●	
	ペント付きドーム耳せん 3種類のサイズ(S、M、L)を用意	●	●	●	
	パワー型耳せん 3種類のサイズ(S、M、L)を用意	●	●	●	
スリムチップ	アクリル製	●	●	●	
	シリコン製	●	●	●	
<b>イヤフック用耳せん(イヤチップ)</b>					
イヤモールド		●	●	●	●

## ハウジングとイヤフックの色

### ハウジング



H0  
ベージュ



P1  
サンド  
ベージュ



P3  
サンダル  
ウッド



P4  
チェスト  
ナット



P5  
シャンパン



P6  
シルバー  
グレー



P7  
グラファイト  
グレー



P8  
ベルベット  
ブラック



M6  
ラバレッド



M7  
ブルーオー  
シャン



M8  
マジェスティ  
パープル



Q2  
エレクトリック  
グリーン



Q3  
カリビアンパイ  
レーツ



T3  
プレシャス  
ピンク

### イヤフック



R1  
グリーン



R2  
イエロー



R3  
ピンク



R4  
オレンジ



Q6  
ブルー



Q7  
パープル



13  
クリア

# フォナック スカイ L-PR 充電オプション

## フォナック チャージャー Combi BTE / フォナック チャージャー Combi BTE 2

スカイ L-PR にはルミティの魅力的な機能がすべて備わっており、充電式電池を搭載していることから得られるメリットもあります。顧客は、ストリーミング実行時でも一日中、聞こえを楽しむことができます\*。

\*10時間のロジャー ストリーミングや音声ストリーミングを含む、予想電池寿命は16時間です。



## フォナック スカイ L トライアル

フォナック スカイ L トライアル補聴器は、聴覚専門家の推奨に合わせて、目的のパフォーマンスレベル(クラス)に速やかに設定できます。そのため、初回のカウンセリング時から最適な聞こえのソリューションで着用者をフィッティングしたり、補聴器修理中の代替品として提供したりすることが可能になります。また、ロジャー受信機が事前にインストールされているので、ロジャー マイクロホンを使って簡単にデモを行うこともできます。

## フォナック スカイ L Bluetooth® バージョン

ダイレクト コール/音声ストリーミング

Bluetooth 4.2のワイヤレステクノロジーと、ほとんどの旧式 Bluetooth 電話に対応

## ワイヤレスコミュニケーションポートフォリオ

	スカイ L-M スカイ L-M トライアル L90/L70/L50/L30	スカイ L-PR スカイ L-PR トライアル L90/L70/L50/L30	スカイ L-SP スカイ L-SP トライアル L90/L70/L50/L30	スカイ L-UP スカイ L-UP トライアル L90/L70/L50/L30
<b>ワイヤレスアクセサリ</b>				
テレビコネクターD	•	•	•	•
フォナック パートナーマイク	•	•	•	•
フォナック リモートコントロール	•	•	•	•
<b>ロジャー</b>				
ロジャー マイクロホン	•	•	•	•
<b>アプリ</b>				
マイフォナック ジュニア	•	•	•	•

詳細については、[www.phonak.com/sky-lumity](http://www.phonak.com/sky-lumity)をご覧ください

ロジャー マイクロホンについて詳しくは、[www.phonak.com/roger-for-education](http://www.phonak.com/roger-for-education)をご覧ください

マイフォナック ジュニアについて詳しくは、[www.phonak.com/myphonak-junior](http://www.phonak.com/myphonak-junior)をご覧ください

# life is on

フォナックは1947年以来、新しい音響の世界を切り開くことによって、人々の人生を豊かにする取り組みに情熱を傾けてきました。私たちは創業当初から「良い聞こえは健康で充実したしあわせな毎日に欠かせないものである」という信念に基づき活動してきました。聞こえは、社会・感情的、認知的、身体的なウェルビーイングに深くつながっています。私たちは、現在もそしてこれからも聴覚専門家とともに、「ことばの理解を高めること」、「人々の暮らしを豊かにすること」、そして「社会全体により良い効果をもたらすこと」を大切にし、そして、聴覚専門家とともに、私たちは最も重要なこと、すなわち、ことばの理解の向上、人々の暮らしの向上、社会全体への積極的な影響に注力し続けています。

[www.phonak.com](http://www.phonak.com)



027-0705-17/V1.00/2024-02/NLG © 2024 Sonova AG All rights reserved

