

Phonak Virto™ (フォナック バート)

パラダイス



フォナック バート P は、軽度から重度の難聴に対応した包括的な ITE ポートフォリオです。バート P には、4種のモデル、4つの電源レベル、4つのパフォーマンスレベルがあり、耳鳴り管理のノイズジェネレーターが備わっています。フォナック パラダイス プラットフォームの革新的なテクノロジーを搭載したバート P 補聴器は、オーダーメイドで自分に最適な聴覚パフォーマンスを望むお客様にぴったりのソリューションです。

詳細については、www.phonakpro.com を参照してください

A Sonova brand

PHONAK
life is on

製品概要

	 パート P-チタン P90/P70	 パート P-10 NW O P90/P70/P50/P30	 パート P-312 NW O P90/P70/P50/P30	 パート P-312 P90/P70/P50/P30
出力レベル				
M	●	●	●	●
P	●	●	●	●
SP	●	●	●	●
UP**				●
ハードウェア構成/オプション/テクノロジー				
電池サイズ	10	10	312	312
プログラムスイッチ(プログラム/ボリューム)	オプション	オプション	オプション	●
イージーフォン(電話用)	オプション	●	●	
ミニコントロール(プログラムまたはボリューム変更)	●	●		
ボリュームコントロール(ホイール)		オプション	オプション	オプション
Tコイル	オプション	オプション	オプション	
マイクロホン	無指向性	無指向性	無指向性	指向性
国際保護等級 IP(VC なし)	IP68 ¹	IP68 ¹		
Bluetooth®				●
両耳間音声通信技術				●

カラー

フェースプレート カラー

チタンのみ:
シェル カラー: チタニウムグレー、
フェースプレート カラー:



アクリル製シェルのカラー



シェル スタイル

	 パート P-チタン	 パート P-10 NW O	 パート P-312 NW O	 パート P-312
IIC	●	●		
CIC	●	●		
MC		●	●	
ITC		●	●	
HS		●	●	●
FS		●	●	●

パフォーマンスレベル

	プレミアム ムクラス P90	アドバン スクラス P70	スタンダー ドクラス P50	エッセンシヤ ルクラス P30	機能	プレミアム ムクラス P90	アドバン スクラス P70	スタンダー ドクラス P50	エッセンシヤ ルクラス P30
AutoSense OS⁵ (オートセンス OS) 4.0					ウルトラズーム	プレミアム ムクラス	アドバン スクラス	スタンダー ドクラス	エッセンシヤ ルクラス
非常に騒がしい中でのことば*	●								
車の中でのことば	●				ダイナミック ノイズキャンセル	●			
反響する環境での快適性	●				スピーチ エンハンサー	●			
音楽	●	●			エコーブロック	●			
騒音下での快適性	●	●	●		ウインドブロック	●	●		
騒音下でのことば	●	●	●	●	サウンドリラックス	●	●		
静かな環境	●	●	●	●	デュオフォン	●	●	●	
メディアことば + マイク*	●	●	●	●	ロジャーと指向性の設定*	●	●	●	
メディア音楽 + マイク*	●	●	●	●	サウンドリカバー2	●	●	●	●
追加プログラム					ユーザー志向のチューニング	●	●	●	●
最大追加プログラム数	4	4	4	4	ホイッスルブロック	●	●	●	●
反響する環境での快適性	●				ノイズブロック	●	●	●	●
非常に騒がしい中でのことば*	●	●			クイックシンク*	●	●	●	●
全方向(360°)からのことば*	●	●			AOV	●	●	●	●
騒音下でのことば	●	●	●	●	耳鳴りバランス	●	●	●	●
静かな環境	●	●	●	●	自動順応マネージャ	●	●	●	●
騒音下での快適性	●	●	●	●	環境バランス	●	●	●	●
音楽	●	●	●	●	ロジャー ダイレクト*	●	●	●	●
電話	●	●	●	●	微調整チャンネル	20	20	16	12
カスタム プログラム	●	●	●	●					
ストリーミング プログラム									
ロジャー ダイレクト + マイク*	●	●	●	●					
パートナーマイク + マイク*	●	●	●	●					
通話 + マイク*	●	●	●	●					

フィッティング

ソフトウェア	フォナック ターゲット7.3以降
インターフェース	Noahlink Wireless、プログラミング ケーブル、HI-PRO、HI-PRO2

* パート P-312専用

** 特定の国でのみ

1. IP68は、補聴器が防水・防塵であることを示します。IEC60529規格に基づき、補聴器を水深1mに60分間連続で浸漬し、粉塵試験装置に8時間入れた後も機能が損なわれませんでした。

Bluetooth® のワード マークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。

iOS は Cisco, Inc. の商標です。


Android は Google, Inc. の商標です。

音響カプリング


出力レベル

		M	P	SP	UP**
最大出力音圧(dB SPL)	2cc カプラデータ	109	115	119	127
最大利得(dB)	2cc カプラデータ	40	50	60	70
周波数帯(Hz)	2cc カプラデータ	<100 - 7000	<100 - 6700	<100 - 7000	<100 - 5200
使用電流(mA)	非ワイヤレス	1.1	1.2	1.1	
	ワイヤレス	1.7	1.8	1.7	1.7


フィッティングレンジ

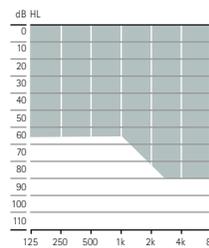


軽度～中等度難聴

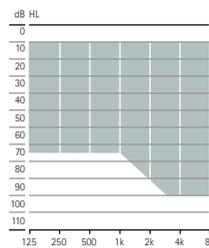

軽度～高度難聴

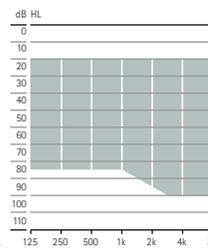

中等度～高度難聴

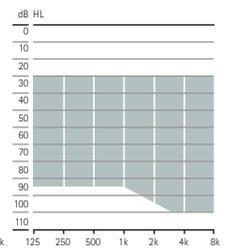

中等度～重度難聴

ワイヤレスコミュニケーションポートフォリオ

	パート P-チタン P90/P70	パート P-10 NW O P90/P70/P50/P30	パート P-312 NW O P90/P70/P50/P30	パート P-312 P90/P70/P50/P30
ワイヤレスアクセサリ				
テレビコネクタ-D				•
フォナック パートナーマイク				•
フォナック リモートコントロール				•
ロジャー				
RogerDirect™ (ロジャー ダイレクト)				•
アプリ				
マイフォナック				•

パート パラダイスの詳細については、www.phonakpro.com/virtoparadise をご覧ください。
ロジャー マイクロホンの詳細については、www.phonakpro.com/roger をご覧ください。
フォナック アプリの詳細については、www.phonakpro.com/smartapps をご覧ください。

life is on

フォナックは、より良い聞こえが人々の健康に深くつながり、人生を豊かにするために欠かせないものと考えています。そのため、私たちは70年以上にわたり、すべての人々の「人生が輝く」世界を作り出すために情熱を傾けてきました。これからも、難聴に悩むすべての人々のアクティブで健康的な毎日を支え、前向きな心と豊かな感性を育むために、革新的な聞こえのソリューションをお届けします。

www.phonakpro.com

027-0648-17/V2.00/2022-01/ NLS © 2022 Sonova AG All rights reserved

sonova
HEAR THE WORLD

 Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Switzerland

 **CE**
0459