

Phonak Sky™ L.

Productinformatie

Phonak Sky Lumity is het uitgebreide AHO-pediatrieportfolio voor mild tot zeer ernstig gehoorverlies.

Sky L-hoortoestellen worden aangedreven door Phonak Smartspeech™ Technology en zijn de beste keuze voor pediatrische cliënten die spraakverstaan willen ervaren met ons meest geavanceerde platform Phonak Lumity.



Productbeschrijving



Sky L-M
Sky L-M Trial
L90/L70/L50/L30



Sky L-PR
Sky L-PR Trial
L90/L70/L50/L30



Sky L-SP
Sky L-SP Trial
L90/L70/L50/L30




Sky L-UP
Sky L-UP Trial
L90/L70/L50/L30

Batterijtype		312	geïntegreerd en oplaadbaar		13	675			
Pediatische led-patronen		•	•		•	•			
Luisterspoel		•			•	•			
Compatibiliteit met CROS L			•						
Bluetooth®		•	•		•	•			
Hydrofobe coating		•	•		•	•			
IP-certificering		IP68 ¹	IP68 ¹		IP68 ¹	IP68 ¹			
Afmetingen	L x B x D	31,3 x 14,1 x 7,3 mm (1,23 x 0,56 x 0,29 inch)	36,7 x 16,4 x 8,5 mm (1,44 x 0,64 x 0,33 inch)		40,0 x 16,9 x 8,5 mm (1,57 x 0,67 x 0,33 inch)	42,6 x 18,8 x 8,6 mm (1,68 x 0,74 x 0,34 inch)			
	Gewicht	2,18 g	3,68 g		4,40 g	4,60 g			
Oplaadtijden ²	0% tot 100%		3 uur						
	0% tot 80%		1,5 uur						
	30 min. aanpassing		10 min.						
		HE11 680	SlimTube 4.0	HE11 680	SlimTube 4.0	HE11	HE11 680	HE11	HE11 680
Max. outputvermogen (dB SPL)	2 cc coupler	128	122	130	129	139	133	141	134
Max. gain (dB)	2 cc coupler	63	58	68	69	81	75	84	78
Frequentiebereik (Hz)		< 100 - > 7800	< 100 - > 8000	< 100 - > 5700	< 100 - > 7100	< 100 - > 4900	< 100 - > 5700	< 100 - > 4700	< 100 - > 4700
Stroomverbruik (mA)		1,6	1,6			2,1	2,2	3,3	2,8


Aanpasbereik

■ DSL pediatisch aanpasbereik
■ APD/NAL aanpasbereik


HE11 680

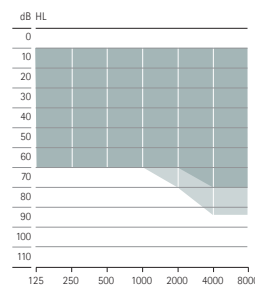


HE11 680

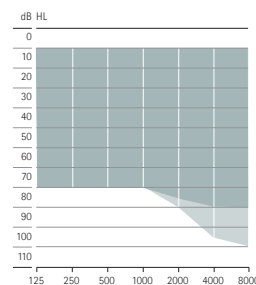

HE11 680

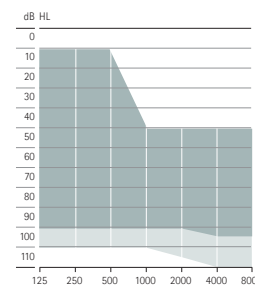


HE11 680

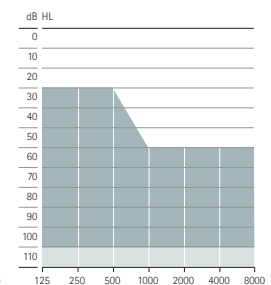


Ernstig tot zeer ernstig
gehoorverlies³


SlimTube 4.0

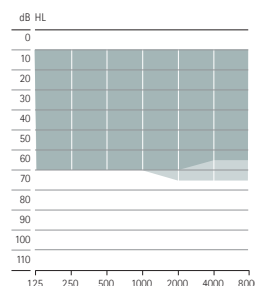

SlimTube 4.0

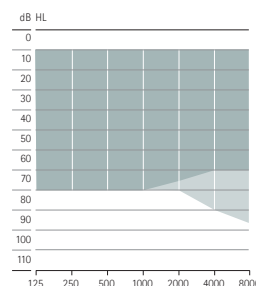

SlimTube 4.0

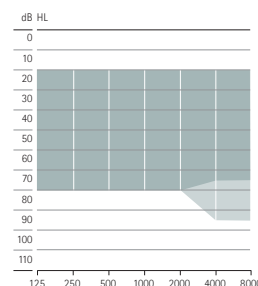

Mild tot matig gehoorverlies³

Mild tot matig-ernstig
gehoorverlies³

Mild tot ernstig gehoorverlies³

¹ IP68 betekent dat het hoortoestel spatwater- en stofbestendig is. Het hoortoestel heeft de testen van onophoudelijke onderdompeling in 1 meter zoetwater gedurende 60 minuten en 8 uur in een stofkamer goed doorstaan volgens de standaard IEC60529.

² De werkelijke oplaadtijd is afhankelijk van de resterende levensduur van de batterij en kan worden beïnvloed door de temperatuur.

³ Bij het gebruik van de DSL-receptformule.

Het woordmerk en het logo Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.; deze merken worden door Sonova AG onder licentie gebruikt.

Prestatieniveaus

AutoSense Sky OS 5.0	Premium L90	Advanced L70	Standard L50	Essential L30
Spraak in veel lawaai	•			
Spraak in de auto	•			
Comfort in echo	•			
Muziek	•	•		
Comfort in lawaai	•	•	•	
Spraak in lawaai	•	•	•	•
Rustige situatie	•	•	•	•
Media spraak + mic	•	•	•	•
Media muziek + mic	•	•	•	•
Bijkomende programma's				
Max. aantal bijkomende programma's	4	4	4	4
Comfort in echo	•			
Spraak in veel lawaai	•	•		
Spraak in 360°	•	•		
Spraak in lawaai	•	•	•	•
Rustige situatie	•	•	•	•
Comfort in lawaai	•	•	•	•
Muziek	•	•	•	•
Akoestische telefoon	•	•	•	•
Op maat gemaakt programma	•	•	•	•
Telefoon via luisterspoel ± mic ¹	•	•	•	•
Openbare luisterspoel ± mic ¹	•	•	•	•
Streamingprogramma's				
RogerDirect™ + mic	•	•	•	•
Phonak PartnerMic™ + mic	•	•	•	•
Telefoongesprekken + mic	•	•	•	•

SmartSpeech Technology	Premium L90	Advanced L70	Standard L50	Essential L30
Funcities				
SpeechSensor	•			
Speech Enhancer	•			
StereoZoom 2.0	•	•		
Dynamic Noise Cancellation	•	•		
Motion Sensor Hearing ²	•	•	•	
RogerDirect	•	•	•	•
EchoBlock	•			
Tap Control ²				
- Siri/Google Assistant	•	•		
- Streamen pauzeren/hervatten	•	•		
- Telefoongesprek opnemen/afwijzen	•	•		
SoundRelax	•	•		
DuoPhone	•	•	•	
Real Ear Sound	•	•	•	
Roger™ en directioneel instelling	•	•	•	•
UltraZoom	•	•	•	•
BroadbandBooster ³	•	•	•	•
WindBlock	•	•	•	•
Luidheidsvoorkeuregeling	•	•	•	•
Auto Acclimatization	•	•	•	•
Streaming/Mic. balans	•	•	•	•
SoundRecover2	•	•	•	•
WhistleBlock	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•
QuickSync	•	•	•	•
AOV	•	•	•	•
Kanalen voor fijnafstelling	20	20	16	12

1 Niet beschikbaar voor Phonak Sky L-PR
 2 Alleen beschikbaar voor Phonak Sky L-PR
 3 Alleen beschikbaar voor Phonak Sky L-UP

Aanpassing

	Sky L-M Sky L-M Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-PR Sky L-PR Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-SP Sky L-SP Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-UP Sky L-UP Trial L90/L70/L50/L30
Phonak Target	9.1 of hoger	9.0 of hoger	9.1 of hoger	9.0 of hoger
Noahlink Wireless, Noahlink Wireless 2	•	•	•	•
NOAHLink			•	•
HI-PRO, HI-PRO2			•	•

Akoestische koppeling

		Sky L-M Sky L-M Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-PR Sky L-PR Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-SP Sky L-SP Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-UP Sky L-UP Trial L90/L70/L50/L30
Geluidsuitgang					
Standaard toonbocht Gedempt	(HE11 680), transparant en 6 aanvullende pediatrie kleuren	•	•	•	•
	Niet-gedempt (HE 11) alleen in transparante kleur			•	•
toonbocht (mini)	Gedempt (HE11 680), transparant en 6 aanvullende pediatrie kleuren	•	•	•	•
	Niet-gedempt (HE 11) alleen in transparante kleur			•	•
SlimTube 4.0	Beschikbaar in uitvoering voor links en rechts in vijf verschillende lengtes (00, 0, 1, 2, 3)	•	•	•	
Oorstukje voor SlimTube					
Eartip	Cap dome	•	•	•	
	Open eartip	Verkrijgbaar in drie formaten (S, M, L)	•	•	
	Vented dome	Verkrijgbaar in drie formaten (S, M, L)	•	•	
	Power eartip	Verkrijgbaar in drie formaten (S, M, L)	•	•	
SlimTip	Acryl	•	•	•	
	Silicone	•	•	•	
Oorstukje voor toonbocht					
Oorstukje		•	•	•	•

Behuizing- en toonbocht-kleuren

Behuizing



H0
Beige



P1
Sand Beige



P3
Sandalwood



P4
Chestnut



P5
Champagne



P6
Silver Gray



P7
Graphite Gray



P8
Velvet Black



M6
Lava Red



M7
Blue Ocean



M8
Majesty Purple



Q2
Electric Green



Q3
Caribbean Pirate



T3
Precious Pink

Toonbocht



R1
Green



R2
Yellow



R3
Pink



R4
Orange



Q6
Blue



Q7
Purple



13
Transparant

Oplaadopties Phonak Sky L-PR

Phonak Charger Combi BTE/Phonak Charger Combi BTE 2

Sky L-PR beschikt over alle functies van Lumity waar u dol op bent en is bovendien oplaadbaar. Cliënten kunnen de hele dag genieten van hun gehoor, zelfs als ze streamen*.

*Verwachte batterijduur van 16 uur, inclusief 10 uur Roger of audio streamen.



Phonak Sky L Trial

De nieuwe Phonak Sky L Trial-hoortoestellen kunnen snel worden ingesteld op het vereiste prestatieniveau dat aansluit bij uw aanbevelingen. Dit biedt de mogelijkheid om uw cliënt al bij het eerste gesprek te voorzien van een optimale hooroplossing of een vervanger te bieden als het hoortoestel van de cliënt gerepareerd wordt. De Sky L Trial-hoortoestellen bevatten ook een vooraf geïnstalleerde Roger ontvanger voor eenvoudige demonstratie van elke Roger microfoon.

Phonak Sky L Bluetooth®-versies

Rechtstreekse telefoongesprekken/audiostreaming

Draadloze Bluetooth 4.2-technologie en de meeste oudere telefoons

Draadloze Communicatie Portfolio

	Sky L-M Sky L-M Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-PR Sky L-PR Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-SP Sky L-SP Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-UP Sky L-UP Trial L90/L70/L50/L30
Draadloze accessoires				
TV Connector	•	•	•	•
Phonak PartnerMic	•	•	•	•
Phonak RemoteControl	•	•	•	•
Roger				
Roger microfoons	•	•	•	•
App				
myPhonak Junior	•	•	•	•

Ga voor meer informatie naar www.phonak.com/sky-lumity

Ga voor meer informatie over Roger-microfoons naar www.phonak.com/roger-for-education

Ga voor meer informatie over myPhonak Junior naar www.phonak.com/myphonak-junior

life is on

Phonak zet zich sinds 1947 in voor behoud van levenskwaliteit door nieuwe akoestische deuren te openen. Sinds de oprichting van het bedrijf, al die jaren geleden, staat één overtuiging centraal: wij denken dat goed horen gelijkstaat aan je goed voelen en ontzettend belangrijk is om alles uit het leven te kunnen halen. Horen wordt zelfs rechtstreeks in verband gebracht met sociaal, emotioneel, cognitief en fysiek welzijn. Vandaag, en in de toekomst, zetten we ons in om het breedste portfolio van innovatieve hooroplossingen te kunnen bieden. Samen met onze audiciens blijven we ons richten op wat er het meest toe doet: spraakverstaan verbeteren, de levens van personen veranderen en een positief effect op de algehele maatschappij hebben.

www.phonak.com



027-0697-07/V1.00/2024-02/NLG © 2024 Sonova AG All rights reserved