

Phonak Audéo™ L.

Informações do produto

Phonak Audéo L é o portfólio abrangente de modelos RIC para perdas auditivas leves a profundas. O Phonak Audéo L inclui três designs, quatro níveis de desempenho e cinco receptores externos, incluindo o ActiveVent™ Receiver.

Desenvolvidos com a tecnologia inovadora da plataforma Phonak Lumity, os aparelhos auditivos Phonak Audéo L são a solução para os usuários que preferem caixas RIC flexíveis e discretas.



Descrição do produto



Audéo L-R
Audéo L-R Trial
L90/L70/L50/L30

Audéo L-RT
Audéo L-RT Trial
L90/L70/L50/L30

Audéo L-RL
Audéo L-RL Trial
L90/L70/L50/L30

Botão multifunção		•	•	•
Bobina de indução			•	
Bluetooth®		•	•	•
Revestimento hidrofóbico		•	•	•
Classificação IP		IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹
Dimensões	C x L x P	27,7 x 12 x 8,1 mm (1,09 x 0,47 x 0,32")	30,3 x 12,6 x 8,1 mm (1,19 x 0,5 x 0,32")	29,5 x 12,9 x 9 mm (1,16 x 0,51 x 0,35")
	Peso	2,2 g (0,08 oz)	2,6 g (0,09 oz)	2,8 g (0,1 oz)
Tempos de carregamento ²	0% a 100%	3 h	3 h	3 h
	0% a 80%	1,5 h	1,5 h	2 h
	Ajuste de 30 min	15 min	15 min	20 min

Receptor S

Potência Saída Máxima (dB NPS)	Acoplador de 2 cc	111	111	111
Ganho máx. (dB)	Acoplador de 2 cc	47	47	47
Faixa de frequência (Hz)		<100 a >8000	<100 a >8000	<100 a >8000

Receptor M

Saída Máxima (dB NPS)	Acoplador de 2 cc	114	114	114
Ganho máx. (dB)	Acoplador de 2 cc	51	51	51
Faixa de frequência (Hz)		<100 a >8000	<100 a >8000	<100 a >8000

Receptor MAV

Saída Máxima (dB NPS)	Acoplador de 2 cc	119	119	119
Ganho máx. (dB)	Acoplador de 2 cc	50	50	50
Faixa de frequência (Hz)		<100 a >8000	<100 a >8000	<100 a >8000

Receptor P

Saída Máxima (dB NPS)	Acoplador de 2 cc	122	122	122
Ganho máx. (dB)	Acoplador de 2 cc	59	59	59
Faixa de frequência (Hz)		<100 a 6300	<100 a 6300	<100 a 6300

Receptor UP

Tensão Saída Máxima (dB NPS)	Acoplador de 2 cc	132	132	132
Ganho máx. (dB)	Acoplador de 2 cc	71	71	71
Faixa de frequência (Hz)		<100 a 6100	<100 a 6100	<100 a 6100

Cores da caixa



P1
Bege
Praia



H0
Bege



P3
Madeira
de Sândalo



P4
Castanho



P5
Champanhe



P6
Prata



P7
Cinza
Grafite



P8
Veludo
Preto



Q2
Verde
Elétrico



Q3
Azul
Caribe



T3
Rosa
Precioso

Níveis de desempenho

AutoSense OS™ 5.0	Premium	Advanced	Standard	Essential
Conforto no eco	•			
Fala no carro	•			
Fala no ruído forte	•			
Música	•	•		
Conforto no ruído	•	•	•	
Fala no ruído	•	•	•	•
Situações silenciosas	•	•	•	•
Transmissão sem fio de fala + mic	•	•	•	•
Transmissão sem fio de música + mic	•	•	•	•
Programas adicionais				
Máx. de programas adicionais	4	4	4	4
Conforto no eco	•			
Fala no ruído forte	•	•		
Fala em 360°	•	•		
Fala no ruído	•	•	•	•
Situações silenciosas	•	•	•	•
Conforto no ruído	•	•	•	•
Música	•	•	•	•
Telefone acústico	•	•	•	•
Programa personalizado	•	•	•	•
Programas de transmissão				
RogerDirect + mic	•	•	•	•
PartnerMic + mic	•	•	•	•
Chamada telefônica + mic	•	•	•	•

Características	Premium	Advanced	Standard	Essential	
Tecnologia SmartSpeech	SpeechSensor	•			
	Realce de fala	•			
	StereoZoom 2.0	•	•		
	Cancelador dinâmico de Ruído	•	•		
	Sensor de movimento para a audição	•	•	•	
	RogerDirect™	•	•	•	•
	ActiveVent™	•	•	•	•
	UltraZoom	•	•	•	•
	EchoBlock	•			
	Controle por toque				
	- Siri/Google Assistant	•	•		
	- Pausar/retomar uma transmissão	•	•		
	- Aceitar/finalizar uma chamada telefônica	•	•		
	SoundRelax	•	•		
	DuoPhone	•	•	•	
	Real Ear Sound	•	•	•	
	Funcionalidades de Saúde	•	•	•	•
	WindBlock	•	•	•	•
	Ajuste das preferências do usuário	•	•	•	•
	Tinnitus Balance	•	•	•	•
	Auto Aclimatização	•	•	•	•
	Equilíbrio ambiental	•	•	•	•
	SoundRecover2	•	•	•	•
	WhistleBlock	•	•	•	•
	NoiseBlock	•	•	•	•
	QuickSync	•	•	•	•
VAO	•	•	•	•	
Canal de ajuste fino	20	20	16	12	


Ajuste

	Audéo L-R Audéo L-R Trial	Audéo L-RT Audéo L-RT Trial	Audéo L-RL Audéo L-RL Trial
Phonak Target	8.0 ou superior	8.0 ou superior	8.0 ou superior
Noahlink Wireless, Noahlink Wireless 2	•	•	•

Vedação acústica

	Receptor S	Receptor M	Receptor MAV	Receptor P	Receptor UP
Comprimento					
Disponível em quatro comprimentos diferentes (0, 1, 2, 3), esquerdo e direito	•	•	•	•	•
Oliva					
Oliva mini	•	•		•	
Oliva aberta Disponível em três tamanhos (P, M, G)	•	•		•	
Oliva ventilada Disponível em três tamanhos (P, M, G)	•	•		•	
Oliva Power Disponível em três tamanhos (P, M, G)	•	•		•	
microMolde*					
Acrílico	•	•		•	
Silicone	•	•		•	
Titânio AV			•		
Universal AV Disponível em quatro formatos (A, B, C, D)			•		
Microcaixa cShell					
Acrílico	•	•		•	•
Titânio	•	•		•	•
Faixas de adaptação					

*Disponível com opção de maior comprimento no canal

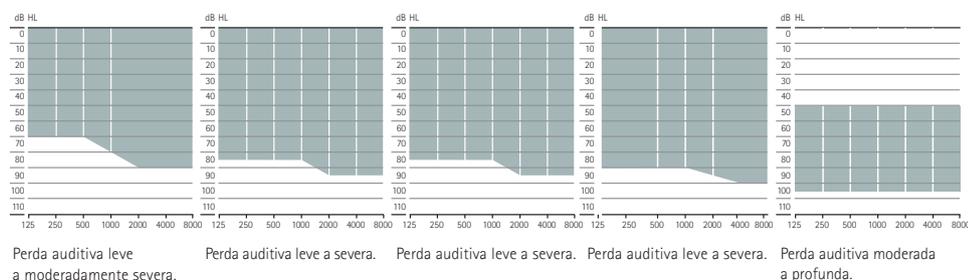

Phonak SmartSpeech™ Technology

A tecnologia SmartSpeech representa nossa dedicação ao desenvolvimento de recursos que melhoram a compreensão de fala e reduzem o esforço auditivo em vários ambientes auditivos¹. Nossa herança de recursos inclui Realce de fala, Cancelador dinâmico de Ruído e Sensor de movimento para a audição. Com o Phonak Audéo™ Lumity, introduzimos dois novos recursos: StereoZoom 2.0 e SpeechSensor, além dos benefícios existentes do receptor ActiveVent™ e da tecnologia RogerDirect™.

Phonak Audéo L Trial

Os aparelhos auditivos Phonak Audéo L Trial podem ser rapidamente ajustados para o nível de desempenho desejado, a fim de atender às suas recomendações. Todos os níveis de tecnologia em um único aparelho auditivo Phonak Audéo L Trial lhe dão muitas opções para oferecer uma solução auditiva na primeira consulta ou diminuir as lacunas durante os reparos.

¹ Appleton, J. (2020) AutoSense OS 4.0 - significantly less listening effort and preferred for speech intelligibility. Phonak Field Study News. www.phonak.com/evidence

Latzel, M. & Hobi, S. (2022) ActiveVent™ Receiver provides benefit of open and closed acoustics for better speech understanding in noise and naturalness of own voice perception. Phonak Field Study News. www.phonak.com/evidence

Thibodeau L.M. (2020) Benefits in Speech Recognition in Noise with Remote Wireless Microphones in Group Settings. Journal of the American Academy of Audiology, 31(6), 404–411

Latzel, M., Lesimple, C., & Woodward, J. (2023) Speech Enhancer significantly reduces listening effort and increases intelligibility for speech from a distance. Phonak Field Study News. www.phonak.com/evidence

Opções de carregamento do Phonak Audéo L



Phonak Charger Ease

O Phonak Charger Ease é um carregador compacto com ímãs nos encaixes de carregamento que facilitam a inserção e a remoção do Audéo L-R e RT. Usa uma porta de carregamento USB-C padrão que acende quando é fornecida energia.



Phonak Charger Case Go e Phonak Life Charger

Há duas opções disponíveis para o Audéo L-RL. O Phonak Charger Case Go possui uma bateria integrada que pode carregar dois aparelhos auditivos até três vezes. Ambos os carregadores usam uma porta de carregamento USB-C padrão e o LED na parte traseira acende quando é fornecida energia.

Versões Bluetooth® do Phonak Audéo L

Chamadas diretas/transmissão de áudio Tecnologia Bluetooth 4.2 sem fio e a maioria dos telefones mais antigos com Bluetooth

A marca e os logotipos Bluetooth® são marcas comerciais de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Sonova AG é feito sob licença.

Portfólio de comunicação sem fio

	Audéo L-R Audéo L-R Trial L90/L70/L50/L30	Audéo L-RT Audéo L-RT Trial L90/L70/L50/L30	Audéo L-RL Audéo L-RL Trial L90/L70/L50/L30
Acessório sem fio			
TV Connector	•	•	•
Phonak PartnerMic	•	•	•
Phonak Remote Control	•	•	•
Roger			
RogerDirect™	•	•	•
Aplicativos			
myPhonak	•	•	•
myPhonak Junior	•	•	•

Para obter mais informações, visite www.phonak.com/audeo-lumity

Para obter informações sobre microfones Roger, visite www.phonak.com/roger

Para obter mais informações sobre o myPhonak e o myPhonak Junior, visite www.phonak.com/apps

life is on

Desde 1947, a Phonak se dedica a preservar a qualidade de vida, abrindo novos mundos acústicos. Já naquela época, nos dias de nossa fundação, nossa empresa era movida por uma convicção formativa: acreditamos que ouvir bem equivale a bem-estar e, portanto, é essencial para viver a vida em sua plenitude. De fato, o sentido da audição está diretamente ligado ao bem-estar social, emocional, cognitivo e físico. Hoje e no futuro, nos esforçamos para oferecer o mais amplo portfólio de soluções auditivas inovadoras. E, juntamente com nossos profissionais de saúde auditiva, continuamos focando no que mais importa: melhorar a compreensão de fala, mudar a vida das pessoas e ter um efeito positivo na sociedade como um todo.

www.phonak.com



7 16 13 389 159 1682

027-0667-43\14.00\2023-06\NLG © 2022-2023 Sonova AG All rights reserved