

Phonak Sky™ Marvel



Amor ao primeiro som

Para obter mais informações, visite www.phonakpro.com

O Sky Marvel incorpora tecnologia de ponta para proporcionar um desempenho sonoro ideal, garantindo conforto, segurança e força em todos os aspectos da vida de uma criança.

Com o novo portfólio Sky Marvel, introduzimos uma combinação única de inovações tecnológicas pioneiras e recursos essenciais específicos para crianças. Nos esforçamos para oferecer às crianças somente as melhores soluções para o desenvolvimento da fala e da linguagem, para a inteligibilidade da fala e facilidade de utilização. Desenvolvido para maximizar tanto a quantidade como a qualidade da informação sonora, o Sky Marvel fornece o suporte necessário para o desenvolvimento social, emocional e cognitivo das crianças com amor desde o primeiro som.

Som rico e claro

O primeiro sistema operacional do mundo projetado especificamente para crianças

O AutoSense Sky OS 3.0 foi concebido para reconhecer as situações auditivas desafiadoras que as crianças vivem todos os dias e busca fornecer a combinação certa de gerenciamento adaptativo de ruídos para aumentar o conforto e reduzir a fadiga auditiva.¹ Com o Sky Marvel apresentamos o AutoSense Sky OS 3.0 que agora também classifica sinais transmitidos. Assim, as crianças recebem um som rico e claro ao transmitir a fala e uma qualidade sonora otimizada ao transmitir música.

Conexão com smartphones, microfones Roger™ e muito mais

Transmissão direta a partir do iOS® e Android™

Ao contrário de outros aparelhos auditivos pediátricos, o Sky Marvel conecta-se a praticamente todos os dispositivos smartphones com Bluetooth®. Ele é compatível com pareamento duplo e transmite áudio para ambos os ouvidos. Em um mundo onde os dispositivos modernos são parte da vida social e da educação das crianças, o Sky Marvel possibilita um acesso intuitivo e transmissão de qualidade de som estéreo para fala, aplicativos, música, e-books e muito mais.





Transmissão direta a partir dos microfones Roger

Com o RogerDirect™, as crianças agora podem acessar a tecnologia Roger sem precisar conectar um receptor externo. Os receptores do Roger podem ser instalados sem fio nos aparelhos auditivos Sky Marvel, eliminando toda a complexidade da compatibilidade do receptor. Essa combinação imbatível é oferecida agora na menor embalagem de sempre, facilitando o acesso de crianças a mais palavras e conversas². O Sky com Roger é agora até 42% menor e 32% mais leve do que a geração anterior.*

Recarregável

Totalmente carregado em apenas 3 horas, o Sky M-PR oferece um dia inteiro de audição, incluindo 10 horas de uso do Roger ou transmissão de mídia.** Pais, cuidadores, professores e crianças podem ficar tranquilos porque os aparelhos auditivos estarão carregados durante todo o dia.

Design específico para crianças

Força líder na indústria

Com o Sky Marvel, as crianças estão livres para explorar e brincar, até quando a vida fica um pouco molhada. Os aparelhos auditivos Marvel são fabricados com caixas (para BTEs) robustas, tornando-os resistentes à água e protegendo-os contra poeira (classificação IP68).***

Características de segurança

Os pequenos ouvintes estão protegidos graças ao gancho acústico inviolável e à nova trava do compartimento da bateria, mantendo as baterias com segurança no aparelho auditivo e longe de mãos e bocas pequenas. A bateria recarregável de íons de lítio interna do Sky M-PR não pode ser removida e engolida.

Nova luz indicadora

O Sky Marvel possui uma luz indicadora com um novo design que é intuitiva, discreta e confirma precisamente o status do aparelho auditivo.

² Benitez-Barrera, C.R., Angley G., & Tharpe, A.M. (2018). Remote microphone system use at home: Impact on caregiver talk. Journal of Speech, Language and Hearing Research, Vol. 61, 399-409.

* Comparação do Sky M-M vs Sky B-P + Roger 18 (receptores específicos)

** O tempo de carga real depende da vida útil restante da bateria, mas não deverá exceder 3 horas.

*** IP68 indica que o aparelho auditivo é resistente à água e está protegido contra poeira. O aparelho resistiu a uma submersão contínua em água a 1 metro de profundidade durante 60 minutos e a 8 horas de exposição em uma câmara de poeira, tal como definido na norma IEC 60529.


Descrição do produto



Sky M-M
Sky M-M Trial
M90/M70/M50/M30

Bateria	312		
Botão multifunção	•		
Bobina de indução	•		
Bluetooth®	•		
Nano coating	•		
Classificação IP	IP68		
Dimensões (C x L x P) mm	31,3 x 14,1 x 7,3		
polegada	1,23 x 0,56 x 0,29"		
Peso g/oz	2,18/0,077		
Tempos de carga	0% a 100%		
	0 a 80%		
	Ajuste de 30 min		
Nível max. de saída (acoplador de 2cc)	Tubo fino 4.0	HE11 680	
	dB SPL	122	128
	dB	58	63
Faixa de frequência Hz	<100 - 6500	<100 - 8000	
Consumo de energia mA	1,5	1,6	

Faixa de adaptação

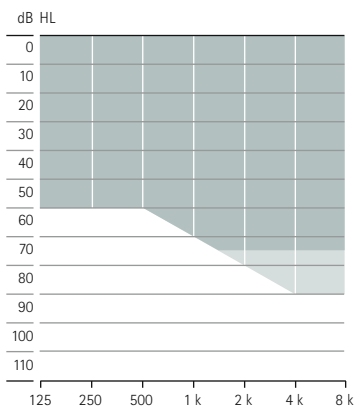


Perda auditiva leve a moderadamente severa, todas as configurações audiométricas



Sky M-PR
Sky M-PR Trial
M90/M70/M50/M30

Bateria	Recarregável interna		
Botão multifunção	•		
Bobina de indução	•		
Bluetooth®	•		
Nano coating	•		
Classificação IP	IP68		
Dimensões (C x L x P) mm	36,7 x 16,4 x 8,5		
polegada	1,44 x 0,65 x 0,33"		
Peso g/oz	3,71/0,131		
Tempos de carga	3 h		
	1,5 h		
	10 min		
Nível max. de saída (acoplador de 2cc)	Tubo fino 4.0	HE11 680	
	dB SPL	127	130
	dB	60	66
Faixa de frequência Hz	<100 - 7000	<100 - 6800	
Consumo de energia mA	2,1	2,0	

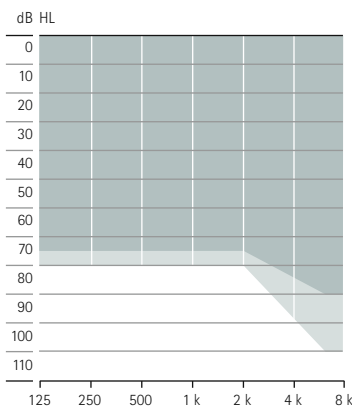


Perda auditiva leve a severa, todas as configurações audiométricas



Sky M-SP
Sky M-SP Trial
M90/M70/M50/M30

Bateria	13		
Botão multifunção	•		
Bobina de indução	•		
Bluetooth®	•		
Nano coating	•		
Classificação IP	IP68		
Dimensões (C x L x P) mm	40 x 16,9 x 8,5		
polegada	1,57 x 0,67 x 0,33"		
Peso g/oz	4,4/0,155		
Tempos de carga	0% a 100%		
	0 a 80%		
	Ajuste de 30 min		
Nível max. de saída (acoplador de 2cc)	HE11	HE11 680	
	dB SPL	139	133
	dB	81	75
Faixa de frequência Hz	<100 - 5000	<100 - 5000	
Consumo de energia mA	2,1	2,0	

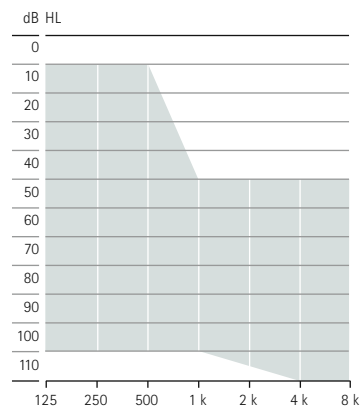

Perda auditiva leve a profunda, todas as configurações audiométricas

■ Tubo fino 4.0
■ HE11 680

Opções de cores de caixa e gancho

Caixa (para BTEs)



H0
Bege



P1
Bege Praia



P3*
Madeira Sândalo



P4*
Castanho



P5*
Champagne



P6
Prata



P8
Veludo Preto



Q2
Verde elétrico



Q3
Azul Caribe



T3
Rosa precioso



T7
Branco alpino



M6
Vermelho Lava



M7
Oceano Azul



M8
Roxo Majestade

Gancho



R1
Verde



R2
Amarelo



R3
Rosa



Q6
Azul



I3
Transparente



Q7
Roxo



R4
Laranja

* As cores P3, P4 e P5 não estão disponíveis para o nível de desempenho M30.

Níveis de desempenho

	Premium M90	Advanced M70	Standard M50	Essential M30
AutoSense Sky OS 3.0				
Situações silenciosas	•	•	•	•
Fala no ruído	•	•	•	•
Conforto no ruído	•	•	•	
Música	•	•		
Fala no ruído forte ³	•			
Fala no carro	•			
Conforto em situações de eco	•			
Fala de mídia + mic	•	•	•	•
Música de mídia + mic	•	•	•	•
Programas adicionais				
Máx. de programas adicionais	3	3	3	3
Conforto em situações de eco	•			
Fala no ruído forte	•	•		
Fala em 360°	•	•		
Fala no ruído	•	•	•	•
Situações silenciosas	•	•	•	•
Conforto no ruído	•	•	•	•
Música	•	•	•	•
Telefone acústico	•	•	•	•
Programa personalizado	•	•	•	•
Programas de transmissão				
RogerDirect + mic	•	•	•	•
PartnerMic + mic	•	•	•	•
Chamada telefônica + mic	•	•	•	•

	Premium M90	Advanced M70	Standard M50	Essential M30
Características				
UltraZoom	•	•	•	•
Aumento da relação sinal/ruído	•	•	•	
DuoPhone	•	•	•	
SoundRecover2	•	•	•	•
Ajuste das preferências do usuário	•	•	•	•
Real Ear Sound	•	•	•	
Canais de ajuste fino	20	16	12	8
WhistleBlock	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•
WindBlock	•	•		
EchoBlock	•			
SoundRelax	•	•		
QuickSync	•	•	•	•
Ventilação Acusticamente Otimizada	•	•	•	•
auto Aclimatização	•	•	•	•
Equilíbrio ambiental	•	•	•	•
RogerDirect™	•	•	•	•
Configuração Roger e direcionalidade	•	•	•	

Ajuste

	Sky M-M Sky M-M Trial M90/M70/M50/M30	Sky M-PR Sky M-PR Trial M90/M70/M50/M30	Sky M-SP Sky M-SP Trial M90/M70/M50/M30
Phonak Target	6.1 ou superior	6.1 ou superior	6.2 e superior
Noahlink Wireless	•	•	•
Noahlink			•
HI-PRO e HI-PRO 2			•

Vedação acústica

Saída de som	Gancho padrão	Gancho (HE 11 680) transparente e 6 cores pediátricas adicionais (consultar a página 4) para o Sky M-M e Sky M-PR Sem gancho (HE 11) somente na cor transparente para Sky M-SP	
	Gancho inviolável	Minigancho (HE 11 680) transparente e 6 cores pediátricas adicionais (consultar a página-4) para o Sky M-M e Sky M-PR Sem minigancho (HE 11) somente na cor transparente para Sky M-SP	
	Tubo fino 4.0	Disponível para os lados direito e esquerdo com cinco comprimentos diferentes (00, 0, 1, 2, 3)	
Peça para o tubo fino	Oliva	Oliva mini	
		Oliva aberta	Disponível em três tamanhos (S, M, L)
		Oliva ventilada	Disponível em três tamanhos (S, M, L)
		Oliva Power	Disponível em três tamanhos (S, M, L)
	microMolde™	Acrílico	
		Silicone	
		Titânio	
Peça para o gancho	Molde da orelha		
	Oliva universal		

Phonak Sky Marvel Trial

Os novos aparelhos auditivos Phonak Sky M Trial podem ser rapidamente configurados no nível de desempenho desejado a fim de atender às suas recomendações. Os vários níveis de tecnologia em um único aparelho auditivo Phonak Sky M Trial lhe dão muitas opções para oferecer uma solução auditiva na primeira consulta ou durante os reparos.

Phonak Charger BTE RIC

O carregador é apropriado para todos os aparelhos auditivos Marvel BTE e RIC recarregáveis. Ele possui um espaço maior para guardar moldes, uma entrada de carregamento USB e uma luz indicadora.



Versões do Phonak Sky M Bluetooth®

Chamadas diretas/transmissão de áudio

Tecnologia Bluetooth® 4.2 sem fio e a maioria dos telefones mais antigos com Bluetooth

Portfólio de comunicação sem fio

		Sky M-M Sky M-M Trial M90/M70/M50/M30	Sky M-PR Sky M-PR Trial M90/M70/M50/M30	Sky M-SP Sky M-SP Trial M90/M70/M50/M30
Acessório sem fio	TV Connector	•	•	•
	Phonak PartnerMic™	•	•	•
	Phonak RemoteControl	•	•	•
Roger™	Microfones Roger	•	•	•

Para mais informações, visite:



www.phonakpro.com/skymarvel



www.phonakpro.com/roger

Life is on

Na Phonak, acreditamos que ouvir bem é essencial para aproveitar a vida ao máximo. Há mais de 70 anos, somos fiéis à nossa missão, desenvolvendo soluções auditivas pioneiras que mudam a vida das pessoas e permitem o seu sucesso social e emocional. Life is on.

www.phonakpro.com