

Phonak Virto™ Paradise





O Phonak Virto P é o portfólio abrangente de ITE para perdas auditivas leves a profundas. O Virto P inclui dois modelos, quatro níveis de potência e quatro níveis de desempenho, incluindo um gerador de ruído para o tratamento do zumbido. Alimentado pela tecnologia inovadora da plataforma da Phonak Paradise, os aparelhos auditivos Virto P são a solução ideal para os pacientes que preferem uma solução personalizada com o melhor desempenho auditivo.

Para obter mais informações, visite www.phonakpro.com

A Sonova brand

PHONAK
life is on

Descrição do produto

	 Virto P-10 NW O P90/P70/P50/P30	 Virto P-312 P90/P70/P50/P30
Nível de potência		
M	•	•
P	•	•
SP	•	•
UP**		•
Configuração de hardware/opções/tecnologia		
Tamanho da bateria	10	312
Botão (programa/volume)	Opcional	•
EasyPhone (para telefones acústicos)	•	
MiniControl (para alterar o programa ou volume)	•	
Controle de volume (roda)	Opcional	Opcional
Bobina de indução	Opcional	
Tecnologia do microfone	Omni	Direcional
Classificação IP (sem CV)	IP68†	
Bluetooth®		•
Binaural VoiceStream Technology		•

Cores

Cores do faceplate



26
Rosa



22
Cacau



28
Marrom



06
Preto

Cores da caixa (para ITEs) acrílica



21
Transparente



26
Rosa



22
Cacau



28
Marrom



06
Preto





Vermelho
Vermelho transparente



Azul
Azul transparente

Estilos de caixa (para ITEs)

	 Virto P-10 NW O	 Virto P-312
IIC	•	
CIC	•	
MC	•	
ITC	•	
HS	•	•
FS	•	•

Níveis de desempenho

	Premium P90	Advanced P70	Standard P50	Essential P30	Características	Premium P90	Advanced P70	Standard P50	Essential P30
AutoSense OS[™] 4.0					UltraZoom	Premium	Advanced	Standard	Essential
Fala no ruído forte*	•				Cancelador dinâmico de ruído	•			
Fala no carro	•				Realce de fala	•			
Conforto no eco	•				EchoBlock	•			
Música	•	•			WindBlock	•	•		
Conforto no ruído	•	•	•		SoundRelax	•	•		
Fala no ruído	•	•	•	•	DuoPhone	•	•	•	
Situações silenciosas	•	•	•	•	Configuração do Roger e direcionalidade*	•	•	•	
Transmissão sem fio de fala + mic*	•	•	•	•	SoundRecover2	•	•	•	•
Transmissão sem fio de música + mic*	•	•	•	•	Ajuste das preferências do usuário	•	•	•	•
Programas adicionais					WhistleBlock	•	•	•	•
Máx. de programas adicionais	4	4	4	4	NoiseBlock	•	•	•	•
Conforto no eco	•				QuickSync*	•	•	•	•
Fala no ruído forte*	•	•			Ventilação acusticamente otimizada	•	•	•	•
Fala em 360° *	•	•			Tinnitus Balance	•	•	•	•
Fala no ruído	•	•	•	•	auto Aclimatização	•	•	•	•
Situações silenciosas	•	•	•	•	Equilíbrio ambiental	•	•	•	•
Conforto no ruído	•	•	•	•	RogerDirect*	•	•	•	•
Música	•	•	•	•	Canais de ajuste fino	20	20	16	12
Telefone acústico	•	•	•	•					
Programa personalizado	•	•	•	•					
Programas de transmissão									
RogerDirect + mic*	•	•	•	•					
PartnerMic + mic*	•	•	•	•					
Chamada telefônica + mic*	•	•	•	•					

Ajuste

Software	Phonak Target 7.3 ou superior
Interfaces	Noahlink Wireless, cabo de programação, HI-PRO, HI-PRO2

* Apenas para Virto P-312

** Disponível apenas em países específicos

1. IP68 indica que o aparelho auditivo é resistente à água e à prova de poeira. Resistiu a uma submersão contínua a 1 metro de água durante 60 minutos e a 8 horas de exposição à câmara de poeira, tal como definido na norma IEC60529.

A marca e os logotipos Bluetooth[®] são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc.

IOS é uma marca comercial da Cisco, Inc.


Android é uma marca comercial da Google, Inc.

Vedação acústica


Nível de potência

		M	P	SP	UP**
Saída máxima (dB NPS)	Acoplador de 2cc	109	115	119	127
Ganho máximo (dB)	Acoplador de 2cc	40	50	60	70
Faixa de frequência (Hz)	Acoplador de 2cc	<100-7000	<100-6700	<100-7000	<100-5200
Consumo de energia (mA)	Sem conectividade	1.1.	1.2	1.1.	
	Com conectividade	1.7	1.8	1.7	1.7


Faixa de adaptação

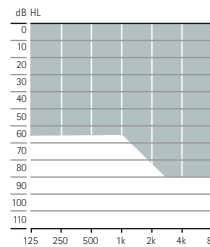


Para perda auditiva leve a moderada, todas as configurações audiométricas

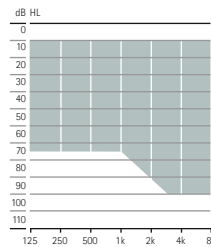

Para perda auditiva leve a moderadamente severa, todas as configurações audiométricas

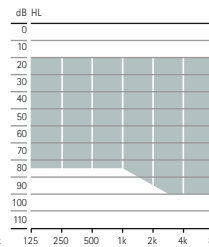

Para perda auditiva moderada a severa, todas as configurações audiométricas

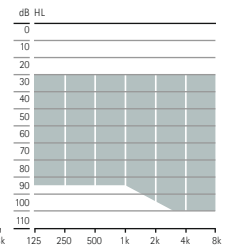

Para perda auditiva moderada a profunda, todas as configurações audiométricas

Portfólio de comunicação sem fio

	Virto P-10 NW O P90/P70/P50/P30	Virto P-312 P90/P70/P50/P30
Acessório sem fio		
TV Connector		•
Phonak PartnerMic		•
Phonak Remote Control		•
Roger		
RogerDirect™		•
Aplicativos		
myPhonak		•

Para obter mais informações sobre o Virto Paradise, visite www.phonakpro.com/virtoparadise

Para obter mais informações sobre os microfones Roger, visite www.phonakpro.com/roger

Para obter mais informações sobre os aplicativos Phonak, visite www.phonakpro.com/smartapps

life is on

Na Phonak, acreditamos que ouvir melhor significa viver melhor, o que é essencial para uma vida completa. Por mais de 70 anos, somos apaixonados por criar um mundo onde todos podem desfrutar do prazer de ouvir. Nossas tecnologias auditivas inovadoras são desenvolvidas para todas as idades e graus de perda auditiva, para que as pessoas se conectem socialmente, prosperem intelectualmente e emocionalmente.

www.phonakpro.com

027-0648-12\N2.00\01-2022\NLG © 2022 Sonova AG. All rights reserved