

Phonak Audéo™ L

Ürün bilgisi

Phonak Audéo L, hafif ila çok ileri derecede işitme kayıpları için kapsamlı bir RIC portföyü sunar. Phonak Audéo L, üç tasarım, beş performans seviyesi ve ActiveVent™ receiver dahil olmak üzere beş harici receiver içerir.

Phonak Lumity platformunun yenilikçi teknolojisiyle güçlendirilen Phonak Audéo L işitme cihazları, esnek ve dikkat çekmeyen RIC ürün grubunu tercih eden hastalara yönelik bir çözümdür.



Ürün açıklaması



		Audéo L-R Audéo L-R Trial L90/L70/L50/L30/L20	Audéo L-RT Audéo L-RT Trial L90/L70/L50/L30	Audéo L-RL Audéo L-RL Trial L90/L70/L50/L30
Çok fonksiyonlu düğme		•	•	•
Telecoil			•	
Bluetooth®		•	•	•
Hidroforbik kaplama		•	•	•
IP derecesi		IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹
Boyutlar	U x G x D	27,7 x 12 x 8,1 mm (1,09 x 0,47 x 0,32")	30,3 x 12,6 x 8,1 mm (1,19 x 0,5 x 0,32")	29,5 x 12,9 x 9 mm (1,16 x 0,51 x 0,35")
	Ağırlık	2,2 g (0,08 oz)	2,6 g (0,09 oz)	2,8 g (0,1 oz)
Şarj süreleri ²	%0 ila %100	3 sa	3 sa	3 sa
	%0 ila %80	1,5 sa	1,5 sa	2,0 sa
	30 dk. fitting	15 dk.	15 dk.	20 dk.
S Receiver				
Maksimum Güç Çıkışı (dB SPL)	2 cc coupler	111	111	111
Maks. kazanç (dB)	2 cc coupler	47	47	47
Frekans aralığı (Hz)		<100 - >8000	<100 - >8000	<100 - >8000
M Receiver				
Maksimum Güç Çıkışı (dB SPL)	2 cc coupler	114	114	114
Maks. kazanç (dB)	2 cc coupler	51	51	51
Frekans aralığı (Hz)		<100 - >8000	<100 - >8000	<100 - >8000
MAV Receiver				
Maksimum Güç Çıkışı (dB SPL)	2 cc coupler	119	119	119
Maks. kazanç (dB)	2 cc coupler	50	50	50
Frekans aralığı (Hz)		<100 - >8000	<100 - >8000	<100 - >8000
P Receiver				
Maksimum Güç Çıkışı (dB SPL)	2 cc coupler	122	122	122
Maks. kazanç (dB)	2 cc coupler	59	59	59
Frekans aralığı (Hz)		<100 - 6300	<100 - 6300	<100 - 6300
UP Receiver				
Maksimum Güç Çıkışı (dB SPL)	2 cc coupler	132	132	132
Maks. kazanç (dB)	2 cc coupler	71	71	71
Frekans aralığı (Hz)		<100 - 6100	<100 - 6100	<100 - 6100

Kabin renkleri



P1
Kum Beji



H0
Bej



P3
Sandal Ağacı



P4
Kestane



P5
Şampanya



P6
Gümüş Gri



P7
Grafir Gri



P8
Kadife Siyah

¹ IP68, işitme cihazının su ve toz geçirmez olduğunu belirtir. IEC60529 standardı uyarınca, sürekli olarak 1 metre tatlı su derinliğinde 60 dakika boyunca ve toz odasında 8 saat boyunca dayanıklılık göstermiştir.
² Gerçek şarj süresi kalan pil ömrüne bağlıdır, ancak 3 saati aşmayacaktır.



Performans seviyeleri

	Premium	Advanced	Standard	Essential	Low Essential
AutoSense OS™ 5.0					
Ekoda Konfor	•				
Arabada Konuşma	•				
Yüksek Gürültüde Konuşma	•				
Müzik	•	•			
Gürültüde Konfor	•	•	•		
Gürültüde Konuşma	•	•	•	•	•
Sakin Ortam	•	•	•	•	•
Ortam konuşması + mikrofon	•	•	•	•	•
Ortam müziği + mikrofon	•	•	•	•	
Ek programlar					
Maks. ek programlar	4	4	4	4	4
Ekoda Konfor	•				
Yüksek Gürültüde Konuşma	•	•			
360° Konuşma	•	•			
Gürültüde Konuşma	•	•	•	•	•
Sakin Ortam	•	•	•	•	•
Gürültüde Konfor	•	•	•	•	
Müzik	•	•	•	•	
Akustik telefon	•	•	•	•	•
Özel program	•	•	•	•	•
Aktarım programları					
RogerDirect + mikrofon	•	•	•	•	
PartnerMic + mikrofon	•	•	•	•	
Telefon görüşmesi + mikrofon	•	•	•	•	•

	Premium	Advanced	Standard	Essential	Low Essential
Özellikler					
SpeechSensor	•				
Konuşma Güçlendirici	•				
StereoZoom 2.0	•	•			
Dinamik Gürültü Engelleyici	•	•			
Hareket Sensörlü İşitme	•	•	•		
RogerDirect™	•	•	•	•	
Roger ve Yönel aktarım	•	•	•	•	
UltraZoom	•	•	•	•	•
EchoBlock	•				
Bağlantı kontrolü					
- Siri/Google Assistant	•	•			
- Ses aktarımını duraklatma/sürdürme	•	•			
- Telefon aramasını kabul etme/bitirme	•	•			
SoundRelax	•	•			
DuoPhone	•	•	•		
Real Ear Sound	•	•	•		
Sağlık işlevleri	•	•	•	•	
WindBlock	•	•	•	•	
Kullanıcı Tercih Ayarı	•	•	•	•	
Tinnitus Balance	•	•	•	•	
Automatic Acclimatization	•	•	•	•	
Çevresel denge	•	•	•	•	
SoundRecover2	•	•	•	•	•
WhistleBlock	•	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•	•
QuickSync	•	•	•	•	•
AOV	•	•	•	•	•
İnce ayar kanalı	20	20	16	12	8

Fitting


	Audéo L-R Audéo L-R Trial	Audéo L-RT Audéo L-RT Trial	Audéo L-RL Audéo L-RL Trial
Phonak Target	8.0 veya üstü	8.0 veya üstü	8.0 veya üstü
Noahlink Wireless	•	•	•



Akustik bağlantı

Uzunluk	S Receiver	M Receiver	MAV Receiver	P Receiver	UP Receiver
Sağda ve solda ve dört farklı uzunlukta mevcuttur (0, 1, 2, 3)	•	•	•	•	•
Dome					
Kapaklı dome	•	•		•	
Açık dome Üç boyutta mevcuttur (S, M, L)	•	•		•	
Ventli dome Üç boyutta mevcuttur (S, M, L)	•	•		•	
Güçlü dome Üç boyutta mevcuttur (S, M, L)	•	•		•	
SlimTip*					
Akrilik	•	•		•	
Silikon	•	•		•	
Titanyum AV			•		
Evrensel AV Dört şekilde mevcuttur (A, B, C, D)			•		
cShell					
Akrilik	•	•		•	•
Titanyum	•	•		•	•
Fitting aralıkları					

*Ekstra kanal uzunluğu seçeneği mevcuttur

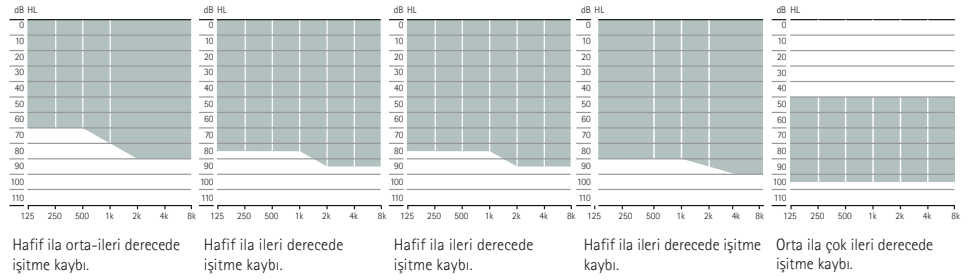

SmartSpeech™ Teknolojisi

SmartSpeech Teknolojisi, Phonak'ın çeşitli dinleme ortamlarında konuşma anlamayı iyileştiren ve dinleme eforunu azaltan özellikler tasarlamaya olan adanmışlığını temsil eder¹. Sunduğumuz özellikler arasında Konuşma Güçlendirici, Dinamik Gürültü Engelleyici ve Hareket Sensörlü İşitme bulunmaktadır. Phonak Audéo™ Lumity ile ActiveVent™ Receiver ve RogerDirect™ Teknolojisinin mevcut avantajlarına ek olarak iki yeni özellik sunuyoruz: StereoZoom 2.0 ve SpeechSensor.

Phonak Audéo L Trial™

Phonak Audéo L Trial işitme cihazları, önerilerinize uyacak şekilde istenen performans seviyesine hızlı bir şekilde ayarlanabilir. Tek bir Phonak Audéo L Trial işitme cihazındaki tüm teknoloji seviyeleri, ilk randevuda işitme çözümü sağlamak veya onarımlar sırasında eksikliği doldurmak için size birçok seçenek sunar.

¹ Appleton, J. (2020) AutoSense OS 4.0 - significantly less listening effort and preferred for speech intelligibility. Phonak Field Study News, www.phonakpro.com/evidence web sitesinden alınmıştır, erişim tarihi: Şubat 2022.

Latzel, M. & Hobi, S. (2022) Receiver with mechanical vent provides benefit of open and closed acoustics for better speech understanding in noise and naturalness of own voice perception. Phonak Field Study News hazırlık aşamasında. 2022 yılının ortalarında bekleniyor.

Thibodeau L. M. (2020) Benefits in Speech Recognition in Noise with Remote Wireless Microphones in Group Settings. Journal of the American Academy of Audiology, 31(6), 404-411.

Phonak Audéo L şarj seçenekleri



Phonak Charger Ease

Phonak Charger Ease, şarj yuvalarında Audéo L-R ve RT'yi takmayı ve çıkarmayı kolaylaştıran mıknatıslara sahip kompakt bir şarj cihazıdır. Güç sağlandığında ışığı yanan standart bir USB-C şarj bağlantı noktası kullanır.



Phonak Charger Case Go ve Phonak Life Charger

Audéo L-RL için iki seçenek mevcuttur. Phonak Charger Case Go, iki işitme cihazını üç defaya kadar şarj edebilen dahili bir pile sahiptir. Her iki şarj cihazı da standart bir USB-C şarj bağlantı noktası kullanır ve güç sağlandığında arkadaki LED yanar.

Phonak Audéo L Bluetooth® versiyonları

[Doğrudan arama / ses aktarımı](#)

Bluetooth® 4.2 kablosuz teknolojisi ve birçok eski Bluetooth telefon

Bluetooth® marka ismi ve logoları Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır ve bu tür markaların Sonova AG tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır.

Kablosuz iletişim portföyü

	Audéo L-R Audéo L-R Trial L90/L70/L50/L30	Audéo L-RT Audéo L-RT Trial L90/L70/L50/L30	Audéo L-RL Audéo L-RL Trial L90/L70/L50/L30	Audéo L-R Audéo L-R Trial L20
Kablosuz aksesuarlar				
TV Connector	•	•	•	•
Phonak PartnerMic	•	•	•	
Phonak RemoteControl	•	•	•	
Roger				
RogerDirect™	•	•	•	
Uygulamalar				
myPhonak	•	•	•	•

Daha fazla bilgi için lütfen www.phonakpro.com/audeolumity adresini ziyaret edin

Roger mikrofonlar hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.phonakpro.com/roger adresini ziyaret edin

eÇözüm'ler hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.phonakpro.com/smartapps adresini ziyaret edin



life is on


1947'den bu yana Phonak, yeni akustik dünyalar yaratarak yaşam kalitesini korumaya kendini adanmıştır. Kurulduğumuz günden bugüne şirketimiz, geliştirmeye dayalı bir inançla hareket etmektedir: İyi işitmenin aynı zamanda iyi olmak ve hissetmek olduğuna ve hayatı en iyi şekilde yaşamak için gerekli olduğuna inanıyoruz. Aslında, işitme duyusu doğrudan sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel iyilik hali ile bağlantılıdır. Gelecekte olacağı gibi bugün de en geniş yenilikçi işitme çözümleri portföyünü sunmak için geliştireceğiz. İşitme uzmanlarımızla birlikte en önemli noktalara odaklanmaya devam ediyoruz: konuşmayı anlamayı iyileştirmek, insanların hayatlarını değiştirmek ve bir bütün olarak toplum üzerinde olumlu bir etki yaratmak.

www.phonak.com



027-0667-22(N3.00)2022-08/NLG © 2022 Sonova AG All rights reserved

sonova
HEAR THE WORLD

 Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · İsviçre

